

Oticon Opn Play™ tilslutningsmuligheder i klasseværelset

Et komplet udvalg af brugervenlige løsninger til klasseværelset

ConnectClip partnermikrofon

ConnectClip forbindes til den integrerede 2.4 GHz-modtager



Universale modtagere

- Forbindelse til Oticon Amigo FM
- Forbindelse til systemer fra andre producenter



FM 10-adapter



Amigo R2-modtager




Universal hals-slynge



Amigo Arc

Oticon Amigo FM

Dedikeret FM-modtager

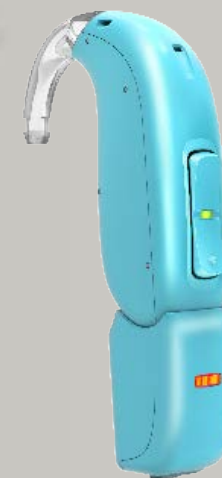

Amigo R12G2

Oticon Opn Play™ tilslutningsmuligheder i klasseværelset



Oticon Amigo FM-modtagere

Systemet kræver en FM-sender og en FM-modtager. Sæt FM-modtageren på høreapparatet, enten direkte eller ved at bruge en adapter. Tænd herefter for FM-senderen for at aktivere FM-systemet.

- For at kunne sætte enten Oticon Amigo R12G2 eller FM 10-adapter på Oticon Opn Play BTE PP skal den almindelige batteriskuffe udskiftes med en FM-adapter-batteriskuffe.
- FM-adapter-batteriskuffen og Oticon Amigo R12G2 fås i samme farver som høreapparatet.
- FM-adapter-batteriskuffen kan børnesikres ved at isætte de særlige venstre/højre farvemarkeringer til børnesikring.



FM-adapter-batteriskuffe



Amigo T30/T31 FM-sender



Amigo R12G2 dedikeret FM-modtager



Amigo R2 universal FM-modtager



FM 10 universal FM-adapter

Giv børnene nem adgang til verden omkring dem

Tilslutningsmuligheder

Stereostreaming (2.4 GHz)	•	•	•	•
Oticon ON App	•	•	•	•
ConnectClip	•	•	•	•
Remote Control 3.0	•	•	•	•
TV Adapter 3.0	•	•	•	•
Phone Adapter 2.0	•	•	•	•

Et komplet udvalg af brugervenlige løsninger til klasseværelset

Modtagere til brug i klasseværelset

integreret 2.4 GHz-modtager	•	•	•	•
Dedikeret FM-modtager	Amigo R12G2	-	-	-
Universal FM-modtager	Amigo R2	-	-	-
Universal halsslynge	Amigo Arc	Amigo Arc	Amigo Arc	-

Integreret 2.4 GHz-løsning

En integreret løsning med 2.4 GHz Bluetooth™ low energy-modtager, som er indbygget i alle Opn Play høreapparater. Tale streames problemfrit fra mikrofonen i **ConnectClip**.

Dedikeret FM-løsning

Den dedikerede **Oticon Amigo R12G2** FM-modtager integreres diskret i designet af Oticon Opn Play BTE PP. Denne integrerede løsning kan bruges med Oticon Amigo FM-sendere.

Universal løsning

Oticon Opn Play BTE PP sikrer fuld kompatibilitet med eksisterende klasseværelsesløsninger via en **FM 10-adapter**. Eleven kan bruge en universalløsning ved at bruge en valgfri universalmodtager sammen med en FM 10-adapter.

Universal halsslynge

Oticon Opn Play-modeller med telespole giver kompatibilitet med Oticon Amigo FM-sendere via **Oticon Amigo Arc** FM halsslynge. Denne universale halsslynge-løsning er en fælles FM-løsning, som kun kræver en FM-modtager pr. elev.