

Produktinformation

TV Adapter 2.0

Et fuldstændigt integreret system

Med ConnectLine er det brugeren, der har kontrol over systemet og ikke omvendt. Avancerede funktioner såsom AutoPriority, AutoConnect og SelectMe sørger for, at brugerne fx kan høre og tage telefonen, mens de ser fjernsyn.

Brugervenlig

ConnectLine er udviklet og grundigt afprøvet¹ med brugere af høreapparater i tankerne, for at sikre at det er brugervenligt.

Support af flere kilder

For brugere, som har brug for mere end én lydkilde, fx. to fjernsyn, vil funktionen SelectMe™ sørge for problemfri skift fra den ene adapter til den anden.

Digitale lydkilder


ConnectLine TV Adapter 2.0 understøtter digital lyd i to gængse formater: digital stereo (PCM) og Dolby® Digital. Dette giver brugere flere muligheder for at kunne høre streamet lyd fra hjemmebiografssystemer og fladskærms-tv.

Lyd fra fjernsyn og lydsystemer

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at brugerens udstyr rent faktisk kan understøtte det ønskede lyd-output. Noget udstyr kræver, at indstillinger i fjernsynets lydkonfiguration ændres.

Yderligere oplysninger

Besøg www.oticon.dk/connectline for yderligere oplysninger om ConnectLine-systemet.

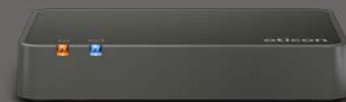

Med en ConnectLine TV Adapter 2.0 kan brugere af Oticon høreapparater høre lyden fra et fjernsyn eller en anden lydkilde ved deres foretrukne lydstyrke ved at bruge Streamer Pro 1.1 eller nyere. ConnectLine TV Adapter 2.0 understøtter en række tilslutninger, heriblandt digital stereo og Dolby® Digital via det optiske TOSLINK.

Henvisninger

1. "Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" fra DialogDesign (<http://www.DialogDesign.dk>), 15. juni 2011, 14. oktober 2011 og 7. december 2011.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Æsken med TV Adapter 2.0 indeholder:

- Brugsanvisning
- Strømforsyning
- TV Adapter 2.0 - sort
- RCA til RCA stereokabel
- Minijack 3,5 mm til RCA-konverter
- TOSLINK optisk kabel 2.0 m



Tekniske oplysninger

| | |
|---|---|
| Navn/model | Connectline TV Adapter 2.0 / BS-F200 |
| FCC ID IC | U28TVBOX03 1350B-TVBOX03 |
| ConnectLines systemfunktioner | AutoPairing: Tv-adapteren vil i parringstilstand automatisk parres til Streameren. AutoConnect: Der skiftes automatisk tilbage til fjernsynslyd efter endt telefonsamtale. AutoPriority: Et opkald prioriteres over fjernsynets lyd. SelectMe: Skifter mellem to eller flere tv-adapttere. |
| Kompatibilitet | ConnectLine TV Adapter 2.0 fungerer med alle versioner af Streamere lige fra Streamer 1.4, Streamer Pro 1.1 og nyere. For bedst mulig kvalitet bør det seneste firmware anvendes. Streamere kan opgraderes med ConnectLine-værktøjet i tilpasningssoftwaren Genie. Bemærk: SelectMe til fjernsyn virker kun med Streamer Pro 1.1 eller nyere. |
| Dimensioner | 124 x 80 x 21 mm; vægt 100 g. |
| Input/format | Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverteren) SCART (V+H) (SCART kan bestilles hos Oticon som separat tilbehør, RCA-kabel medfølger) RCA (V+H) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby® Digital |
| Output | TOSLINK (buffer-output fra TOSLINK-input) |
| Rækkevidde | Op til 30 m med Streamer Pro (i fri sigtelinje) |
| Lyd-input/format | Stereo (analogt input) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby® digital (TOSLINK) |
| Latens (tv-adapterens input til høreapparatet) | Analog: 37 ms Digital: 39 ms Dolby® Digital: 59 ms. |
| Line-input, følsomhed | 6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ |
| Båndbredde, lyd | 7.4 kHz/mono fra tv-input til høreapparat |
| Dynamisk selvjustering | AGC (analoge input) (linje ind ca. 0 dB 5 sek.) |
| Statusindikatorer | Afbryder og status-LED foran |
| Monteringsmuligheder | Anbragt på bord, vægmonteret |
| Farver | Sort (black) |
| Frekvens | Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd) |
| Emissioner | Altid under 10mW (10 dBm) in overensstemmelse med alle relevante ISM-standarder |
| Brugsmiljø | Indendørs |
| Driftsforhold | Temperatur: +5 °C til +40 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa |
| Opbevarings- og transportforhold | Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25 °C til +70 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700hPa til 1060hPa |
| Strømforsyning | Inaktiv, ikke forbundet til Streamer: 0.3 W Forbundet til Streamer uden at streamer lyd: 0.3 W Forbundet til Streamer mens der streames lyd: 1.0 W |