

# Tekniset tiedot

## Charger 1.0 miniRITE R

Latauslaite on suunniteltu tekemään jokapäiväisestä lataamisesta helppoa ja kätevää.

### Lataaminen

- Irrota kuulokojeet ja aseta ne latauslaitteeseen - ei avattavaa kantta.
- Kuulokojeet alkavat latautua automaattisesti, kun ne asetetaan latauslaitteeseen, ja käynnistyvät automaattisesti, kun ne poistetaan latauslaitteesta.
- Lataa kuulokojeet joka yö, jotta ne ovat täyteen ladatut seuraavan päivän käyttöä varten.

### Helppo tulkita

Kuulokojeen LED-valon avulla käyttäjän on helppo tulkita latauksen tilaa:

- Oranssi/punainen\* = lataa
- Vihreä = ladattu täyteen

### Lyhyet latausajat

Kun kuulokojeiden akut ovat täysin tyhjä, tyypilliset latausajat ovat:

- 3 h = ladattu täyteen
- 1 h = ladattu 50 %
- 0,5 h = ladattu 25 %

### Tuotetiedot

- Induktiolataus
- Virran ON/OFF-merkkivalo, LED
- Magneettiliitäntä - kuulokojeet pysyvät hyvin latausporteissa
- Kiinteä virtakaapeli
- Kumiset liukuesteet lisäämässä vakautta
- Pyöreä muotoilu - helppo puhdistaa
- Pehmeä säilytyspussi kuljetusta varten



Latauslaite on suunniteltu miniRITE R -kojeiden lataamiseen.

Se perustuu induktioteknologiaan ja lataa kuulokojeet langattomasti kolmessa tunnissa.

Suunniteltu miniRITE R -kojeille

Oticon Real™

Oticon More™

Oticon Zircon

Oticon Opn S™


Oticon Ruby

Oticon Play PX

Oticon Opn Play™



Virtapistoke\*\*

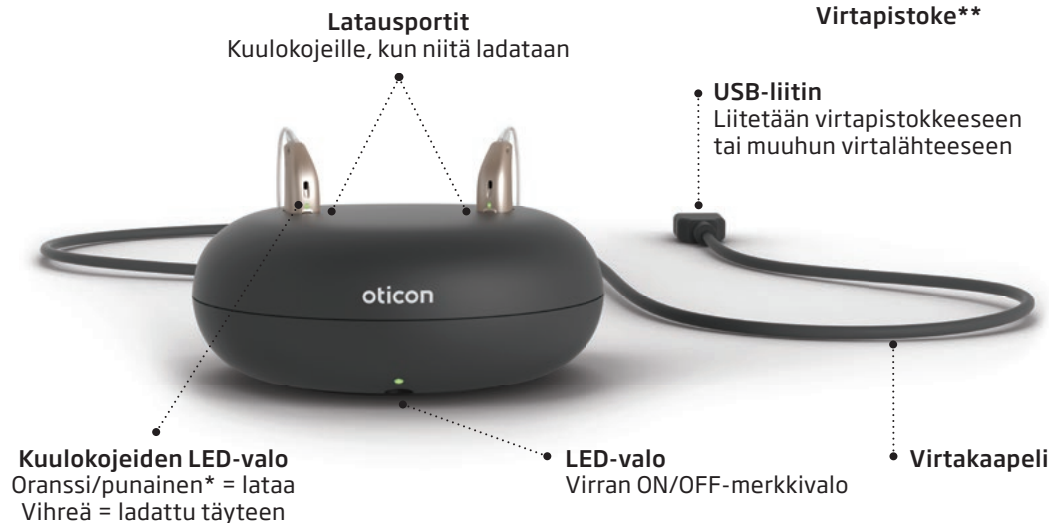


\* Väri on kuulokojeesta riippuen joko oranssi tai punainen.

\*\* Virtapistoke vaihtelee maittain.



<b>Tekniset tiedot: Latauslaite</b>	
Nimi	Charger 1.0 Oticon miniRITE R
Suunniteltu kojeille / yhteensopiva	Oticon Real™, Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Opn S™, Oticon Ruby, Oticon Play PX, Oticon Opn Play™: miniRITE R
Mitat	Ø95 mm / kokonaiskorkeus 39 mm
Paino	135 g
Väri	Musta
Virtalähteen liitäntä	USB A
Tilan merkkivalo	Latauslaitteen LED-valo: osoittaa, onko laite päällä vai pois päältä. Kuulokojeiden LED-valo ladatessa: osoittaa lataustilan.
Kuulokojeiden latausaika	Maksimissaan 3 tuntia riippuen akkujen varaustasosta (Lämpötila: +10...+35 °C) Maksimissaan 4 tuntia riippuen akkujen varaustasosta (Lämpötila: +5...+10 °C ja +35...+40 °C)
Virtalähde	Mukana toimitettava virtapistoke
Tulojännite	5 V DC
Tulovirta	< 0,2 A (kahta kuulokojetta ladattaessa) < 10 mA valmiustilassa (ei kuulokojeita)
Johto	Kiinteä johto, pituus 150 cm
Kytkeä ulkoisiin laitteisiin	Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.
<b>Käyttöolosuhteet</b>	
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +5...+40 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötila: -25 °C - +70 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön
Ilmakehän paine	700-1060 hPa
<b>Tekniset tiedot: Virtapistoke</b>	
Tulojännite	100-240 V AC
Tulotaajuus	50-60 Hz
Lähtöjännite	5 V DC
Lähtövirta	1 A

 SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark/Tanska

**Pääkonttori**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark/Tanska