


Plus Power in
piccole **dimensioni**



Plus Power

Il più piccolo BTE pila 13 in assoluto con un MPO di 138 dB SPL

L'incontro tra estrema potenza e alta fedeltà

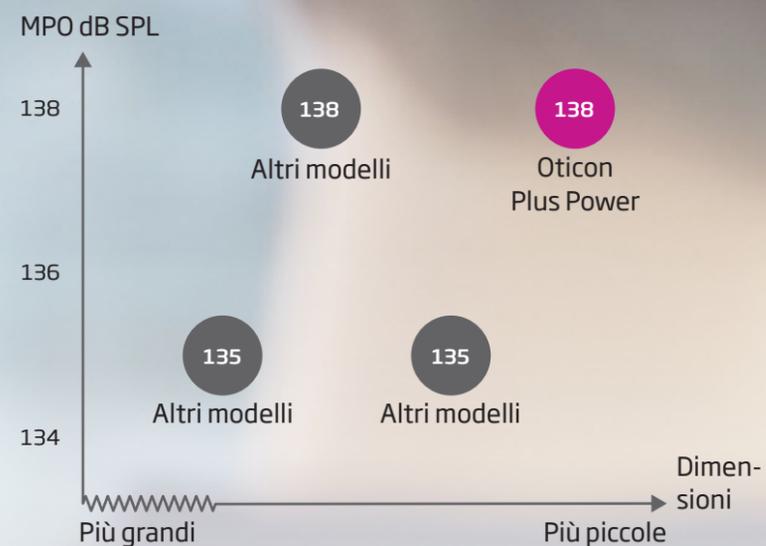

Il BTE13 105 Plus Power è l'apparecchio più piccolo in assoluto con un MPO di 138 dB SPL.

Immagini di poter offrire agli utenti con perdite uditive di entità da severa a profonda un apparecchio che oltre ad essere piccolissimo e discreto dia loro un segnale chiaro, ricco e definito, così che possano provare un'esperienza di ascolto autentica e naturale... Con il nuovo Oticon BTE13 105 Plus Power ora è possibile!

Potenza ad alta fedeltà

L'apparecchio acustico Plus Power è molto potente, benché straordinariamente piccolo, ed è in grado di offrire agli utenti un suono ad alta fedeltà. Grazie all'innovativo amplificatore ed alla capacità di elaborazione del 30% più potente del processore Inium Sense, il BTE13 105 Plus Power eroga un'uscita prossima ai livelli di super potenza.

BrainHearing™

Gli utenti possono inoltre beneficiare della tecnologia BrainHearing, grazie alla quale il Plus Power supporta la funzione del cervello di dare un senso ai suoni, offrendo in tal modo un miglior udito agli utenti e agevolando la loro abilità nel sostenere le conversazioni con parenti e amici.



Se desidera sapere come nasce la tecnologia BrainHearing Oticon visiti il sito www.oticon.com/BrainHearing

Le tecnologie protagoniste a supporto del BrainHearing

Speech Guard E

Combina i benefici dell'amplificazione lineare e della compressione veloce. Gli utenti con perdite uditive da severe a profonde possono quindi contare su un'amplificazione lineare, alla quale sono abituati, e al contempo godere dei benefici di una compressione veloce. Gli utenti ricevono così un messaggio ricco di indizi acustici e le interruzioni causate dai suoni forti improvvisi sono minimizzate.

Soft Speech Booster

Permette all'utente di sentire i suoni deboli presenti in oltre il 75% del parlato normale. Quei suoni deboli che, altrimenti, si perderebbero in un borbottio confuso, specialmente per utenti con perdite uditive severe e profonde.

Ampiezza di banda estesa

Fino a 10kHz. Consente agli utenti con perdite severe e profonde di utilizzare il proprio udito residuo rendendo completa l'immagine acustica ed arricchire ulteriormente la qualità sonora.

Nuovo scudo anti feedback Inium Sense

Permette di erogare uscita sufficiente senza compromettere la qualità sonora.

Plus Power in piccole dimensioni

Straordinariamente piccolo - dotato di tecnologia BrainHearing

Design raffinato e moderno per adattamenti discreti di grande successo

Doppio pulsante ancora più maneggevole

Ricevitore bilanciato a resa elevata con uscita massima di 138 e guadagno massimo di 72 dB SPL

Robusto, con rivestimento nano-coated resistente all'acqua (IP58)



Addio ai compromessi

Per coloro che hanno perdite uditive severe e profonde, il beneficio dell'amplificazione solitamente va a scapito di una qualità sonora inferiore e apparecchi di dimensioni maggiori. Questo è un prezzo troppo alto da pagare.

Ora il nuovo Plus Power si rivela uno strumento di dimensioni straordinariamente piccole e di estrema potenza che soddisfa la perdita uditiva degli utenti, senza compromettere la qualità sonora e la discriminazione vocale.

Una nuova qualità sonora per una vita più piena

La vera potenza sta nella comprovata qualità sonora di Alta2 Oticon generata dalla potente piattaforma Inium Sense. La risposta stabile alle basse frequenze, combinata all'ampiezza di banda estesa, consente agli utenti di utilizzare appieno il loro udito residuo e migliora in modo percettibile la qualità sonora. Gli utenti percepiranno così le sottili sfumature vocali e potranno partecipare alle conversazioni in modo più consapevole.

Cambiare è più facile. Offri all'utente il suono che desidera

Per chi ha una perdita uditiva severa e profonda, passare ad un nuovo modello o marca di apparecchio acustico, può risultare impegnativo. Essi tendono a utilizzare i propri apparecchi il più a lungo possibile, in media 6-10 anni, per evitare di affrontare il cambiamento*.

Con il Plus Power gli utenti possono rinnovare i loro apparecchi e scoprire la nuova tecnologia BrainHearing, determinante per una miglior udibilità, senza temere gli effetti del cambiamento. Lo Speech Guard E offrirà un'amplificazione pressoché lineare, alla quale sono abituati e, grazie a YouMatic, lei e gli utenti potrete effettuare un adattamento personalizzato che corrisponda alle loro esigenze e preferenze.

Gli utenti sanno ciò che vogliono, e ora è possibile offrire loro un suono ad alta fedeltà, così come desiderano sentirlo.



1:1

Il BTE13 105 Plus Power è piccolo e sottile, ma estremamente potente.

*Fonte: Studio sulla soddisfazione con Chilli Oticon, 2011



Connessi con il mondo



Pur indossando i migliori apparecchi acustici disponibili, gli utenti con perdite uditive severe e profonde avranno sempre difficoltà ad affrontare ambienti sonori competitivi. Plus Power implementa una tecnologia wireless affidabile, offrendo agli utenti sia i benefici di un'elaborazione binaurale che i vantaggi della ConnectLine.

Utilizzando la ConnectLine gli apparecchi acustici si trasformano in una coppia di cuffie senza fili in miniatura nelle quali gli utenti riceveranno un segnale indisturbato. Questo renderà molto più facili numerose attività quotidiane come guardare la TV, ascoltare la musica o parlare al telefono. Attività, queste, che giocano un ruolo cruciale ogni volta che gli utenti desiderano sentirsi connessi con il mondo.

Una linea altamente performante



	Speech Guard E Cattura e preserva i sottili dettagli e le naturali caratteristiche della voce	•		
	Gestione Spatial Noise Consente ad entrambe le orecchie di lavorare assieme al cervello in tempo reale per aiutarlo a focalizzarsi su ciò che conta	•		
NUOVO	VAC+ con Soft Speech Booster Migliora la comprensione dei suoni deboli in base alle preferenze individuali	•	•	
	YouMatic Supporta le esigenze e preferenze sonore personali attraverso ambienti sonori mutevoli	Premium	Advanced	Essential
	Free Focus Supporta l'abilità del cervello di focalizzarsi e dare priorità alla voce rispetto al rumore di fondo attraverso vari livelli di direzionalità	Premium	Advanced	Essential
NUOVO	Scudo anti feedback Inium Sense Riduce notevolmente i fischi senza compromettere la qualità sonora o il comfort	•	•	•
NUOVO	Tinnitus SoundSupport™ Trattamento, strumenti e supporto su misura per le esigenze individuali*	•	•	•
		Alta2	Nera2	Ria2

Il BTE13 105 Plus Power arricchisce la completa linea Performance Oticon ed è disponibile in tutte le categorie performance.

*Disponibile nei modelli selezionati



People First

La nostra promessa:
Permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

 [youtube.com/OticonPeopleFirst](https://www.youtube.com/OticonPeopleFirst)

 [facebook.com/OticonProfessionals](https://www.facebook.com/OticonProfessionals)

 [facebook.com/OticonPeopleFirst](https://www.facebook.com/OticonPeopleFirst)

OTICON ITALIA S.r.l.

Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia
Tel.: (+39) 055-3260411 - Fax (+39) 055-3260424

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Pubblicazione riservata esclusivamente ai Sigg. Medici ed Audioprotesisti

www.oticon.com

oticon
PEOPLE FIRST