

Acto
een betere
oplossing
een beter leven



Oticon Acto, de betere oplossing in zijn klasse. Acto, onder andere leverbaar als miniLIHO, is gebouwd op het RISE 2 platform en stelt slechthorenden in staat om op een comfortabele manier **te communiceren en actief aan het leven deel te nemen**. Dat is de filosofie van People First.

Oticon Acto, met **binaurale synchronisatie**, is op het gebied van geluidskwaliteit, interactie en flexibiliteit een **betere oplossing** voor u en uw cliënten.





de betere oplossing
voor
**comfort, helderheid
en verstaan**

Oticon | **Acto**



de betere oplossing
voor
**communicatie
en informatie**



de betere oplossing
om mee te werken



ook leverbaar als
miniLIHO



de betere oplossing in het middensegment

Oticon Acto is voorzien van technologieën en mogelijkheden die tot voor kort alleen in het topsegment werden gebruikt. De geluidskwaliteit, flexibiliteit en het comfort zijn ongekend in deze klasse.



De uitzonderlijke prestaties van Oticon Acto zijn mogelijk door het RISE 2 bewerkingsplatform. RISE 2 werd ontwikkeld voor een superieur geluid en bewerkingsvermogen.

Dankzij de draadloze mogelijkheden van Oticon Acto kan de cliënt met slechts één afstandsbediening schakelen tussen informatie-, communicatie- en geluidsapparatuur.

de betere oplossing voor
comfort, helderheid en verstaan

Oticon Acto biedt de mogelijkheid om comfortabel en tot in de kleinste details van het leven te genieten. Uw cliënten zullen vergeten dat ze Acto dragen.

Met dit toestel streeft Oticon naar een volledige oplossing voor mensen met een licht tot ernstig gehoorverlies.

Oticon Acto bevat geluidstechnologieën die ook in het topsegment worden gebruikt: Multi-band Adaptive Directionality, TriState Noise Management en DecisionMaker2. Daarnaast dragen het grotere beweringsvermogen en de 8 KHz bandbreedte van het RISE 2 platform bij tot een voller en evenwichtiger geluidsbeeld.

Het open LIHO (Luidspreker-In-Het-Oor)-ontwerp zorgt voor een aangenamer frequentierespons en een comfortabeler mix van natuurlijk en versterkt geluid.



Binaurale synchronisatie

herstelt de stabiliteit en het evenwicht van het gehoor in zelfs de meest dynamische omgevingen. Door gericht te kunnen luisteren voelt de cliënt zich meer ontspannen. Omdat de richtinggevoeligheid en lawaaireductie in beide oren op elkaar worden afgestemd, ontstaat een evenwichtig geluid. De binaurale feedbackverwijdering zorgt voor een verdere verbetering van het comfort.



de betere oplossing voor **communicatie en informatie**

Met ConnectLine kunnen mensen met een gehoorverlies volledig gebruik maken van communicatie- en informatie-apparatuur en andere geluidsbronnen.

Oticon Acto en ConnectLine zijn een ideale combinatie voor mensen die optimaal willen genieten van informatie-, communicatie- en amusements-apparatuur zonder ingewikkeld gedoe. Door één toets op Streamer in te drukken hebben ze de volledige controle over de vaste en mobiele telefoon, muziek en televisie.

ConnectLine zendt het geluid van de tv, telefoon of mp3-speler rechtstreeks naar de hoortoestellen. Door het gebruiksgemak en de aanzienlijke verbetering van het verstaan, zorgt ConnectLine ervoor dat uw cliënt optimaal contact kan houden met vrienden en familie.


TV

Door een toets op Streamer in te drukken wordt het geluid van de tv rechtstreeks naar de Acto toestellen gezonden.



Vaste telefoon

Direct handsfree contact met de vaste telefoon. Door een toets op Streamer in te drukken kunnen telefoongesprekken zelfs op afstand worden beantwoord.

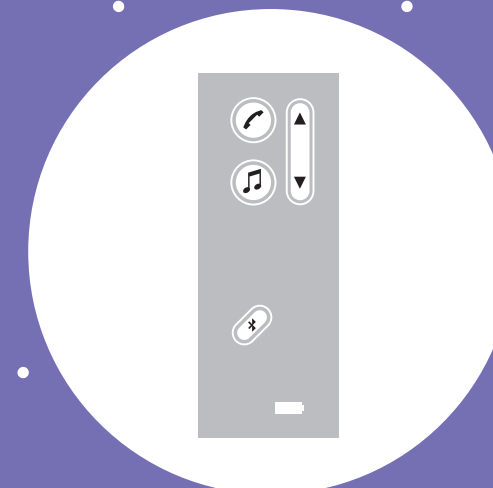

Audio

Het hoortoestel verandert in een draadloze mini headset voor een mp3-speler, PC, enz. (eenvoudig verbonden via Bluetooth of snoer).


Mobiele telefoon

Het hoortoestel verandert in een handsfree oplossing met uitstekende hoorbaarheid voor mobiele telefoons.

ConnectLine

stelt hoortoestelgebruikers in staat om te genieten van alles wat de moderne media- en communicatietechnologie te bieden heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld naar de tv of muziek luisteren op een aangenaam volume.

Als de telefoon gaat waarschuwt ConnectLine en kan de hoortoestelgebruiker het gesprek aannemen door een toets op Streamer in te drukken. Na beëindiging van het gesprek keert het geluid van de tv weer terug.

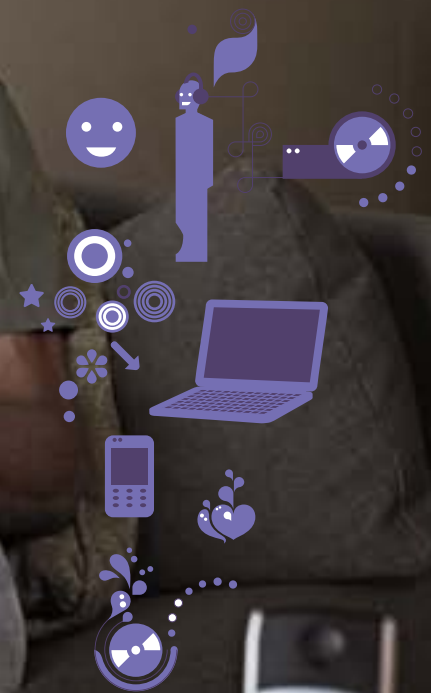

de betere oplossing om mee te werken


Met Oticon Acto biedt u uw cliënten een product uit het middensegment met veel van de voordelen van toestellen uit het topsegment.

Omdat Oticon Acto leverbaar is in een groot aantal uitvoeringen, is er altijd een toestel dat past bij de voorkeur en de individuele luisterbehoeften van uw cliënt.

miniLIHO is uiterst klein en past comfortabel achter het oor. Ondanks de kleine afmetingen bevat de organisch vormgegeven miniLIHO de meest geavanceerde draadloze mogelijkheden. Door het flexibele LIHO luidsprekersysteem in drie verschillende sterktes is Acto geschikt voor gehoorverliezen tot 110 dB HL.

Oticon bedacht voor u een op de cliënt gerichte flexibele oplossing. Met de in-situ audiometrie kunt u tijdens de aanpassing bijvoorbeeld de verbetering van de gehoordrempel beoordelen. Met de instelregelaars in Genie kunt u de Oticon Acto uiterst nauwkeurig op de individuele luisterbehoeften van uw cliënt aanpassen.

Voor optimale tevredenheid van de cliënt ondersteunt Oticon u met de unieke eCAPS counselling software. eCaps is één van de aspecten van onze ondersteuning aan audiciens en is een onderdeel van onze People First filosofie.

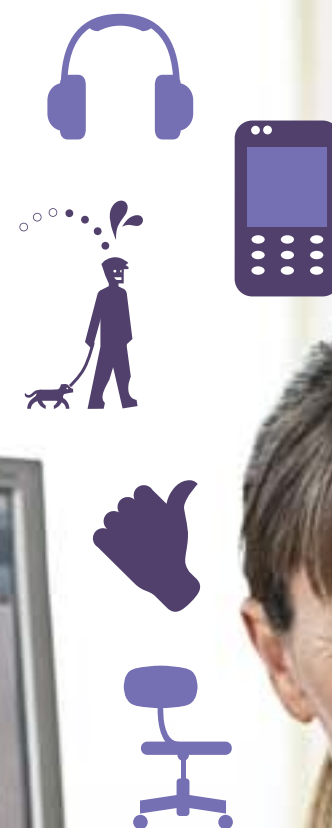

de betere oplossing in zijn klasse



de betere oplossing voor comfort, helderheid en verstaan

- RISE 2 geluidsbewerkingsplatform
- Geavanceerde binaurale automatische regelaars
- 8 kHz bandbreedte
- TriState Noise Management
- Multiband Adaptive Directionality
- Uitvoeringen voor elke individuele voorkeur



de betere oplossing



de betere oplossing voor communicatie en amusement

- Streamer voor toegang tot alle communicatiemiddelen; tv, vaste en mobiele telefoon, enz.
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ontwikkeld in samenwerking met hoortoestelgebruikers
- Klein en comfortabel



de betere oplossing om mee te werken

- Groot aantal uitvoeringen, inclusief de stijlvolle miniLIHO
- Flexibel LIHO luidsprekersysteem in 3 sterktes
- In-situ audiometrie
- Draadloos aan te passen



Voor nog meer flexibiliteit zijn de miniLIHO en LIHO leverbaar in drie sterktes. Wanneer meer vermogen nodig is kan de luidspreker worden vervangen.

Het meest
geavanceerde
bewerkings-
platform RISE 2



Voldoet aan alle
individuele luisterbehoeften

miniLIHO/LIHO




miniLIHO

LIHO

STANDARD / MEDIUM

POWER

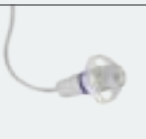

Open tip



Power tip




Plus tip




Power MicroMould



MicroMould

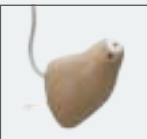

Power Mould

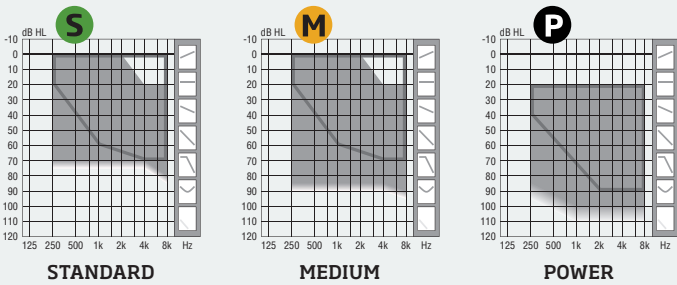

STANDARD

MEDIUM

POWER

Custom Mould - Power tip

Open tip - Plus tip

IHO



(Half)concha*



Kanaal Power (Omni of Dir)**



Kanaal*




CIC/MiniKanaal Power**



CIC/MiniKanaal**

* Ook leverbaar zonder draadloze
communicatie
** Zonder draadloze communicatie

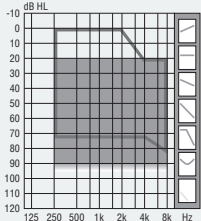

Kanaal Power CIC/MiniKanaal


AHO 13



Toonbocht



Corda² dunne slang

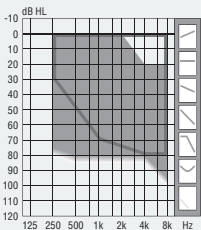


Oorstukje Corda²

AHO POWER



Toonbocht

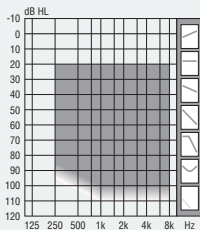

Belangrijkste eigenschappen

Binaurale synchronisatie	•	•
Binaurale coördinatie	•	•
Binaurale Dynamic Feedback Cancellation 2 (DFC2)	•	•
DecisionMaker2™	•	•
Multiband Adaptive Directionality	•	•
Tri-state Noise Management	•	•

Acto Pro

Acto



Aanpasopties (Genie 2010.2)

nEARcom draadloos programmeerbaar	•	•
In-situ audiometrie	•	•
NAL-NL1 & DSL v5.0a m[i/o]	•	•
Identiteiten	3	3
Aanpasbanden	8	6
Geheugen	•	•

Meer

Bandbreedte	8 khz	8 khz
3 LIHO luidsprekers (S, M en P)	•	•
RISE 2 platform	•	•


Interactie

ConnectLine	•	•
DAI en FM	•	•



44

Silver

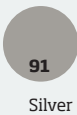


91

Silver
Grey



92

Steel
Grey

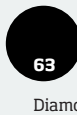

63

Diamond
Black



93

Chestnut
Brown



94

Terracotta



90

Chroma
Beige

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively