


Power
én mooi



Plus Power

's werelds kleinste AH013 ter wereld met een MPO van 138 dB SPL

Geweldige power én hoge natuurgetrouwheid

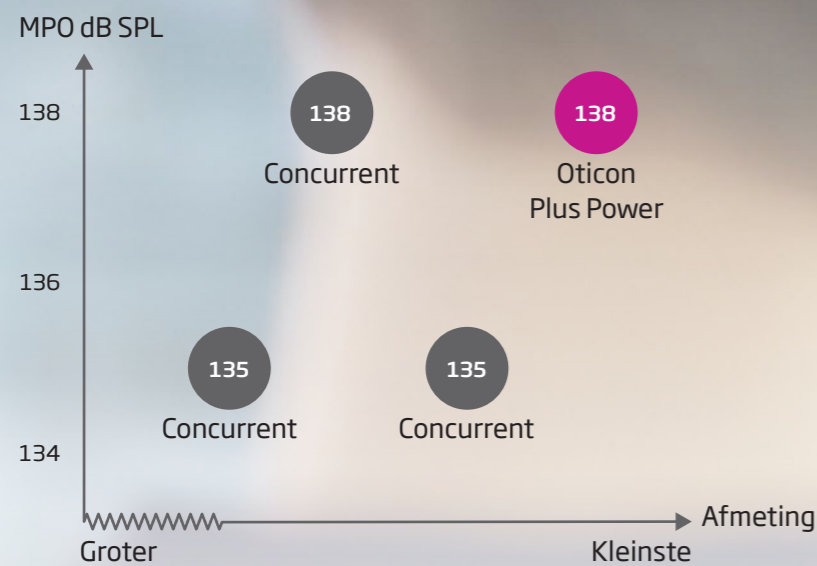

AHO 105 Plus Power is het kleinste toestel ter wereld met een MPO van 138 dB SPL.

Stel dat u uw ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten een klein, discreet toestel kunt bieden en hen tegelijkertijd een puur en duidelijk signaal met rijke details kunt geven voor een authentieke en natuurlijke luisterervaring? Dat is nu mogelijk met de nieuwe Oticon AHO 105 Plus Power!

Power met hoge natuurgetrouwheid

Plus Power is een opvallend klein, maar zeer krachtig toestel dat uw cliënten hoogwaardige geluidskwaliteit biedt. Met een nieuwe innovatieve luidspreker en 30% meer verwerkingsvermogen van de Inium Sense processor, kan de AHO 105 Plus Power een output leveren die super power outputniveaus benadert.

BrainHearing™ met Power

Bovendien kunnen uw cliënten profiteren van BrainHearing™-technologie. Door de manier waarop de hersenen geluid begrijpen te ondersteunen, levert Plus Power uw cliënten een beter gehoor en ondersteuning bij het deelnemen aan gesprekken met familie en vrienden.



Voor het volledige verhaal over Oticon BrainHearing-technologie gaat u naar www.oticon.nl/BrainHearing.

De beste technologieën die BrainHearing ondersteunen

Speech Guard E combineert de bijna lineaire versterking van spraakklanken met snelle compressie. Uw ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten kunnen zodoende vertrouwen op de lineaire versterking waaraan ze gewend zijn en tevens profiteren van de voordelen van snelle compressie. Hierdoor blijven de belangrijke spraaksignalen behouden en worden de onderbrekingen door plotselinge geluiden geminimaliseerd.

Soft Speech Booster

Stelt uw cliënt in staat om de zachte geluiden, waaruit meer dan 75% van de normale spraak bestaat, te horen. Geluiden die anders in onduidelijk gemompel over zouden gaan, met name voor ernstig tot zeer ernstig slechthorende gebruikers.

Uitgebreide bandbreedte

Tot wel 10 kHz stelt ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten in staat om met hun restgehoor het geluidsbild compleet te maken, wat ook bijdraagt aan een rijke geluidskwaliteit.

Nieuw Inium Sense feedback shield

Zorgt ervoor dat u voldoende output kunt leveren zonder in te leveren aan hoogwaardige geluidskwaliteit.

Power én mooi

Opvallend klein - boordevol met BrainHearing™-technologie

Modern, stijlvol ontwerp voor discrete pasvorm en grote tevredenheid

Dubbele druktoets voor gebruiksgemak

Uitgebalanceerde luidspreker met hoge output voor 138 MPO/73 FOG

Robuust, met nano-coating en waterbestendig (IP58), bestand tegen dagelijkse omstandigheden



1:1

AHO 105 Plus Power is klein en fijn, maar zeer krachtig.

Zeg maar dag tegen compromissen

Voor ernstig tot zeer ernstig slechthorenden gaat geluidsversterking doorgaans gepaard met lagere geluidskwaliteit en grotere toestellen. Dit is een zware tegenval.

Met de nieuwe Plus Power kunt u uw cliënten een klein en discreet en toch zeer krachtig toestel bieden dat het best bij hun gehoorverlies past - zonder afbreuk te doen aan geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid.

Een nieuwe geluidskwaliteit om aan het leven deel te nemen

Het krachtige Inium Sense platform levert de echte Power van de vertrouwde geluidskwaliteit van de Oticon Alta2. Door de stabiele respons in de lage frequenties te combineren met de brede bandbreedte, kunnen uw cliënten gebruikmaken van hun volledige restgehoor voor een sterk verbeterde geluidskwaliteit. Uw cliënten kunnen de fijnere nuances van taal horen en deelnemen aan gesprekken zonder dat ze iedere keer moeten raden wat er wordt gezegd.

Maak de overstap makkelijker. Lever geluid waar uw cliënt de voorkeur aan geeft

Overstappen op een nieuw hoortoestel, misschien zelfs wel een nieuwe leverancier, kan een hele uitdaging zijn voor cliënten met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Dezelfde toestellen worden gemiddeld zo'n 6 à 10 jaar lang gebruikt om de verandering te vermijden*.

Met Plus Power kunnen uw cliënten zonder vrees de overstap naar een nieuw toestel maken en zo profiteren van de nieuwe BrainHearing™-technologie voor betere hoorbaarheid. Speech Guard E zorgt voor de bijna lineaire versterking waar zij behoefte aan hebben en met YouMatic kan het toestel worden ingesteld op de individuele luistervoorkeuren en -behoefte van uw cliënt.

Zij weten wat zij willen en u kunt hen nu het natuurgetrouwe geluid geven dat zij willen horen.

*Bron: Oticon Chili tevredenheidsonderzoek 2011



In verbinding met de wereld



Zelfs met het best mogelijke toestel zullen omgevingen met veel omgevingsgeluiden nog steeds een uitdaging vormen voor uw ernstig tot zeer ernstig slechthorende cliënten. Plus Power bouwt voort op krachtige draadloze technologie waarmee uw cliënt kan profiteren van binaurale verwerking en de voordelen van ConnectLine.

ConnectLine verandert de hoortoestellen in een draadloze headset zodat uw cliënt een ongestoord signaal in de hoortoestellen ontvangt. Dit maakt een groot aantal alledaagse activiteiten zoals televisiekijken, naar muziek luisteren of telefoneren een stuk eenvoudiger. Deze activiteiten spelen een cruciale rol als uw cliënten zich met de wereld verbonden willen voelen.

Een familie die hoogwaardige prestaties levert



	Alta2	Nera2	Ria2
Speech Guard E Registreert en behoudt de fijne structuren en natuurlijke kenmerken van spraak	•		
Spatial Noise Management Laat beide oren in real-time met de hersenen samenwerken om te helpen bij het focussen op datgene wat belangrijk is	•		
NIEUW VAC+ met Soft Speech Booster Verbeterd verstaanbaarheid van zachte spraak op basis van individuele voorkeuren	•	•	
YouMatic Ondersteunt de unieke luisterbehoeften en persoonlijke geluidsvorkeuren in veranderende luisteromgevingen	Premium	Advanced	Essential
Free Focus Ondersteunt de hersenen bij het focussen en geeft d.m.v verschillende niveaus van richtinggevoeligheid voorrang aan spraakinformatie boven achtergrondgeluid	Premium	Advanced	Essential
NIEUW Inium Sense feedback shield Vermindert fluiten beduidend, zonder afbreuk te doen aan geluidskwaliteit of comfort	•	•	•
NIEUW Tinnitus SoundSupport™ Behandeling, hulpmiddelen en ondersteuning die specifiek op individuele behoeften zijn afgestemd*	•	•	•


AHO 105 Plus Power maakt deel uit van de krachtige Oticon Performance Line en is beschikbaar in alle performance categorieën.

*Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen



People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively

 [youtube.com/OticonPeopleFirst](https://www.youtube.com/OticonPeopleFirst)

 [facebook.com/OticonProfessionals](https://www.facebook.com/OticonProfessionals)

 [facebook.com/OticonNL](https://www.facebook.com/OticonNL)