

PRODUCTINFORMATIE
OTICON CONNECTLINE PHONE 2.0

Oticon | ConnectLine

Oticon ConnectLine Phone maakt een Bluetooth-verbinding tussen de conventionele vaste telefoon en Oticon Streamer, waardoor de twee hoortoestellen in een draadloze headset veranderen.

Als onderdeel van het ConnectLine systeem werkt ConnectLine Phone tegelijkertijd met andere oplossingen, zoals mobiele telefoons, ConnectLine TV en ConnectLine Mic.

Een volledig geïntegreerd systeem

Met ConnectLine heeft uw cliënt controle over het systeem en niet andersom. Geavanceerde eigenschappen als AutoPriority en AutoConnect zorgen ervoor dat de cliënt, bijvoorbeeld tijdens het televisiekijken, de telefoon kan horen en beantwoorden.

Vaste telefoon

ConnectLine Phone 2.0 wordt parallel aan de bestaande vaste telefooninstallatie geïnstalleerd.

Wanneer uw cliënt binnen het bereik van ConnectLine Phone komt, maakt Streamer automatisch de verbinding en is het systeem klaar om telefoongesprekken door te geven (AutoConnect).

Het gesprek kan makkelijk beantwoord worden met een enkele druk op de knop van Streamer, tot op een afstand van 30 meter van ConnectLine Phone.

AutoPriority

Als de cliënt via ConnectLine TV naar de televisie (of een andere geluidsbron) luistert, zorgt AutoPriority dat een inkomend telefoongesprek niet gemist wordt.

AutoResume


Na beëindiging van het telefoongesprek keert Streamer automatisch terug naar de eerdere gebruiksstand, bijvoorbeeld het geluid van de televisie.

Ga voor meer informatie naar:
www.oticon.nl/phone



Meegeleverde accessoires

- RJ11 - RJ11 kabel voor aansluiting op vaste telefoonlijn
- Stroomadaptor
- Gebruiksaanwijzing

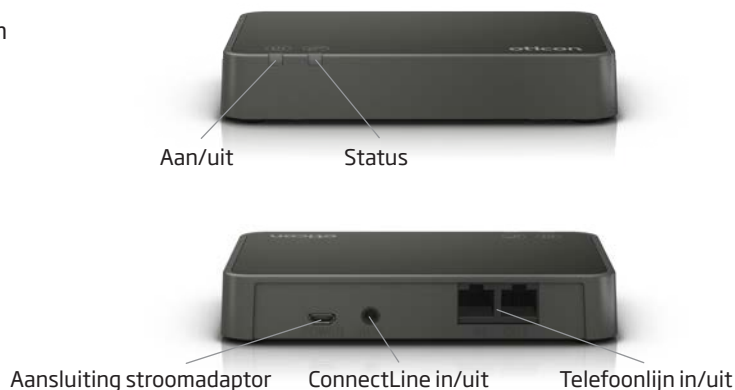

Technische gegevens	
Compatibiliteit	Streamer 1.4 en nieuwer
Afmetingen	124 x 80 x 21 mm; gewicht 100 g.
Eigenschappen ConnectLine systeem	AutoConnect: maakt binnen het bereik automatisch verbinding met Streamer. AutoPriority: geeft prioriteit aan inkomende telefoongesprekken boven bijv. televisie. Automatische koppeling: als Streamer in de koppelingsstand staat maakt ConnectLine Phone een automatische koppeling met Streamer.
Bereik	Tot 30 meter met Streamer Pro (vrij zicht)
Aansluitingen	Telefoonlijn in/uit voor aansluiting met (analoge) vaste telefoonlijn (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine in/uit voor rechtstreekse aansluiting met bijv. computer ¹
Stroomverbruik	Max. 190 mA (met gebruik van de meegeleverde stroomadaptor)
Headset in	Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Headset uit	-15 – -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Audio bandbreedte	Licensievrij 2,4 GHz (ISM band)
AutoConnect (bereik)	Ja (30 meter)
Audiokwaliteit	Mono / 8 kHz sample frq
Frequentie	80 Hz - 3.5 kHz (draadloos)
Gebruikstemperatuur	10 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 70 °C
Emissies	Max. 39 dBμV/m @ 3 meter overeenkomstig alle relevante normeringen

Verwijzingen:

1. Een computerverbindingskabel wordt meegeleverd bij Streamer Pro. Deze kabel is ook apart leverbaar.