

OTICON INO



GENIETEN
**VAN BELANGRIJKE
DINGEN**



Oticon Ino brengt basis hoorzorg op een nieuw niveau. Met Ino profiteren uw cliënten van een aantal van de nieuwste geavanceerde eigenschappen in hoortoesteltechnologie: snelle en nauwkeurige geluidsverwerking, eenvoudige verbindingsmogelijkheden met de (vaste en mobiele) telefoon en andere informatie- en amusementsapparatuur en feedbackonderdrukking in een discreet toestel. Ino en Ino Pro vernieuwen de basis hoorzorg, zodat uw cliënten natuurlijker en spontaner kunnen reageren en voldoende zelfvertrouwen hebben om actief deel te nemen aan het dagelijks leven.

GENIETEN **VAN BELANGRIJKE DINGEN**


BELANGRIJKE DETAILS VOOR EEN BETER CONTACT

Oticon Ino brengt uw cliënten dichter bij hun vrienden en familie en zorgt dat ze contact kunnen houden met de omringende wereld. Dankzij de uitstekende geluidskwaliteit van het nieuwste RISE 2 platform kunnen uw

cliënten ten volle genieten van de details van de geluiden. Het kunnen horen van details is belangrijk om ontspannen te kunnen communiceren. Luisteren wordt minder inspannend.

Oticon Ino maakt gebruik van **RISE 2** met:

- Dubbele verwerkingsnelheid in vergelijking met RISE
- Uitstekende geluidskwaliteit
- Gedetailleerd geluidsbeeld
- 8 kHz bandbreedte
- Dynamic Feedback Cancellation

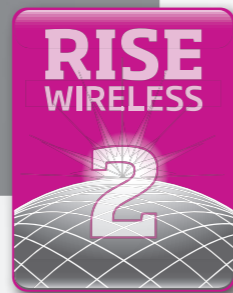



Oticon Ino is ook leverbaar als **miniLIHO**

- Uiterst klein en licht
- Druktoets voor eenvoudige bediening
- Past aangenaam en discreet achter het oor
- Geavanceerde draadloze verbindingsopties
- Geschikt voor gehoorverliezen tot 110dB HL
- Nanocoating voor optimale bescherming

ZELFVERTROUWEN NU EN STRAKS

Oticon Ino is een goede investering voor nu en straks. Het is leverbaar in een aantal kleine en lichte uitvoeringen, zodat uw cliënt het toestel kan kiezen dat het beste bij de specifieke luisterbehoeften past en waarmee hij of zij zich prettig en zelfverzekerd voelt.


Oticon Ino is uiterst efficiënt aan te passen en zeer geschikt voor een groot aantal van uw cliënten. Dankzij de in-situ audiometrie kunt u een drempel meten met de eigen oorstukjes en toestellen. Ino heeft luidsprekers van verschillende sterktes, zodat de luidspreker kan worden vervangen als het gehoor of de luisterbehoeften van de cliënt veranderen.

Oticon Ino is efficiënt aan te passen en eenvoudig om aan te wennen:

- Groot aantal uitvoeringen waaronder de miniLIHO
- Kan bij een groot aantal gehoorverliezen worden aangepast
- Flexibele in-situ audiometrie
- Draadloos programmeerbaar (optie)
- Flexibel LIHO luidsprekersysteem in 3 sterktes

BELANGRIJKE TOEGANG TOT COMMUNICATIE- EN AMUSEMENTSAPPARATUUR

Oticon ConnectLine is een compleet systeem voor elke luistersituatie. Door een toets op Streamer in te drukken verloopt de communicatie natuurlijker en kan uw cliënt actief deelnemen aan alle aspecten van het dagelijks leven.

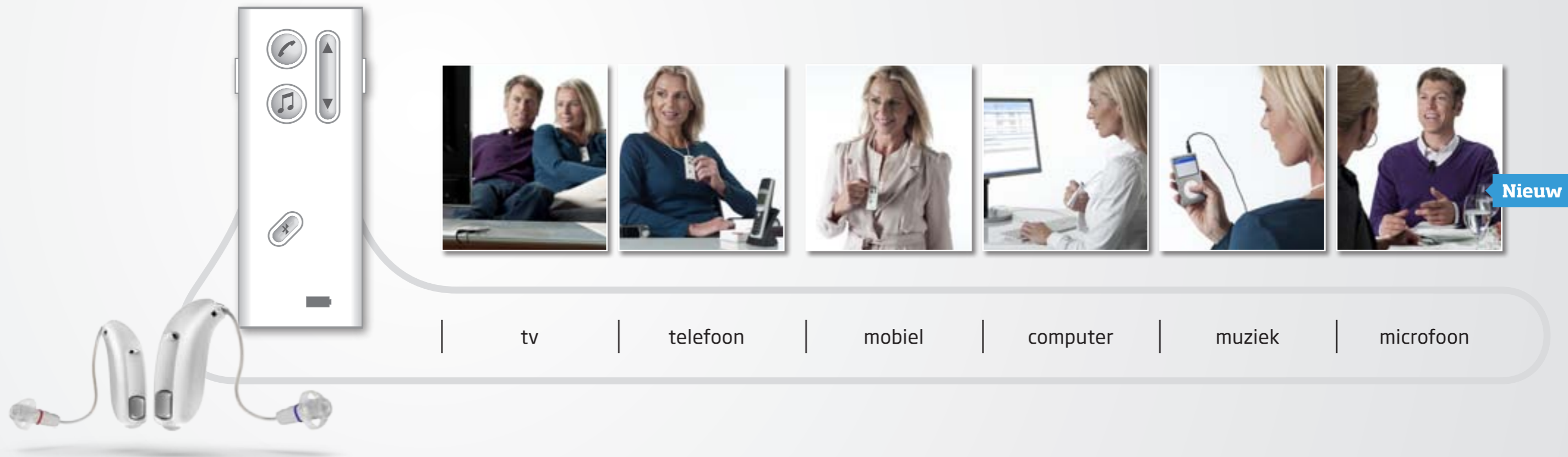

ConnectLine TV

Met ConnectLine TV kan uw cliënt de televisieprogramma's beter volgen dan met hoortoestellen alleen. ConnectLine zorgt via Streamer voor een uitstekende geluidskwaliteit en een eenvoudige, persoonlijke volumeregeling. Familieleden kunnen het geluid van de televisie op het door hen gewenste volume instellen.

ConnectLine Phone

Ontspannen telefoneren is mogelijk dankzij de ConnectLine Phone. Omdat de ConnectLine Phone draadloos met Streamer is verbonden kan uw cliënt op afstand de telefoon aannemen door een toets op Streamer in te drukken. De ingebouwde microfoon van Streamer verandert de hoortoestellen in een draadloze handsfree mini headset.

Mobiel

Streamer kan rechtstreeks met een mobiele telefoon met Bluetooth™ worden verbonden. Door de ingebouwde microfoon van Streamer kan uw cliënt handsfree telefoneren zonder de mobiele telefoon zelfs maar aan te hoeven raken.

Computer

Steeds meer mensen gebruiken hun PC voor internettelefoneren (Skype, FaceTime, Messenger, enz), video-vergaderen, het kijken naar films, enz. Streamer kan via Bluetooth of het meegeleverde snoer met de PC worden verbonden.

Muziek

Door een verbinding via Bluetooth of het meegeleverde snoer met de radio, mp3-speler of andere geluidsapparatuur verandert Streamer de toestellen in een mini hoofdtelefoon.

ConnectLine Mic

De ConnectLine Mic is een discrete microfoon die draadloos met Streamer is verbonden en waarmee uw cliënten eenvoudig een één-op-één gesprek kunnen voeren in moeilijke luistersituaties.

OVERZICHT

miniLIHO/LIHO



miniLIHO

LIHO

STANDARD / MEDIUM



Open tip



Plus tip



Micro-/MediumMould


POWER




Power tip



Power MicroMould

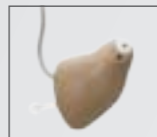

Power Mould

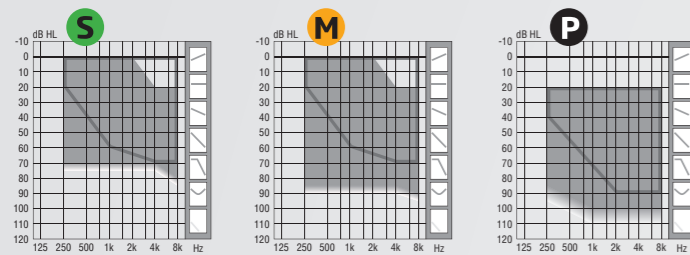

STANDARD

MEDIUM

POWER

■ Mould - Power tip

□ Open tip - Plus tip

IHO



(Half)concha*



Kanaal Power (Omni of Dir)**



Kanaal*




CIC/MiniKanaal Power**



CIC/MiniKanaal**

* Ook leverbaar zonder draadloze communicatie
** Zonder draadloze communicatie

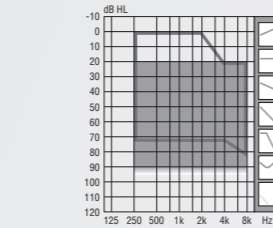

■ Kanaal Power □ CIC/MiniKanaal


AHO



Corda² dunne slang



Toonbocht

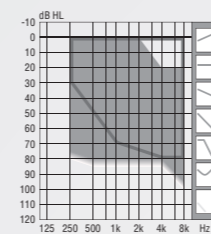


■ Oorstukje □ Corda2

AHO POWER



Toonbocht

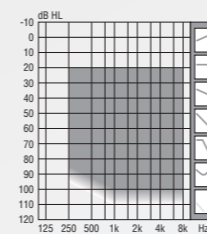

Belangrijkste eigenschappen

	Ino Pro	Ino
Binaurale coördinatie	•	•
Dynamic Feedback Cancellation (DFC2)	•	•
Ai Essential	•	•
Adaptieve directionaliteit	•	•
Automatische directionaliteit (Rondom en Split Focus)	•	•
Lawaaimanagement	•	•



Aanpasopties (Genie 2011.1)


	Ino Pro	Ino
nEARcom draadloos programmeerbaar	•	•
In-situ audiometrie	•	•
NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0a m[i/o]	•	•
Identiteiten	1	1
Aanpasbanden	6	4
Adaptatiemanager	Auto	Handmatig

Meer

	Ino Pro	Ino
Bandbreedte	8 khz	8 khz
3 LIHO luidsprekers (S, M en P)	•	•
RISE 2 platform	•	•

Interactie

	Ino Pro	Ino
ConnectLine	•	•
DAI enFM	•	•

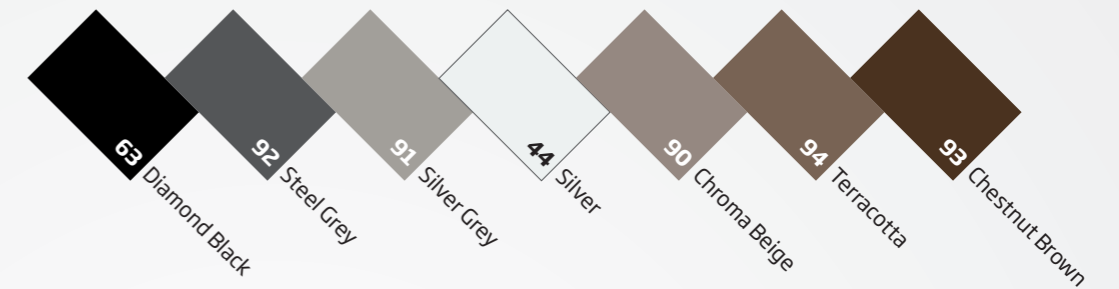

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively