

Technische gegevens

miniRITE R

60 85 100 105

	Oticon Opn S 1	Oticon Opn S 2	Oticon Opn S 3
Sprakverstaan	OpenSound Navigator™	Niveau 1	Niveau 2
	- Vermogenbalancerings-effect	100%	50%
	- max. ruisonderdrukking	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	Speech Guard™ LX	Niveau 1	Niveau 2
	Spatial Sound™ LX	4 schatters	2 schatters
	Soft Speech Booster LX	•	•
Geluidskwaliteit	Speech Rescue™ LX	•	•
	Duidelijke dynamiek	•	-
	Spatial Noise Management	•	-
	Bandbreedte*	10 KHz	8 KHz
	Verwerkingskanalen	64	48
Luistercomfort	Bass boost (streamen)	•	•
	Transient Noise Management	4 configuraties	Aan/Uit
	Feedback shield LX	•	•
Personalisering en optimale aanpassing	Windruismanagement	•	•
	YouMatic™ LX	3 configuraties	2 configuraties
	Aanpasbanden	16	14
	Meerdere richtinggevoelheidsopties	•	•
	Adaptatiemanagement	•	•
Verbinden met de wereld	Oticon firmware updater	•	•
	Aanpasmethoden	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
	Stereo streamen (2,4 GHz)	•	•
	Oticon ON-app	•	•
	ConnectClip	•	•
	Afstandsbediening 3.0	•	•
	TV Adapter 3.0	•	•
	Telefoonadapter 2.0	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•

*) Bandbreedte beschikbaar voor versterking tijdens de aanpassing

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5°C tot +40 °C
 Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%,
 niet-condenserend

Opslag- en transportomstandigheden

De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag.

Transport:

Temperatuur: -20°C tot +60°C
 Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%,
 niet-condenserend

Opslag:

Temperatuur: -20°C tot +30°C
 Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%,
 niet-condenserend



Oticon Opn S™ miniRITE R is een discrete uitvoering gevoed door een oplaadbare lithium-ion batterij. De inductieoplader zorgt voor betrouwbaar, snel opladen in 3 uur voor een volle lading.

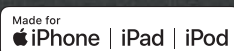
De miniRITE R beschikt over een luisterspoel en een handige dubbele druktoets.

OpenSound Navigator™ helpt gebruikers bij het selecteren en verstaan van spraak in alle soorten omgevingen door het in balans brengen van de geluidsbronnen en het dempen van lawaai.

OpenSound Optimizer™ verbetert de luisterervaring en het comfort van gebruikers door het blokkeren van feedback en het versterken van de gewenste geluidsbronnen.

TwinLink™ draadloze technologie combineert binaurale communicatie en 2,4 GHz connectiviteit met stereo streamen rechtstreeks vanaf digitale apparaten.

Oticon Opn S is gebouwd op het krachtige Velox S™ platform dat een programmeerbare firmwarearchitectuur heeft en toekomstige aanpassingen ondersteunt.



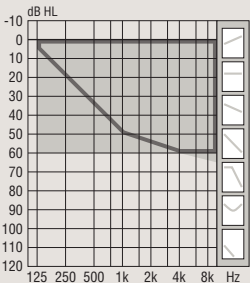
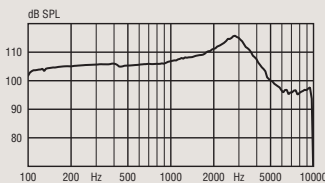
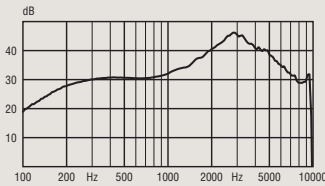
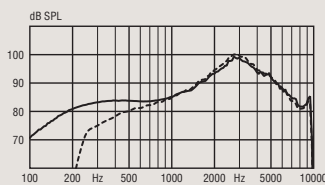
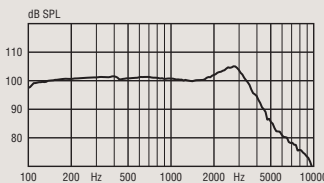
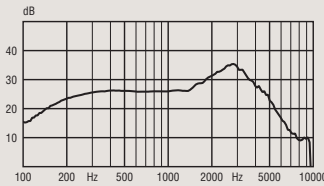
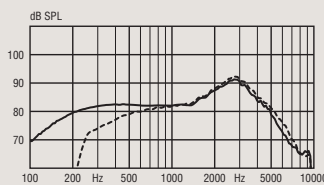
IP68

Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/connectivity

oticon
PEOPLE FIRST

Oticon Opn S 1

miniRITE R 60

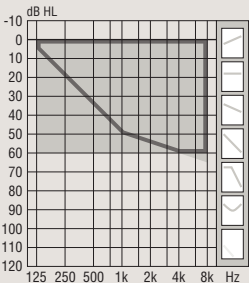
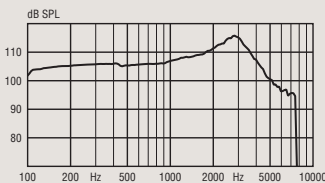
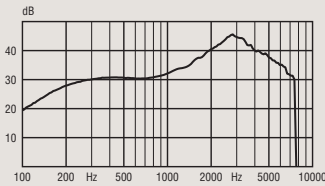
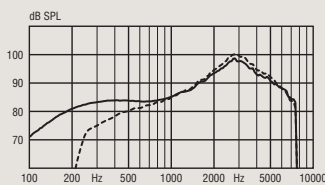
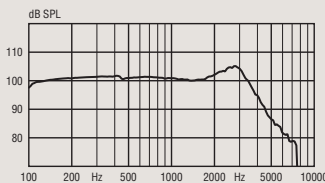
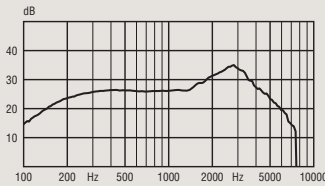
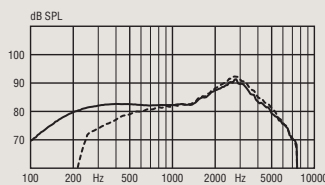
Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 Oorstukje, bass en power dome Open dome Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.		OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik  Akoestische input: 60 dB SPL Magnetische input: 31,6 mA/m	OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 
OSPL90	Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	116 dB SPL 109 dB SPL 110 dB SPL	105 dB SPL 100 dB SPL 102 dB SPL
Full-on gain*	Piek 1600 Hz HFA-FOG	46 dB 37 dB 38 dB	35 dB 29 dB 30 dB
Reference test gain		30 dB	26 dB
Frequentiebereik		110-9700 Hz	100-9200 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	67 dB SPL	-
	10 mA/m veld	87 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	85/85 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	21 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	28 dB SPL	27 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 2 en 3

miniRITE R 60

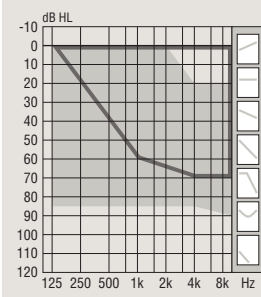
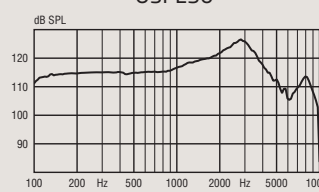
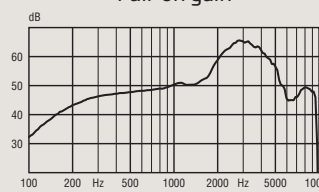
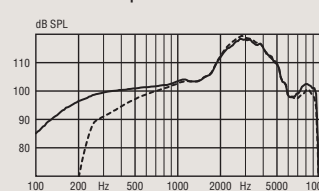
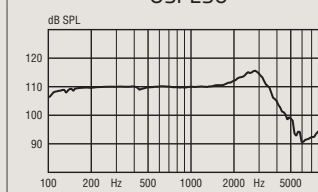
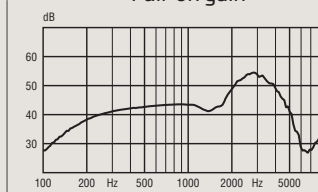
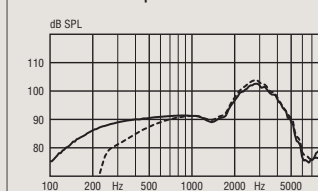
Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 Oorstukje, bass en power dome Open dome Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.		OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik  Akoestische input: 60 dB SPL Magnetische input: 31,6 mA/m	OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 
OSPL90	Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	116 dB SPL 109 dB SPL 110 dB SPL	105 dB SPL 100 dB SPL 102 dB SPL
Full-on gain*	Piek 1600 Hz HFA-FOG	46 dB 37 dB 38 dB	35 dB 29 dB 30 dB
Reference test gain		30 dB	26 dB
Frequentiebereik		110-7500 Hz	100-7500 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	67 dB SPL	-
	10 mA/m veld	87 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	85/85 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	22 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	30 dB SPL	28 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 85

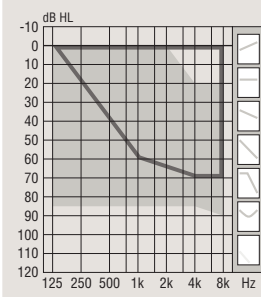
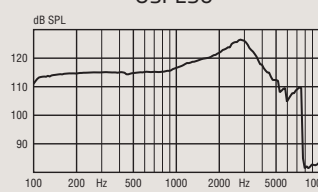
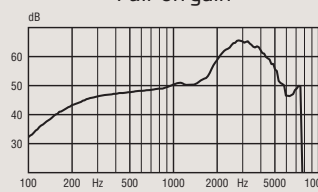
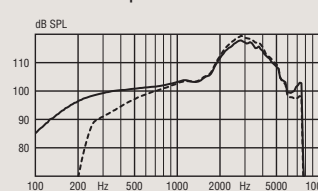
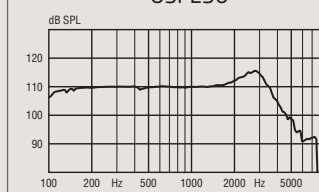
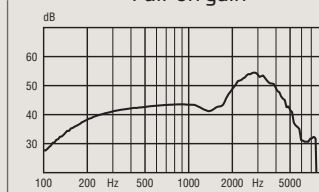
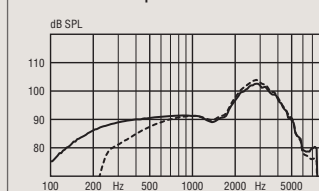
Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 85  Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.		 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik — Akoestische input: 60 dB SPL - - - Magnetische input: 31,6 mA/m	 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik — Akoestische input: 60 dB SPL - - - Magnetische input: 31,6 mA/m
OSPL90	Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	127 dB SPL 120 dB SPL 121 dB SPL	116 dB SPL 111 dB SPL 112 dB SPL
Full-on gain*	Piek 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 52 dB 55 dB	54 dB 43 dB 47 dB
Reference test gain		45 dB	34 dB
Frequentiebereik		120-9500 Hz	100-8500 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	82 dB SPL	-
	10 mA/m veld	102 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	94/94 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	25 dB SPL	20 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	29 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 2 en 3

miniRITE R 85

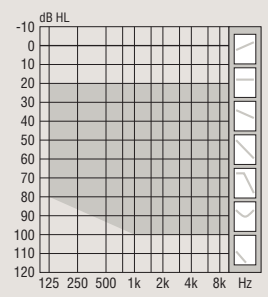
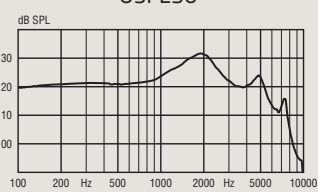
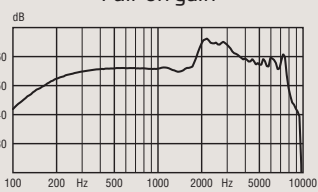
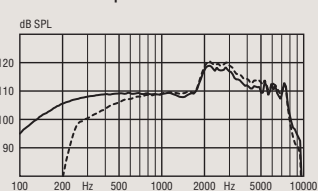
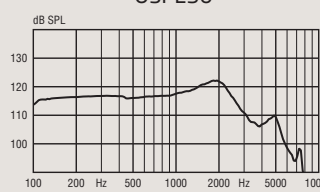
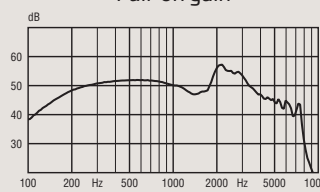
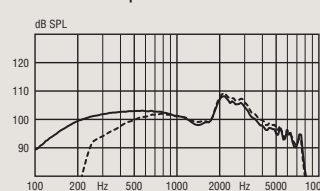
Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 85  Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.		 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik — Akoestische input: 60 dB SPL - - - Magnetische input: 31,6 mA/m	 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik — Akoestische input: 60 dB SPL - - - Magnetische input: 31,6 mA/m
OSPL90	Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	127 dB SPL 120 dB SPL 121 dB SPL	116 dB SPL 111 dB SPL 112 dB SPL
Full-on gain*	Piek 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 52 dB 55 dB	54 dB 43 dB 47 dB
Reference test gain		45 dB	34 dB
Frequentiebereik		120-7500 Hz	100-7500 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	82 dB SPL	-
	10 mA/m veld	102 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	94/94 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	26 dB SPL	21 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	30 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 1

miniRITE R 100

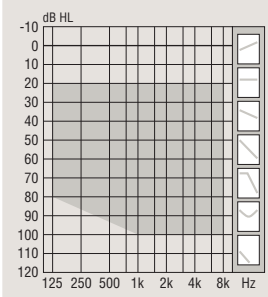
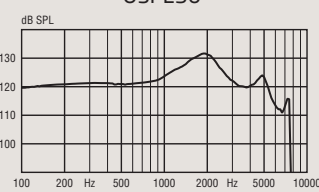
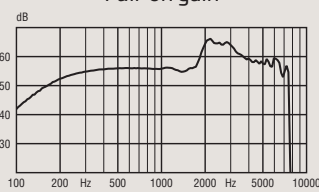
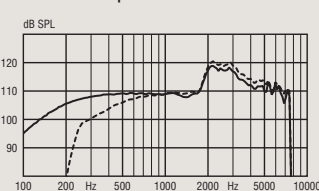
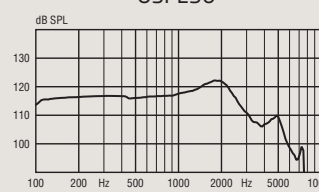
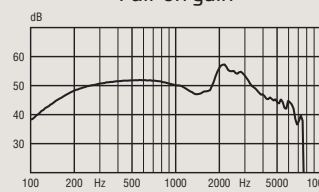
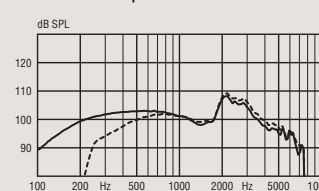
Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
  Oorstukje, bass en power dome Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand. Toestelwaarschuwing Bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan de selectie en aanpassing van het toestel, omdat er mogelijk risico is op beschadiging van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker. — Akoestische input: 60 dB SPL --- Magnetische input: 31,6 mA/m		OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 	OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 
OSPL90	Piek	132 dB SPL	122 dB SPL
	1600 Hz	130 dB SPL	121 dB SPL
	HFA-OSPL90	127 dB SPL	118 dB SPL
Full-on gain*	Piek	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	48 dB
	HFA-FOG	59 dB	51 dB
Reference test gain		49 dB	42 dB
Frequentiebereik		100-8500 Hz	100-8000 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	86 dB SPL	-
	10 mA/m veld	106 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	103/103 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<7 %	<2 %
	800 Hz	<4 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	30 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 2 en 3

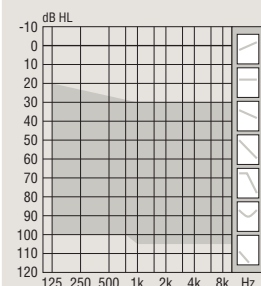
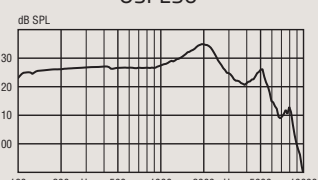
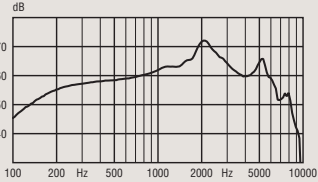
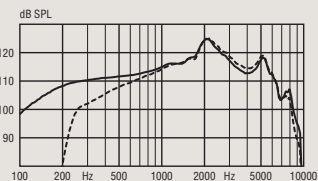
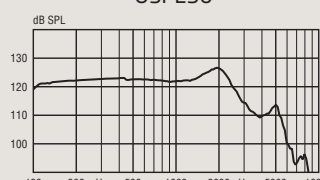
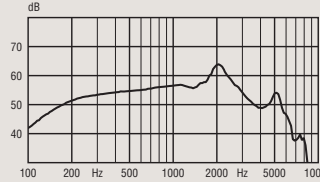
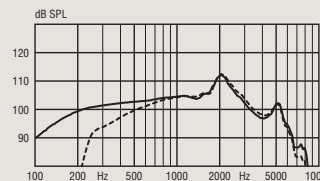
miniRITE R 100

Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
  Oorstukje, bass en power dome Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand. Toestelwaarschuwing Bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan de selectie en aanpassing van het toestel, omdat er mogelijk risico is op beschadiging van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker. — Akoestische input: 60 dB SPL --- Magnetische input: 31,6 mA/m		OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 	OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik 
OSPL90	Piek	132 dB SPL	122 dB SPL
	1600 Hz	130 dB SPL	121 dB SPL
	HFA-OSPL90	127 dB SPL	118 dB SPL
Full-on gain*	Piek	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	48 dB
	HFA-FOG	59 dB	51 dB
Reference test gain		49 dB	42 dB
Frequentiebereik		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Luisterspoeloutput (1600 Hz)	1 mA/m veld	86 dB SPL	-
	10 mA/m veld	106 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	103/103 dB SPL
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)	500 Hz	<7 %	<2 %
	800 Hz	<4 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruisequivalent inputniveau	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	30 dB SPL
Batterij		Lithium-ion	Lithium-ion
Verwachte gebruikstijd, uren**		24	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL	

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

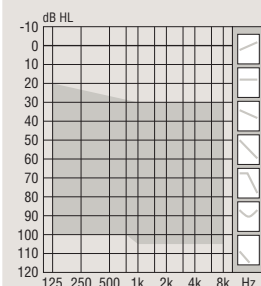
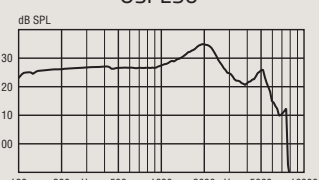
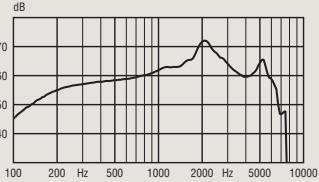
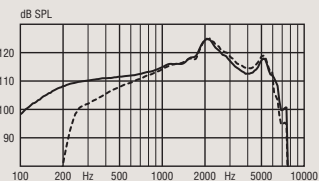
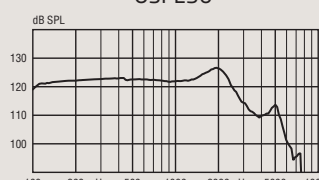
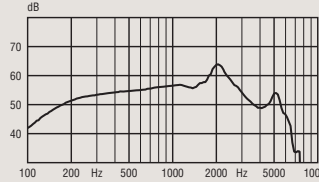
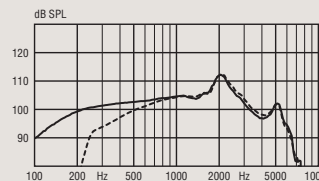
Oticon Opn S 1

Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 105  Power Flex-oorstukje		 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik	 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik
Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.			
Toestelwaarschuwing Bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan de selectie en aanpassing van het toestel, omdat er mogelijk risico is op beschadiging van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker.			
Akoestische input: 60 dB SPL Magnetische input: 31,6 mA/m			
OSPL90		Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	Piek 135 dB SPL 132 dB SPL 130 dB SPL
Full-on gain*		Piek 1600 Hz HFA-FOG	127 dB SPL 125 dB SPL 122 dB SPL
Reference test gain			72 dB 65 dB 65 dB
Frequentiebereik			58 dB 46 dB
Luisterspoeloutput (1600 Hz)		1 mA/m veld 10 mA/m veld SPLITS L/R	100-8200 Hz 96 dB SPL 116 dB SPL -
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	- 105/105 dB SPL 100-7800 Hz
Ruisequivalent inputniveau		Omni Dir	<2 % <2 % <2 %
Batterij			18 dB SPL 28 dB SPL
Verwachte gebruikstijd, uren**			24
IRIL (IEC 60118-13:2011)			700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Oticon Opn S 2 en 3

Technische gegevens		Ear simulator Gemeten volgens IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV en IEC 60318-4:2010	2CC coupler Gemeten volgens ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 en IEC 60318-5:2006
 105  Power Flex-oorstukje		 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik	 OSPL90  Full-on gain  Frequentiebereik
Technische informatie Tenzij anders vermeld zijn alle metingen in de omnidirectionele stand.			
Toestelwaarschuwing Bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel waarvan de maximum output de 132 dB SPL (IEC 711) overschrijdt. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan de selectie en aanpassing van het toestel, omdat er mogelijk risico is op beschadiging van het restgehoor van de hoortoestelgebruiker.			
Akoestische input: 60 dB SPL Magnetische input: 31,6 mA/m			
OSPL90		Piek 1600 Hz HFA-OSPL90	Piek 135 dB SPL 132 dB SPL 130 dB SPL
Full-on gain*		Piek 1600 Hz HFA-FOG	127 dB SPL 125 dB SPL 122 dB SPL
Reference test gain			72 dB 65 dB 65 dB
Frequentiebereik			58 dB 46 dB
Luisterspoeloutput (1600 Hz)		1 mA/m veld 10 mA/m veld SPLITS L/R	100-7500 Hz 96 dB SPL 116 dB SPL -
Totale harmonische vervorming (Input 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz	- 105/105 dB SPL 100-6500 Hz
Ruisequivalent inputniveau		Omni Dir	<2 % <2 % <2 %
Batterij			18 dB SPL 28 dB SPL
Verwachte gebruikstijd, uren**			24
IRIL (IEC 60118-13:2011)			700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL

* Gemeten met de versterking van het hoortoestel op het maximum min 20 dB en een input-SPL van 70 dB. Dit is om een versterking te krijgen gelijk aan de volledige versterking van bijv. IEC 60118-0+A1:1994, maar zonder invloed van feedback.

** De verwachte gebruikstijd voor oplaadbare batterijen is afhankelijk van het gebruikspatroon, de actieve functieset, gehoorverlies, de geluidsomgeving, de leeftijd van de batterij en het gebruik van draadloze accessoires.

Charger 1.0

miniRITE R

De oplader is ontworpen voor het opladen van miniRITE R, onderdeel van de Oticon Opn S™ families. De oplader is gebaseerd op inductietechnologie. Hij laadt de hoortoestellen draadloos op binnen drie uur. Een magnetische verbinding zorgt dat de hoortoestellen altijd op hun plek blijven in de oplader. De oplader is ontworpen om dagelijkse oplaadactiviteiten te vereenvoudigen tot enkele eenvoudige handelingen.

Opladen

- Ontworpen om het meeste te halen uit de dagelijkse routine van vlot en simpel opladen.
- Neem het hoortoestel uit en plaats het simpelweg in de lader, er is geen deksel dat geopend hoeft te worden. Een zo eenvoudige handeling dat het met één hand kan worden gedaan.
- Het hoortoestel begint automatisch met opladen wanneer het in de oplader wordt geplaatst en schakelt automatisch in wanneer het uit de oplader wordt genomen.
- Laad het hoortoestel elke nacht op, dan is het volledig opgeladen wanneer het overdag nodig is.

Productfeiten

- Opladen door inductie
- Aan/uit-ledindicator op de oplader
- De oplader wordt geleverd met een vast snoer
- Hoge stabiliteit door rubberen voeten
- Zachte, ronde vormen, eenvoudig te reinigen
- Zachte reistas meegeleverd

Intuïtief om te bepalen met enkele eenvoudige led-meldingen op het hoortoestel zelf:

- Rood = opladen
- Groen = volledig opgeladen

Korte laadtijden. Als het hoortoestel volledig leeg is, zijn de normale oplaadtijden als volgt:

- 3 uur = volledig opgeladen
- 1 uur = 50% opgeladen
- 0,5 uur = ds25% opgeladen



* Stekker verschilt van land tot land

Charger 1.0

miniRITE R

Technische gegevens: Charger	
Naam	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Ontworpen voor compatibiliteit	Oticon Opn S, Oticon Opn Play: miniRITE R
Afmetingen	Ø 95 mm / totale hoogte 39 mm
Gewicht	140 gram
Kleur	Black
Voedingstekker	USB A
Statusindicator	Led op oplader. Duidt aan/uit-status van oplader aan Led op hoortoestel. Duidt laadmodus aan
Oplaadtijd van hoortoestellen	Max. 3 uur afhankelijk van beginstatus batterij (Temperatuur: +5 tot +35 C°) Max. 4 uur afhankelijk van beginstatus batterij (Temperatuur: +35 tot +40 °C)
Stroombron	Meegeleverde voeding
Ingangsspanning	5 V DC
Ingangsstroom	< 0,2 A (opladen van twee hoortoestellen) < 10 mA stand-by (geen hoortoestellen geplaatst)
Kabel	Vaste kabel / 150 cm
Aansluiting met externe apparatuur	Bij aansluiting op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368, IEC-60950 (of IEC-60065, IEC-60950 tot 20 juni 2019) veiligheidsnormen.
Gebruiksomstandigheden	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -25 °C tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 93 %, niet-condenserend
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa
Technische gegevens: Voeding	
Voeding	AN05x-050A
Ingangsspanning	100-240 V AC
Ingangsstroom	0,2 A
Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning	5 V DC
Uitgangsstroom	1 A



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denemarken
+45 3917 7100

198041NL / 2018.12.06



www.oticon.nl

oticon
PEOPLE FIRST