

Power trifft  
auf Design




- Premium
- Advanced
- Grundfunktionen - Erster Einsatz



### Plus Power

Das kleinste BTE 13 mit einem MPO von 138 dB SPL

# Hohe Leistung trifft hohe Klangtreue

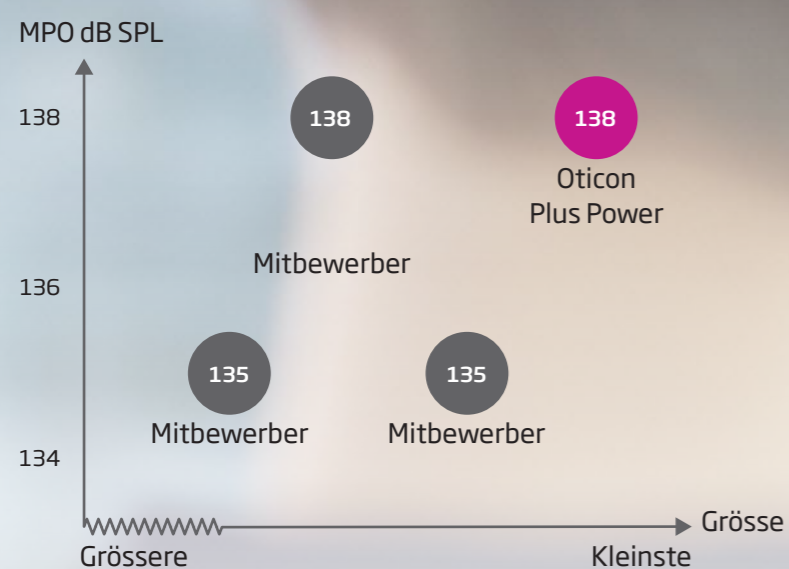

Das BTE 13 105 ist das kleinste Hörsystem der Welt mit einem maximalen Ausgangsschalldruck von 138 dB SPL.

Was würden Sie sagen, wenn Sie Ihre stark bis hochgradig hörgeschädigten Kunden mit einem kleinen und unauffälligen Hörsystem versorgen und ihnen zugleich ein ebenso reines wie klares und detailreiches Signal anbieten könnten, das ihnen ein authentisches und natürliches Hörerlebnis ermöglicht? Dann ist das neue Oticon BTE 13 105 Plus Power genau das, worauf Sie schon immer gewartet haben!

## Das Power-Paket in Sachen Klang

Plus Power ist ein überraschend kleines, aber äusserst leistungsfähiges Hörsystem, das Ihren Kunden Klangtreue in höchster Qualität bietet. Mit seinem neuen und innovativen Lautsprecher und einer um 30 % höheren Verarbeitungsleistung des Inium Sense Prozessors liefert das BTE 13 105 Plus Power einen Ausgangspegel, der an die Höchstwerte von Super-Power-Geräten heranreicht.

## BrainHearing™ - Leistung auf höchstem Niveau

Ihre Kunden profitieren ausserdem von der BrainHearing Technologie. Das Plus Power unterstützt das Gehirn bei der sinnvollen Strukturierung der Höreindrücke und verbessert dadurch das Hörvermögen Ihrer Kunden und gibt ihnen damit die Möglichkeit, sich im familiären Umfeld oder Freundeskreis mühelos unterhalten zu können.



Den kompletten Artikel zur BrainHearing Technologie von Oticon finden Sie im Internet unter [www.oticon.ch/BrainHearing](http://www.oticon.ch/BrainHearing).

## Spitzentechnologien zur Unterstützung von BrainHearing Speech Guard 2.0

Kombiniert die nahezu lineare Verstärkung der Sprachlaute mit schnell agierender Kompression. Ihre stark bis hochgradig hörgeschädigten Kunden müssen daher nicht auf ihre gewohnte, lineare Verstärkung verzichten und können zugleich von den Vorteilen einer schnellen Kompression profitieren, durch welche die wichtigen Sprachanteile geschützt und Störungen durch plötzlich auftretende laute Geräusche auf ein Mindestmass reduziert werden.

## Soft Speech Booster

Macht die leisen Anteile hörbar, aus denen normale Sprache zu über 75 % besteht. Leise Töne, die ansonsten vor allem von stark bis hochgradig hörgeschädigten Benutzern als undeutliches Nuscheln wahrgenommen werden.

## Erweiterte Anpassungsbandbreite

Von bis zu 10 kHz ermöglicht Benutzern mit starker bis hochgradiger Hörschädigung die Nutzung ihres Resthörvermögens zur Vervollständigung des Klangbildes und trägt damit zu größtmöglicher Klangqualität bei.

## Neue Version des Inium Sense Feedback Guard

gewährleistet ein ausreichend starkes Ausgangssignal ohne Einbussen an hoher Klangqualität.



# Power trifft auf Design

Überraschend klein – doch vollgepackt mit BrainHearing™ Technologie

Diskrete Passform und hohe Zufriedenheit durch modernes, stilvolles Design

Einfache Bedienung durch Doppeldrucktaster

Empfänger mit ausgewogener, hoher Ausgangsleistung von 138 MPO/73 FOG

Robust, nanobeschichtet und wasserabweisend (IP58) zum täglichen effektiven Schutz vor Verschleiss



## Schluss mit Kompromissen

Bei Menschen mit schwerer bis hochgradiger Hörminderung führt Schallverstärkung normalerweise zu einer Einbusse an Klangqualität und einem Bedarf an grösseren Hörsystemen. Ein wahrhaft hoher Preis.

Mit dem neuen Plus Power können Sie Ihren Kunden ab sofort ein kleines und diskretes, aber umso leistungsfähigeres Hörsystem anbieten, das individuell auf den jeweiligen Grad des Hörverlustes abgestimmt ist – ohne Kompromisse bei der Klangqualität und dem Sprachverstehen eingehen zu müssen.

## Eine neue Klangqualität für Menschen, die aktiv im Leben stehen

Das wahre Kraftpaket ist die bereits von Oticon Alta2 bekannte Klangqualität – ein Erbe der leistungsstarken Chip-Plattform Inium Sense. Die konstante Reaktion bei niedrigen Frequenzen in Verbindung mit hoher Bandbreite ermöglicht Ihren Kunden die vollständige Nutzung. Resthörvermögens und sorgt für eine hörbare Verbesserung der Klangqualität. Sie versetzen Ihre Kunden damit in die Lage, die subtilen Eigenschaften des natürlichen Sprachsignals wahrzunehmen und sich ohne Verständnisprobleme am Gesprächsverlauf beteiligen zu können.

## Erleichtern Sie den Umstieg. Sorgen Sie für ein maßgeschneidertes Hörerlebnis

Der Umstieg auf ein neues Hörgerät, wenn nicht sogar auf eine andere Marke, kann für Kunden mit starker bis hochgradiger Hörminderung schwierig sein. Kunden wechseln ihr Hörgerät im Durchschnitt nur alle 6 bis 10 Jahre, um die Gewöhnung an ein neues Hörgefühl zu vermeiden.

Mit Plus Power können Ihre Kunden jetzt auf ein moderneres Gerät mit BrainHearing Technologie umsteigen und von der besseren Sprachverständlichkeit profitieren, ohne eine lange Phase der Eingewöhnung befürchten zu müssen. Speech Guard 2.0 bietet die nahezu lineare Verstärkung, die sich viele Kunden wünschen, und mit YouMatic haben Sie und Ihre Kunden die Möglichkeit, eine individuelle Passform zu wählen, die den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben des Einzelnen am besten entgegenkommt.

Ihre Kunden wissen, worauf sie beim Hören am meisten Wert legen, und Sie können Ihren Kunden den bestmöglichen Hörerlebnis durch eine faszinierende Klangtreue bieten.



1:1

Das BTE 13105 Plus Power ist zwar klein und äusserst filigran, aber umso leistungsfähiger.

\*Quelle: Oticon Chili Zufriedenheitsumfrage, 2011





# In Verbindung mit der Welt



Ihre Kunden mit starker bis hochgradiger Hörminderung werden selbst mit den besten Hörsystemen in Umgebungen mit konkurrierenden Geräuschkulissen, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Plus Power basiert auf einer leistungsstarken Funktechnologie, die Ihren Kunden sowohl den Vorteil der binauralen Signalverarbeitung als auch die Vorzüge der Nutzung von ConnectLine bietet.

In Verbindung mit ConnectLine verwandeln sich die Hörsysteme in ein schnurloses Headset, mit dem die akustischen Signale störungsfrei in das Hörsystem übertragen werden können. Eine Vielzahl täglicher Aktivitäten wie Fernsehen, Musik hören oder Telefonieren wird dadurch erheblich erleichtert. Aktivitäten, die besonders wichtig sind, wenn sich Ihre Kunden mit der Welt verbunden fühlen möchten.

# Eine leistungsstarke Familie



	Alta2	Nera2	Ria2
<b>Speech Guard 2.0</b> Erfasst und bewahrt die subtilen Eigenschaften des natürlichen Sprachsignals	•		
<b>3D Lärm-Management</b> Zusammenarbeit beider Ohren mit dem Gehirn in Echtzeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren zu können	•		
<b>NEU VAC+ mit Soft Speech Booster</b> Verbessert das Verständnis leiser Sprachanteile, entsprechend den individuellen Hörvorlieben	•	•	
<b>YouMatic</b> Unterstützt die individuellen Hörbedürfnisse und persönlichen Klangvorlieben in wechselnden Hörumgebungen	Premium	Advanced	/
<b>5 Direktionalitätsmodi</b> Unterstützt die Fähigkeit des Gehirns zur Ortung der Schallquelle und filtert die Sprachanteile aus der Geräuschkulisse durch die Anwendung unterschiedlicher Richtungsfaktoren	Premium	Advanced	/
<b>NEU Inium Sense Feedback Guard</b> Reduziert störende Pfeifgeräusche auf ein Minimum, ohne Beeinträchtigung der Klangqualität und des Tragekomforts	•	•	•
<b>NEU Tinnitus SoundSupport™</b> Maßgeschneiderte Therapiemaßnahmen, Werkzeuge und Unterstützung entsprechend dem individuellen Bedarf*	•	•	•

Mit dem BTE 13 105 Plus Power runden wir die leistungsstarke Produktfamilie der Oticon Performance Line ab. Dieses Hörsystem ist in allen Leistungsklassen lieferbar.

\*Verfügbar bei ausgewählten Modellen



## People First

People First ist unser Versprechen  
Menschen die Fähigkeit zu geben,  
frei zu kommunizieren,  
natürlich zu interagieren  
und aktiv teilzunehmen