

# Tekniskt datablad

## Laddare 1.0 miniBTE R

Laddaren är avsedd att underlätta vardaglig laddning med några få enkla steg.

### Laddning

- Ta av dig hörapparaterna och placera dem i laddaren - ingen lucka behöver öppnas.
- Hörapparaterna börjar laddas automatiskt när de placeras i laddaren och slås automatiskt på när de tas ur laddaren.
- Ladda hörapparaterna varje natt så att de alltid är fulladdade dagtid.

### Tydliga indikatorer

Hörapparaternas LED-indikator underlättar avläsning av laddningsstatusen:

- Orange = Laddar
- Grön = Full laddning

### Kort laddningstid

Om hörapparaternas batterier är helt urladdade är normal laddningstid:

- 3,5 h = Full laddning
- 1 h = 40% laddning
- 0,5 h = 20% laddning

### Produktfakta

- Induktiv laddningsenhet
- LED-indikator för ström AV/PÅ
- Magnetisk anslutning-hörapparaterna sitter kvar i laddningsportarna
- Kabel med USB port
- Gummi undertill för bättre stabilitet
- Mjuka och runda kanter - lätt att rengöra
- Mjukt resefodral ingår



Laddstationen är avsedd för miniBTE R och bygger på beprövad och tillförlitlig teknologi.


Hörapparaterna laddas snabbt och effektivt när de placeras i laddaren. Full laddning nås på endast 3 och en halv timme.

Avsedd för miniBTE R  
Oticon More™  
Oticon Zircon  
Oticon Play PX



\*Typ av strömadapter varierar från land till land

<b>Teknisk data: Laddare</b>	
Namn	Laddare 1.0, Oticon miniBTE R
Tillverkad för/Kompatibel med	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX, miniBTE R
Mått	Ø95 mm /total höjd 39 mm
Vikt	135 g
Färg	Svart
Adapter för strömkälla	USB A
Statusindikator	Laddarens LED-indikator: Indikerar laddarens AV/PÅ-status LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar laddnings-status
Hörapparaternas laddningstid	Max 3,5 timmar beroende på batteriets kapacitet Temperatur: +10°C till +35°C (+50°F till +95°F) Max 5 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +5°C till +10°C och +35°C till +40°C (+41°F till +50°F och +95°F till +104°F)
Strömkälla	Medföljande strömadapter
Ingångsspänning	5 V DC
Ingångsström	< 0.2 A (vid laddning av två hörapparater) <10 mA viloläge (inga anslutna hörapparater)
Kabel	Fast kabel, längd 150 cm
Anslutning till extern utrustning	När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.
<b>Användningsförhållanden</b>	
Driftförhållanden	Temperatur: +5 °C till +40 °C (+41°F till +104°F) Relativ luftfuktighet: 5 - 93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur: -25°C till +70°C (-13°F till +158°F) Relativ luftfuktighet: 5 - 93 %, utan kondens
Atmosfäriskt tryck	700 hPa till 1060 hPa
<b>Teknisk data: Strömadapter</b>	
Ingångsspänning	100 -240 V AC
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsström	1 A

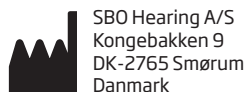

**Huvudkontor**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark