

ÜRÜN BİLGİSİ
OTICON CONNECTLINE
STREAMER PRO 1.3A

Oticon | ConnectLine

Streamer, ConnectLine sisteminin anahtarıdır. ConnectLine günümüz Oticon işitme cihazı kullanıcılarına, en iyi işitme cihazları ile dahi aşılması imkansız olan günlük dinleme durumlarına ve en zor dinleme koşullarına katılmaları ve etkileşimde bulunmalarını sağlar. Bu sistem TV izlemeye, sabit telefonla konuşmaya odaklanmış çözümler ve bir arkadaş Mikrofonu içerir. Streamer ayrıca cep telefonları için kulaklık işlevini destekleyen Bluetooth özelliğine de sahiptir.

Tam entegre bir sistem

ConnectLine ile kullanıcı, diğer insanların değil, sistemin kontrolündedir. Otomatik öncelik ve Otomatik bağlantı gibi gelişmiş özellikler sayesinde, kullanıcının TV izlerken telefonu duyması ve cevaplaması sağlanır.

Test edilmiş kullanılabilirlik

Streamer, işitme cihazı kullanıcıları düşünülerek geliştirilip test edilmiştir¹.

Müzik kulaklığı

Örneğin bir MP3 çalar üzerinden, sesler doğrudan ve güvenli bir şekilde her iki işitme cihazınıza, içeriğindeki kabloyla veya kablosuz Bluetooth kullanılarak iletilebilir.

Cep telefonu kulaklığı

Streamer birçok cep telefonu ile eşleştirebilir², Streamer'ın üst tarafındaki dahili mikrofon sayesinde işitme cihazlarınız yüksek kalitede bir çift kulaklığa dönüşür.

Telecoil

Telecoil özelliği olmayan işitme cihazlarına sahip olan veya Streamer üzerinden telecoil kullanmayı daha pratik bulan kullanıcılar için, dahili bir telecoil'i vardır.

ConnectLine Telefon

Ev telefonunu kullanmaya adanmış bir çözümdür. Streamer ve işitme cihazlarını kablosuz kulaklığa dönüştüren bir etkiye sahiptir.

ConnectLine TV

TV sesini doğrudan işitme cihazlarına ileterek, yüksek ses kalitesiyle TV izlemeye adanmış bir çözümdür.

ConnectLine Mikrofon

Küçük, gizli görünümüne sahip ve gürültülü zor dinleme koşullarında işitme cihazı kullanıcısı için konuşmanın gürültüye oranını oldukça artıran bir mikrofondur.

PC/VoIP - tak çalıştır

Streamer, paketindeki kablo ile doğrudan bir bilgisayara bağlanarak kulaklık olarak kullanılabilir.

FM girişi

Streamer'ın, FM alıcıların kullanımını destekleyen bir girişi vardır. Ayrıntılı bilgi için www.oticon.global/amigo 'u inceleyiniz.

iPhone®, iPad®, iPod touch® ve Android™ cihazları için ConnectLine App

Bu uygulama, işitme cihazlarını ve ConnectLine sisteminin kontrol etmenin gizli bir yolunu sunmanın yanında, ConnectLine sisteminin özelliklerini özelleştirme imkanını da sunar.

App Store veya Google Play™ üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.



Referanslar:

1. "Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototipin kullanılabilirlik testi" DialogDesign tarafından yazılmıştır. ("http://www.DialogDesign.dk" www.DialogDesign.dk), 15 Haziran 2011, 14 Ekim 2011 ve 7 Aralık 2011.
2. Uyumlu telefonların güncel listesi için lütfen www.oticon.global/support 'a bakınız.

oticon
PEOPLE FIRST



Manufactured by:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

oticon
PEOPLE FIRST

People First



"Önce İnsan" insanların birbirleri ile özgürce iletişim kurmalarını, doğal şekilde etkileşime girmelerini ve yaşama aktif olarak katılmalarını destekleme sözümüzdür.

ÜRÜN GÖRÜNTÜSÜ

İçindekiler

- Boyun ipi (uzun ve orta boy)³
- Şarj için güç adaptörü
- Koruyucu silikon kılıf
- PC/Audio arayüz kablo seti

3. NOT! Boyun ipi bu sistemin dahili bir parçasıdır ve en iyi performansı elde edebilmek için kullanılmalıdır.

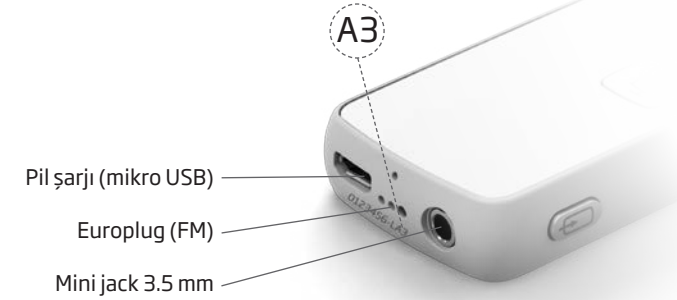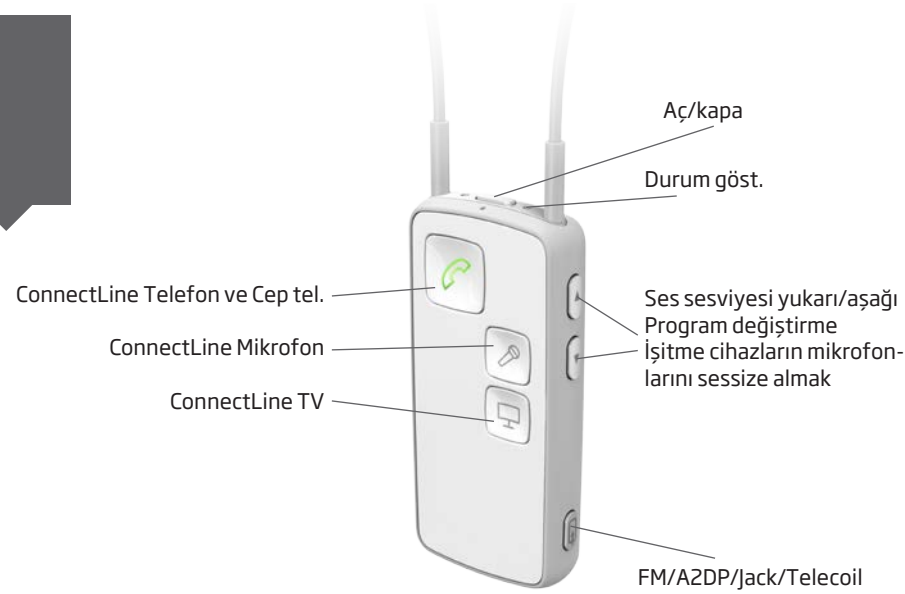

Oticon | ConnectLine

Teknik bilgi (1.3 yazılım ve 3.3.X sürümü)	
Uyumluluk	Bütün kablosuz (nearlink uyumlu) Oticon işitme cihazları (2007, Epoq'tan beri) Genie 2013.1 veya daha sonraki streamer yapılandırmaları
Boyutları	13 x 40 x 85 mm; ağırlık 44 g (boyun ipi olmadan)
ConnectLine sistem özellikleri	Otomatik Bağlantı (Streamer, çalışma mesafesindeki aygıtı otomatik olarak bağlanacaktır) Otomatik Öncelik (Streamer, telefona gelen aramalara öncelik tanıyacaktır)
Adanmış ConnectLine çözümleri	ConnectLine Mikrofon (ek bir ekipman gerektirir) ConnectLine Telefon 1.0 ve 2.0 (ek bir ekipman gerektirir) ConnectLine TV 1.0 ve 2.0 (ek bir ekipman gerektirir)
Diğer bağlantı çözümleri	Analog giriş (3.5 mm minijack) Analog çıkış (3.5 mm minijack), PC kulaklığı için (VoIP/Skype). Cep telefonu kulaklığı (Bluetooth handsfree veya kulaklığı) İletim/kablosuz müzik (Bluetooth A2DP) FM girişi (Europlug) Telecoil (içyapısında)
İşitme cihazları için uzaktan kumanda	Ses seviyesi, program değiştirme ve işitme cihazı mikrofonlarını sessize ⁴ almak.
Pil ⁵	Tipik günlük kullanım 10 saat: 6 saat TV iletimi + 2 saat telefon/diğer + 2 saat bekleme modu (100%'den 80% kapasiteye) 60 saat bekleme modunda (Açık, fakat ses iletimi olmadan) Şarj süresi 2 saat (80%'den 100% kapasiteye) 6 ay sadece uzaktan kumanda olarak (100%'den 80% kapasiteye) Toplam Pil ömrü 80 % kapasitesi 720 şarj/de şarj döngüsü kadardır Bunun anlamı; pil ömrü, tipik kullanımda en az iki yıldır
Minijack giriş duyarlılığı	Maks. 2Vrms (analog), akım direnci: 10 KΩ
Ses Kalitesi ⁶	Mono / 20 kHz sample frq
Ses Frekans aralığı ⁶	80 Hz - 10 kHz (A2DP/line-in)
Eşleşme detayları	Sekiz tane aygıtla eşleşebilir Aynı anda beş kablosuz aygıt aktif olarak çalışabilir (2 telefon, 1 TV adaptörü, 1 mikrofon ve 1 A2DP). Aynı anda sadece bir kaynaktan ses dinelenebilir.
Bluetooth uyumu	Ver. 2.0 + EDR
Bluetooth profil desteği	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 Head Set Profile (HSP) 1.2 Hands Free Profile (HFP) 1.6 Geniş Bant Konuşma destekli
Kablosuz bağlantı alanı ⁷	10 metre, 2. sınıf Bluetooth ile 30 metre, ConnectLine Telefon adaptörü 2.0 ve TV adaptörü 2.0 ile 15 metre, ConnectLine Mikrofon

EarStream alanı	0.5 metre sembolik olarak. En iyi performansın elde edilmesi için boyun ipi kullanılmalıdır.
Sinyal alanı	Gelen arama uyarısı ve uzaktan kumanda mesafesi 1.0 metre.
İletim frekansı	3.84 MHz
Durum göstergesi	Streamer üzerindeki LED ışıklar. İşitme cihazları ile akustik sinyaller.
Emisyonlar	Maks. -15dBµA / 10 metre ilgili standartlarla uyumlu olarak
Çalışma nemi	< 85% bağıl nem oranı
Çalışma ısısı	10-45 °C
Depolama ısısı	-20-70 °C
Streamer'ın kişiselleştirilmesi	Genie uygulama yazılımı SW (2013.1 veya daha sonrakiler) kullanılarak bazı özellikler oluşturulabilir. Genel Sadece bir TV için adanmış Streamer, sadece Telefon veya sadece Mikrofon ve Streamer. Ses iletimi olmadığında; SK, PGR anahtarı ve işitme cihazın sessiz konumu. Cep telefonları Gelen aramaları reddetme, son aranan numarayı arama, sesli arama, cep telefonu için farklı zil sesi seçimi ve bütün düğmelerle gelen aramaları cevaplama özelliklerini kapatmak. Diğer özellikler Otomatik kulaklık özelliği. Gelen A2DP uyarıları (yazılı mesaj/SMS uyarıları).
Genie 2013.1 (veya daha üstü)	Bir çift işitme cihazına iki adet Streamer bağlanabilir. Farklı Oticon işitme cihazlarında, ConnectLine program fonksiyonları ve ince ayarların farklı olacağını lütfen not alınız.
Diğer parça ve aksesuarlar	Bel klipsi Koruyucu kılıflar Siyah veya beyaz boyun ipi (uzun, orta veya kısa)
ConnectLine App Uyumluluğu	ConnectLine App, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch (5 ve 6. nesil) ile uyumludur ve Streamer Pro 1.2 App veya üstünü gerektirir. iPad üzerinde ConnectLine App uygulamasını indirmek için App Store'dan iPhone uygulamalarına bakın. Android akıllı telefonları ve tabletler için ConnectLine App uygulaması için ürün yazılımı 1.3 veya üstü bulunan herhangi bir Streamer Pro gerekir. Lütfen uyumluluk hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.oticon.global/support adresini ziyaret edin.

"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir" ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod, iPhone veya iPad'e bağlanacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından, Apple'in performans standartlarını sağladığının belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir servis markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Android robot Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmanın yeniden üretilmesi veya değiştirilmesiyle geliştirilmiştir ve Creative Commons 3.0 Atıf Lisansı'nda açıklanan şartlara uygun olarak kullanılmaktadır.

Referanslar:

4. Oticon Alta veya sonrası
5. Boyun ipi ve verilen şarj cihazın kullanımı
6. Elde edilecek gerçek ses performansı, hastanın işitme cihazlarına bağlıdır
7. Streamer ve diğer aygıt arasındaki serbest bağlantı özelliğine bağlıdır