



	Xceed Play 1	Xceed Play 2	
Konuşmayı Anlama	OpenSound Navigator™	Seviye 1	Seviye 2
	- Güç etkisini dengeleme	%100	%50
	- Maks. gürültü uzaklaştırma	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	OpenSound Booster™	•	•
	Speech Guard™ LX	Seviye 1	Seviye 3
Ses Kalitesi	Speech Rescue™ LX	•	•
	Temiz Dinamikler	•	-
	Uzaysal Gürültü Yönetimi	•	-
	Sinyal İşleme Kanalları	48	48
Dinleme Konforu	Bas Artırma (ses iletiminde)	•	•
	Geçici Gürültü Yönetimi	4 yapılandırma	3 yapılandırma
	Feedback kalkanı LX	•	•
Optimum Uygulama	Rüzgar Gürültüsü Yönetimi	•	•
	YouMatic™ LX, NR seviyeleri	3 yapılandırma	2 yapılandırma
	Uygulama Bantları	14	12
	REM AutoFit	Verifit® LINK, IMC2	Verifit® LINK, IMC2
	Pediyatrik Uygulama Modu	•	•
	DSL Uygulama Aralığı	•	•
	SK aralığı ve adım boyutu	•	•
Çocuklar için tasarlandı	Uygulama Formülleri	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+
	LED	•	•
	Kurcalamaya Karşı Dayanıklı Pil Yuvası	•	•
	Hipo Alerjenik	•	•
	IP Sınıfı	IP 68	IP 68
	Nano Kaplama	•	•
	Renk Seçenekleri	12	12
	Entegre 2,4 GHz alıcı	•	•
	Uzak Mikrofon	•	•
	DAI/FM	•	•
CROS/ BiCROS desteği	•	•	
Çift modlu uygulama paneli	•	•	

Çalıştırma koşulları
Sıcaklık: +1C° ile +40C°
Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Saklama ve taşıma koşulları
Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.
Sıcaklık: -25C° ile +60C°
Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Oticon Xceed Play BTE SP, 13 numara pilli süper güçlü bir işitme cihazıdır. Bu modelde kolay kullanım ve kontrol sağlamak üzere, programlar ve ses seviyesi için ayrı düğmeler bulunur. T-coil, opsiyonel LED gösterimleri ve sınıf sistemleri desteği özelliklerine sahiptir.

OpenSound Navigator pediatrik kullanıcılar için, ses kaynaklarını dengeleyerek ve arka plan gürültüsünü bastırarak, sese 360° erişim sunar.

OpenSound Optimizer feedback'i engelleyerek ve kullanıcıların belirlenen kazanç elde etmelerine izin vererek, hem dinleme deneyimini hem de konforu artırır.

TwinLink kablosuz bağlantı teknolojisi, dijital ses kaynaklarından doğrudan stereo akış için iki kulak arasındaki iletişimi, akışı ve 2,4 GHz bağlantıyı bir araya getirir.


Oticon Xceed Play, gelecekteki performans güncelleme-lerini destekleyen programlanabilir aygıt yazılımı mimarisi kullanılarak Velox S platformu üzerine inşa edilmiştir.

Genel özellikler:

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofon
- FM uyumlu
- 4 Programlı



Teknik veriler

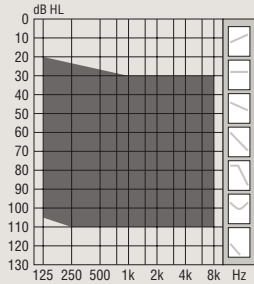

110



■ DSL Uygulama Aralığı
Boynuz, filtresiz

Teknik bilgi

Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılır.


Cihaz uyarısı

İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'i aşabilir (IEC 6038-4). İşitme cihazı kullanıcısının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı, cihaz seçimi ve uygulanması sırasında özel bir özen gösterilmelidir.


Kulak Simülatorü

IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ve IEC 60318-4:2010'a göre ölçülmüştür

OSPL90

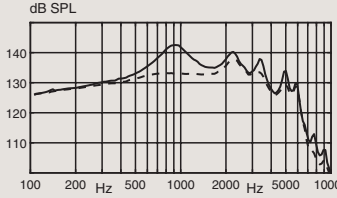


Tam Kazanç

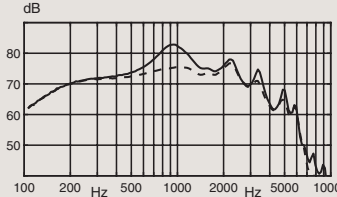

— Standart hortum, filtresiz boynuz
- - - Standart hortum, filtreli boynuz

Frekans Yanıtı

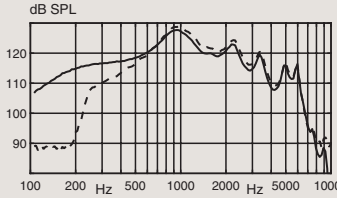


— Akustik girdi: 60 dB SPL
- - - Manyetik girdi: 31.6 mA/m


ZCC Coupler

ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006'ya göre ölçülmüştür

OSPL90

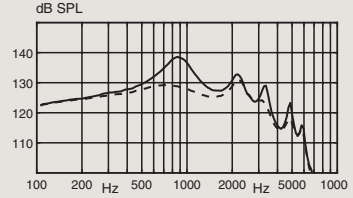


Tam Kazanç

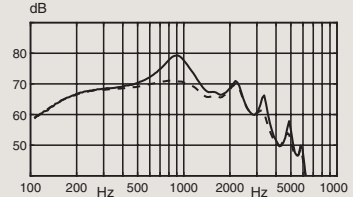

— Standart hortum, filtresiz boynuz
- - - Standart hortum, filtreli boynuz

Frekans Yanıtı

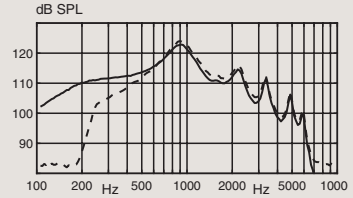

— Akustik girdi: 60 dB SPL
- - - Manyetik girdi: 31.6 mA/m

OSPL90	Tepe	143 dB SPL	139 dB SPL
	1600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
Tam kazanç ¹	Tepe	83 dB	79 dB
	1600 Hz	75 dB	67 dB
	HFA-FOG	77 dB	70 dB
Referans test kazancı		61 dB	53 dB
Frekans aralığı		100-6500 Hz	100-6100 Hz
Telecoil çıkışı (1600 Hz)	1 mA/m alan	109 dB SPL	-
	10 mA/m alan	126 dB SPL	-
	SOL/SAÇ ORANI	-	115 dB SPL
Toplam harmonik bozulma (Giriş 70 dB SPL)	500 Hz	% 4	% 4
	800 Hz	<%2	<%2
	1600 Hz	<%2	<%2
Eşdeğer gürültü giriş seviyesi	Omni	18 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	34 dB SPL
Pil tüketimi ²	Tipik	1,6 mA	2,5 mA
	Sessiz	1,4 mA	1,4 mA
Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³		200	125
Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 13 - IEC PR48) ⁴		75-115	

- İşitme cihazının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20dB ayara göre 70dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadandır; IEC 60118-0+A1:1994'e göre tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- Pil akımı, IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre, en az 3 dakikalık yatışma süresinden sonra ölçülür.
- Standart pil tüketim ölçümünü temel alır (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Gerçek pil ömrü, pilin kalitesine, kullanın şekline, etkin özellik kurulumuna, işitme kaybına ve ses çevresine bağlıdır.
- Gerçek pil kullanım ömrü; değişken ses artırma ayarları ve değişken ses giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini aralık olarak gösterilir ve buna bir TV'den (%25 kullanım zamanı ile) aktarılan stereo ses ile bir cep telefonundan (%6 kullanım zamanı ile) aktarılan sesler de dahildir.