


Bedre lyd i et væld af situationer...



Travle, støjende omgivelser: Med Conversor Pro kan brugeren fokusere på den ønskede lydkilde. Den direktionelle mikrofon frasorterer i høj grad uønsket lyd ved siden af og bagved brugeren.

Dæmpet lyd: Conversor Pro forstærker automatisk den ønskede lyd, så brugeren kan høre selv dæmpet lyd klart og tydeligt uden at skulle anstrengte sig eller skrue op for høreapparaterne.

Afslappet samtal: Conversor Pro giver en stærkt forbedret lyd og klarhed, så brugeren kan omgås familie, venner og kolleger mere afslappet.

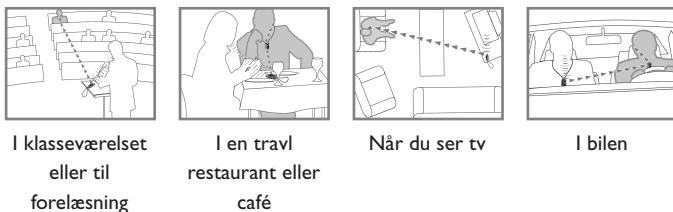

Bedre lydkvalitet uanset hvor du er...



Phonic Ear A/S

Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 3917 7101
E: mail@phonicear.dk
W: www.phonicear.dk

Conversor Pro
Ren og klar lyd
Høre hjælpemidler



Enkel lytning

Hvor som helst – til en aktiv livsstil

Her er Conversor Pro – et fleksibelt og prisvenligt høre hjælpemiddel, der hjælper høreapparatbrugere til at få mere ud af hverdagen.

Conversor Pro er en brugervenlig trådløs og bærbar løsning i særklasse. Den er en perfekt ledsager for alle, der har hørenedsættelse. Den kan bruges sammen med høreapparater med telespole, Cochlear Implants og høretelefoner.

Conversor Pro forstærker lyde i nærheden eller længere væk, sorterer ønsket baggrundsstøj fra og forbedrer lydniveauet og klarheden. Når baggrundsstøjen frasorteres, bliver den ønskede lyd tydeligere og mere forståelig selv i støjfyldte omgivelser, og når lydniveauet øges, belastes høreapparaterne mindre, så forvrængning og hyl i høreapparatet undgås.

Med Conversor Pro kan høreapparatbrugere deltage mere aktivt i hverdagens lyttesituationer uden at opleve frustrationer ved ikke at kunne høre ordentligt. Conversor Pro hjælper brugeren til at deltage i afslappede samtaler og lytte uden at anstrengte sig – uanset om det er i klasseværelset, på kontoret, ved sammenkomster, i bilen, på indkøb eller derhjemme. Conversor Pro imødekommer hørehemmedes lyttebehov i næsten alle situationer.

Udviklet til behagelig og diskret brug

Conversor Pro består af to lette dele – en sender/mikrofon og en halsmodtager.

Den kompakte trådløse sender forbedrer lydniveauet og klarheden i lyden tæt på eller længere væk fra brugeren. Brugere bestemmer selv, hvilke lyde de ønsker at fokusere på ved at vælge lytteindstilling – fokusindstillingen er til koncentreret lytning og samtaler på tommandshånd, mens den omnidirektionelle indstilling bruges til gruppesamtaler og sammenkomster.



Senderen kan enten holdes i hånden og peges direkte mod lydkilden, lægges på et passende underlag i nærheden af lydkilden eller bæres om halsen af en talende, der bevæger sig rundt i huset eller lokalet – f.eks. i undervisningssituationer. Den kan også

tilsluttes direkte til TV, stereoanlæg, PC samt video-, DVD- eller CD-spiller.

Modtageren bæres om halsen enten over eller under tøjet. Den forbedrede lyd kan høres direkte i høreapparatet, Cochlear Implant eller høretelefoner, som let kan tilsluttes modtageren.

Halsmodtageren har en indbygget mikrofon, så brugeren kan benytte den ved samtaler på tommandshånd.

Efter en hurtig opladning kan både sender og halsmodtager bruges sammenhængende i op til otte timer.

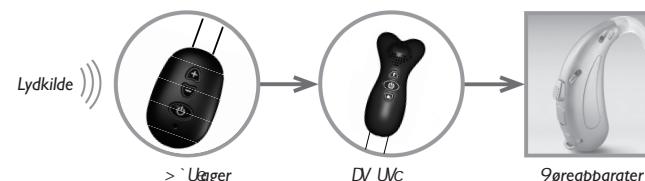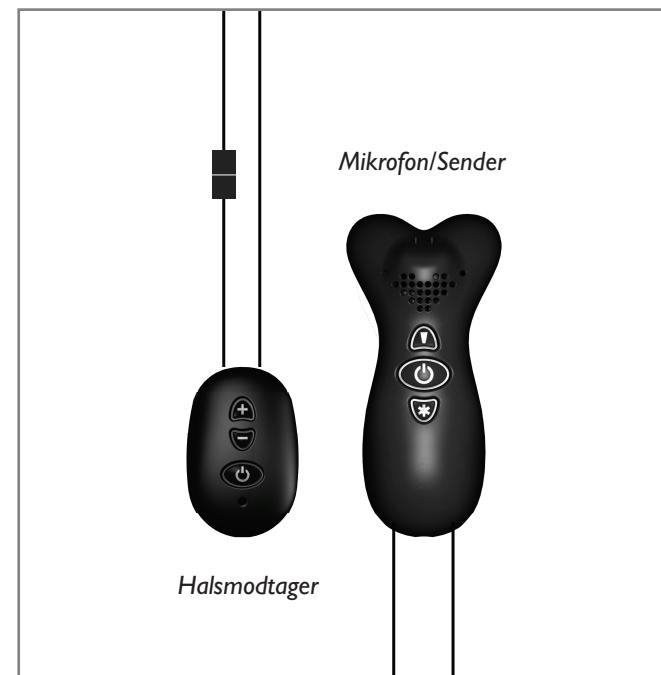

Derfor er Conversor Pro anderledes

Takket være en enestående sammensætning af funktioner giver Conversor Pro hørehemmede brugere optimal lydkvalitet og større fleksibilitet i et væld af situationer:

Reduktion af baggrundsstøj: Conversor Pro reducerer uønsket baggrundsstøj med op til 30 dB og forstærker den ønskede lyd, så brugere kan fokusere på det, de ønsker at høre.

Trådløs overførsel giver fleksibilitet ved større afstande. Senderen kan placeres i nærheden af lydkilden og sende forbedret lyd tilbage til brugeren i en afstand af op til 50 meter.

Fokusindstillingen gør brugeren i stand til at fokusere på én bestemt lyd blandt andre lyde. Andre lyde i baggrunden eller i omgivelserne dæmpes kraftigt.

Den omnidirektionelle indstilling opfanger lyde klart og tydeligt fra alle retninger i brugerens nærhed og er ideel ved familiemiddage eller møder. Læg f.eks. senderen på bordet for at deltage afslappet i en gruppesamtale.

Gruppeindstillinger: Conversor Pro senderen kan bruges sammen med flere halsmodtagere i en gruppe af hørehemmede med høreapparater eller høretelefoner. Taleren bærer senderen, og lyden overføres til alle brugere med halsmodtagere i en afstand af op til 50 meter indendørs og endnu længere udendørs. Conversor Pro fås også som gruppepakke til skoler og grupper. Spørg din forhandler for yderligere information.

