



Høretekniske
hjælpemidler

Katalog 2019/20

 **Phonic Ear®**



Velkommen til Puzzle Pro og
mange andre nye hørehjælpemidler

Indhold



Puzzle Pro alarmsystemet

- NY** 4 Puzzle Pro alarmsystemet
- NY** 6 Detect Pro & Detect Door Pro alarmsender
- NY** 7 Observer Pro babyalarm & Call Pro lyd giver
- NY** 8 Flash Pro lysgiver & PocketVib Pro trådløs vibrator
- NY** 9 Charger for PocketVib Pro
- NY** Repeater Pro & Puzzle to Puzzle Pro

Signalux alarmsystemet

- 10 Signalux alarmsystemet
- 11 Direkte sender & Akustisk sender
- 12 Dørtryk & Røgalarm
- 13 Gateway til røgalarm "Alarmo" & Varslingsenhed
- 14 Trådløs vibrator & Ladestation
- 15 Lysgiver & Gateway til smartphones

Vækkesystemer

- NY** 16 Wake Pro vækkeur og alarmmodtager
- 17 Signalux vækkeur og varslingsenhed
SmartShaker™ 2 trådløs pudevibrator
- NY** 18 TimeShaker® Wow & Star vækkeur
- NY** 19 Voyager & TravelTim rejsevækkeur

Aflytning af tv og musik

- NY** 20 Loop Pro teleslyngeforstærker & Link Pro tonekald
- NY** 21 Flex 5000 tv-løsning & SET 860 tv-forstærker
- NY** 22 Earis PR tv-forstærker
- 24 Oticon ConnectLine tv-adapter
- 26 Bernafon tv-adapter

- NY** 23 Tilbehør til høretekniske hjælpemidler

Forstærkertelefoner

- 28 Relation 2 forstærkertelefon
- 29 Ergophone S 510 Phonic Ear forstærkertelefon
PowerTel 49 plus forstærkertelefon
- 30 PowerTel 700 trådløs forstærkertelefon
AmpliPOWER 40 forstærkertelefon

Telefontilbehør

- 31 HearIt Mobile & CM-BT2 halsslynge
- NY** 32 iBell2 mobiltelefonsensor
- 25 Oticon ConnectClip & ConnectLine telefon-adapter 2
- 27 Bernafon SoundClip-A & Telefonadapter 2

- NY** 32 Tinnitus masker

Kommunikationssystemer og -forstærkere

- NY** 33 Crescendo 60 & Conversor Pro kommunikationsforstærker
- NY** 34 Oticon Amigo FM-system
- 25 Oticon ConnectLine mikrofon
- 27 Bernafon SoundGate mikrofon

Headsets til erhvervsaktive

- 22 Headset Jabra PRO™ 9465 Duo

Undervisningsudstyr

- 36 FrontRow Juno sound field lydsystem

38 Installationspriser og diverse ydelser

39 Genopsætningspriser

40 Fakta om teleslynger og høreapparater

41 Linkx kommunikationssystem

42 Om Phonic Ear

Puzzle Pro alarmsystemet


Koncept af hørehjælpemidler, der dækker hørehæmmedes behov for at høre diverse alarmsignaler og ringetoner i hjemmet.

Puzzle Pro er navnet på et system af hørehjælpemidler fra Phonic Ear. Puzzle Pro dækker hørehæmmedes behov for information om vigtige alarmsignaler og ringetoner i hjemmet og underholdning såsom tv og musik.


Hørehjælpemidlerne kan kombineres og sættes sammen alt efter brugerens behov. Alarmsenderne Detect Pro, Detect Door Pro og Observer Pro sikrer, at information om alarm- og ringesignaler bliver sendt til alarmmodtagerne. Brugeren gøres derved opmærksom på, at et alarmsignal eller en ringetone er aktiveret, når det fx ringer på døren, telefonen ringer, eller røgalarmer er gået igang. Alarmmodtagerne informerer brugeren via et kraftigt lyd-, lys- og/eller vibrationssignal.

Repeater Pro kan forlænge systemets rækkevidde, og Puzzle to Puzzle Pro gør Phonic Ears nye og gamle alarmsystem kompatible med hinanden.

Et Puzzle Pro alarmsystem sammensættes af minimum én alarmsender og én alarmmodtager.

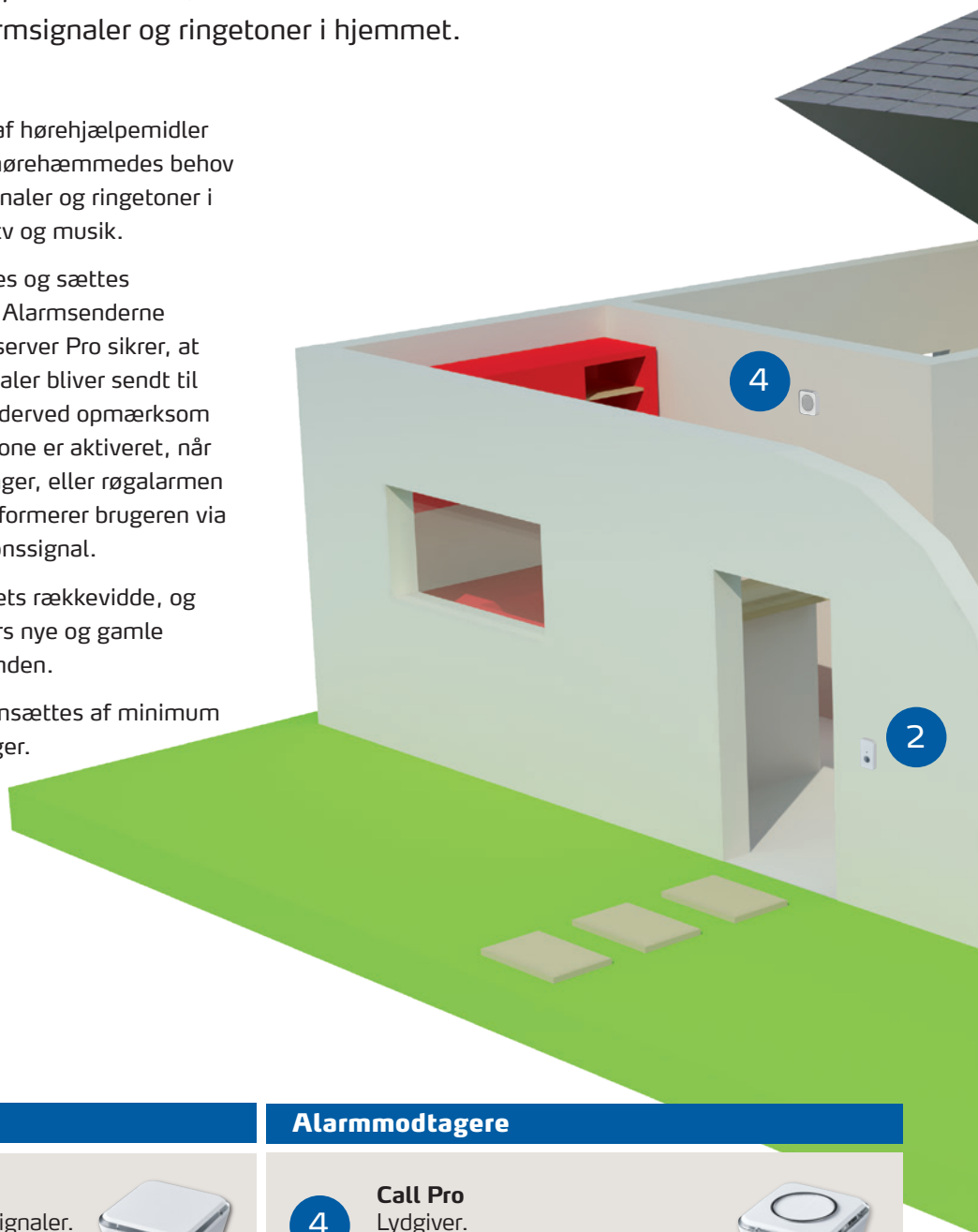

Alarmsendere	Alarmmodtagere
1 Detect Pro Opfanger alarm- og ringesignaler. Læs mere på side 6. 	4 Call Pro Lydgiver. Læs mere på side 7. 
2 Detect Door Pro Trådløs dørklokke. Læs mere på side 6. 	5 Flash Pro Lysgiver. Læs mere på side 8. 
3 Observer Pro Trådløs babyalarm. Læs mere på side 7. 	6 PocketVib Pro Trådløs vibrator. Læs mere på side 8. 
	7 Wake Pro Vækkeur og alarmmodtager. Læs mere på side 16. 

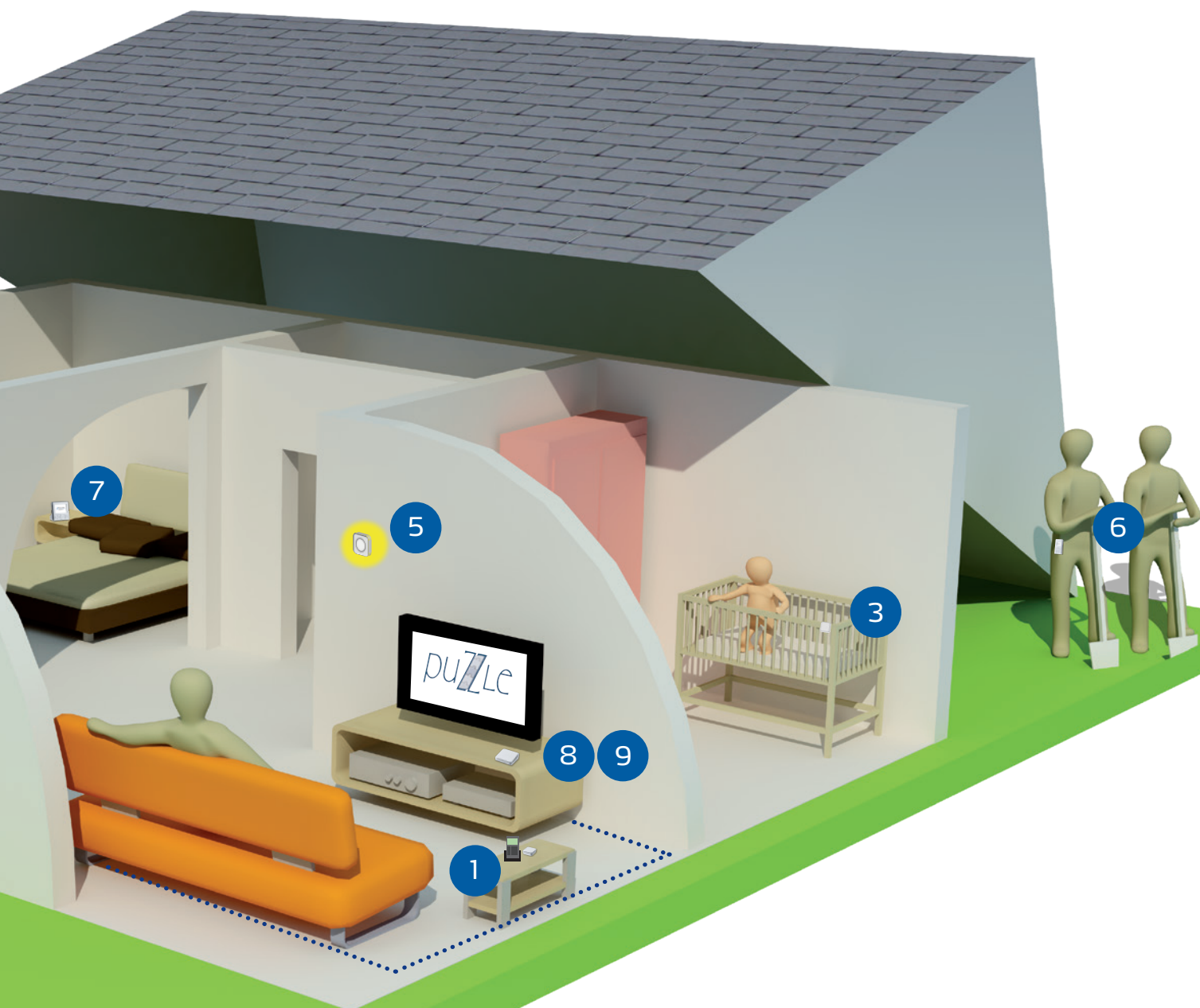

Alarmmodtagere (tv-løsninger)

8

Loop Pro

Teleslyngeforstærker.
Læs mere på side 20.



9

Link Pro

Tonekald.
Læs mere på side 20.



Signalmodul og systembro

Repeater Pro

Signalmodul.
Læs mere på side 9.



Puzzle to Puzzle Pro

Systembro.
Læs mere på side 9.



Detect Pro

Puzzle Pro systemets trådløse alarmsender sender information til Puzzle Pro modtagerne.

Detect Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere. Detect Pro sender alarmsignalet og ringetonen fra fx dørklokke, porttelefon, telefon og røgalarm til Puzzle Pro systemets modtagere. Disse signaler er svære at høre for folk med nedsat hørelse, men er yderst vigtige for deres tryghed og mulighed for selvstændig livsførelse.

Detect Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagerne, og brugeren kan få besked via fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro, Wake Pro, Loop Pro og Link Pro.



Har indbygget batteri, men kan også tilsluttes 230V

Kontaktmatte
Magnetkontakt
IR-sensor
PIR-sensor
se s. 23

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110931	200-00-043-00	Detect Pro inkl. batteri og vægbeslag	715,-	890-52-606-00	Bordfod	75,-
				204-01-001-00	Ekstern mikrofon	145,-
				890-52-610-00	5 V micro usb strømforsyning	85,-
				890-52-611-00	Usb til micro usb ledning	48,-

Detect Door Pro

Puzzle Pro systemets trådløse dørklokke sender information til Puzzle Pro modtagerne.

Detect Door Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere. Det er en trådløs dørklokke til folk med nedsat hørelse og døve. Når en besøgende trykker på knappen på Detect Door Pro, sendes et trådløst signal til Puzzle Pro systemets modtagere.

Detect Door Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere, og brugeren kan således få besked via et alarmsymbol, lyd, lys og/eller vibration, når det ringer på døren.

Detect Door Pro kan enten erstatte den almindelige trykknop uden for døren eller forbindes til en eksisterende dørklokke, hvis det ønskes.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110930	200-00-515-00	Detect Door Pro inkl. batteri	715,-	098-14-002-00	Batteri 3,6 V ER 1405	72,-

Observer Pro

Puzzle Pro systemets babyalarm sender information til Puzzle Pro modtagerne.

Med Observer Pro kan forældre trygt lægge deres barn til at sove uden at bekymre sig om ikke at kunne høre, hvis barnet græder. Observer Pro opfanger barnegråd og sender signalet til Puzzle Pro systemets modtagere, som informerer brugeren via et alarmsymbol, lyd, lys og/eller vibration.

Observer Pro fungerer med alle Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro, Wake Pro, Loop Pro og Link Pro.



NYHED

Med genopladeligt batteri

Kommer snart

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110939	200-00-111-00	Observer Pro inkl. strømforsyning og ekstern mikrofon	1.830,-	890-52-612-00 890-52-606-00	Vægbeslag Bordfod	25,- 75,-

Call Pro

Puzzle Pro systemets lyd giver et tydeligt lydsignal, når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.

Call Pro er en højttaler, der udsender et klart og tydeligt akustisk signal, når en alarm fra en af Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro modtages.

Hver alarm har sit eget unikke lydmønster og egen unikke farve i lysrammen samt en lysdiode, så brugeren kan skelne mellem de forskellige alarmsignaler. Lydsignalet kan indstilles til 16 forskellige frekvenser (toneniveauer) og kan således indstilles til den frekvens, som brugeren hører bedst.

Call Pro kan enten fastmonteres på en væg eller sættes på en bordfod og tages med rundt i boligen.



NYHED

Pudevibrator fås som tilbehør. Mobiltelefon-sensor kommer.

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110932	200-01-143-00	Call Pro inkl. vægbeslag og strømforsyning	955,-	890-52-606-00 890-52-608-00	Bordfod Pudevibrator	75,- 380,-

Flash Pro

Puzzle Pro systemets lysgiver giver et tydeligt lyssignal, når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.

Flash Pro's kraftige halogenlampe sikrer, at brugeren får besked via tydelige lysblink, når en alarm fra en af Puzzle Pro alarmsenderne Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro modtages.

Hver alarm har sit eget unikke blinkmønster og sin egen unikke farve i lysrammen og en lysdiode, så brugeren kan skelne mellem de forskellige alarmsignaler fra fx dørklokke, porttelefon, telefon mv.

Flash Pro kan enten fastmonteres på en væg eller sættes på en bordfod og tages med rundt i boligen.



Pudevibrator
fås som tilbehør.
Mobiltelefon-
sensor
kommer.

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110934	200-01-244-00	Flash Pro inkl. vægbeslag og strømforsyning	955,-	890-52-606-00 890-52-608-00	Bordfod Pudevibrator	75,- 380,-

PocketVib Pro

Puzzle Pro systemets trådløse vibrator vibrerer kraftigt, når et alarmsignal eller en ringetone aktiveres.

PocketVib Pro modtager alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, røgalarm mv. via Puzzle Pro alarmsenderne Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro.

PocketVib Pro informerer brugeren via kraftige vibrationer, lys i lysrammen, lyd og et alarmsymbol i displayet.

Hver alarm har sit eget unikke vibrationsmønster, sin egen unikke lysindikation i lysrammen og melodi og sit eget unikke symbol i displayet, så det er nemt for brugeren at finde ud af, hvilken alarm der er aktiveret.



Nu med display,
der bl.a. viser
alarmsymbol og
alarmhistorik

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110938	200-01-311-00	PocketVib Pro inkl. bælteclips og strømforsyning	1.830,-	200-01-313-00	Charger for PocketVib Pro	615,-

Charger for PocketVib Pro

Dockingstation til PocketVib Pro vibratoren.

Dockingstationen fungerer som holder til opladning af PocketVib Pro vibratoren og udvider vibratorens funktionalitet og muliggør tilslutning af pudevibrator (tilbehør) og sengebundsvibrator (tilbehør).

Dockingstationen har en lysramme, der indikerer, når en alarm aktiveres, hvis PocketVib Pro er placeret i den.



NYHED

Muliggør tilslutning af sengebundsvibrator og pudevibrator til PocketVib Pro. Mobiltelefonsensor kommer.

Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
200-01-313-00	Charger for PocketVib Pro inkl. strømforsyning	615,-	200-01-311-00	PocketVib Pro	1.830,-
			890-52-608-00	Pudevibrator	380,-
			890-15-405-00	Sengebundsvibrator	4.795,-

Repeater Pro

Puzzle Pro systemets signalmodul, der forlænger senderækkevidden mellem Puzzle Pro enhederne.

Repeater Pro sørger for, at brugeren kan bruge Puzzle Pro alarmsystemet over længere afstande. Signalmodulet forlænger senderækkevidden mellem Puzzle Pro alarmsenderne og alarmmodtagerne med op til 100 meter ved frit udsyn.



NYHED

Forlænger Puzzle Pro alarmsystemets rækkevidde

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
115452	200-01-270-00	Repeater Pro inkl. vægbeslag og strømforsyning	715,-

Puzzle to Puzzle Pro

Systembro, der gør Puzzle og Puzzle Pro alarmsystemerne kompatible.

Puzzle to Puzzle Pro systembroen sender og modtager alarmsignaler fra både Puzzle og Puzzle Pro systemet og gør de to systemer kompatible. Systembroen gør det således muligt at kombinere alarmsendere og alarmmodtagere fra begge systemer.



NYHED

Gør Puzzle og Puzzle Pro alarmsystemerne kompatible

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
111005	200-01-280-00	Puzzle to Puzzle Pro inkl. vægbeslag og strømforsyning	715,-

Signalux alarmsystemet

Koncept af hørehjælpemidler, der dækker hørehæmmedes behov for at høre diverse alarmsignaler og ringetoner i hjemmet.



Signalux er navnet på et koncept af hørehjælpemidler, der sørger for, at mennesker med nedsat hørelse kan høre eller få besked, når det ringer på døren, telefonen ringer, vækkeuret kimer, røgalarmer aktiveres mv.

Signalux fungerer som et klassisk sender-modtager-system. Alarmsystemet består af ti enheder - fem sendere og fem modtagere. En sender opfanger en lydkilde og sender signalet trådløst til modtagerne.

Signalux enhederne kan individuelt sammensættes efter brugerens behov og ønsker. Brugeren kan også selv vælge, hvordan modtageren skal informere om alarm- og ringsignalet - der er mulighed for at modtage besked via lyd, stærke lysblink, vibrationer og lysende symboler.

Alarmsystemets rækkevidde er ca. 80 m indendørs og 200 m i det fri. Signalux enhederne kan kombineres og sættes sammen alt efter brugerens behov og ønsker. Et Signalux system sammensættes af minimum én sender og én modtager.

SENDERE	MODTAGERE
 Direkte sender	 Varslings-enhed
 Akustisk sender	 Trådløs vibrator
 Dørtryk	 Lysgiver
 Røgalarm	 Vækkeur & varslings-enhed
 Gateway til røgalarm "Alarmo"	 Gateway til smart-phones



Signolux direkte sender

Signolux alarmsender, der sender information om alarmsignaler og ringetoner til Signolux modtagerne.

Signolux direkte sender forbindes med kabel til den alarm, som brugeren ønsker at høre fx dørklokke, porttelefon, fastnettelefon, kontaktmåtte mv. Når et signal opfanges, sendes det trådløst til en eller flere af Signolux modtagerne.

Der skal anvendes en direkte sender til hver alarmkilde, som brugeren ønsker at få besked om. Signolux direkte sender kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Signolux direkte sender drives enten af tre AAA batterier eller tilsluttes en 230 V stikkontakt (strømforsyning er tilbehør).



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103763	200-01-482-00	Direkte sender inkl. batterier	720,-	370-40-072-04 890-88-069-00 392-88-166-00	Alkaline 1,5 V AAA batteri Strømforsyning Telefonforbindelsesledning	5,- 85,- 35,-

Signolux akustisk sender

Signolux alarmsender, der sender information om alarmsignaler og ringetoner til Signolux modtagerne.

Signolux akustisk sender opfanger via en indbygget mikrofon den alarm, som brugeren ønsker at høre fx dørklokke, porttelefon, fastnettelefon, kontaktmåtte mv. Når et signal opfanges, sendes det trådløst til en eller flere af Signolux modtagerne.

Der skal anvendes en akustisk sender til hver alarmkilde, som brugeren ønsker at få besked om. Signolux akustisk sender kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Signolux akustisk sender drives enten af tre AAA batterier eller tilsluttes en 230 V stikkontakt (strømforsyning er tilbehør).



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103764	200-01-480-00	Akustisk sender inkl. batterier	720,-	370-40-072-04 890-88-069-00 200-00-534-00	Alkaline 1,5 V AAA batteri Strømforsyning Babymikrofon	5,- 85,- 250,-

Signalux dørtryk

Signalux systemets trådløse dørklokke, der sender information til Signalux modtagerne.

Signalux dørtryk er en trådløs alarmsender. Den fungerer enten som en trådløs dørklokke, der erstatter den almindelige trykknop ude foran døren, eller som en bærbar trådløs sender.

Når der trykkes på dørtrykket sendes et trådløst signal til en eller flere af Signalux modtagerne.

Dørtrykket kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden. Det kan anvendes både indendørs og udendørs.

Dørtrykket drives af et enkelt 3 V CR2032 batteri. Et LED-lys indikerer, om der er forbindelse mellem sender og modtager samt batteristatus.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103759	200-01-481-00	Dørtryk inkl. batterier	425,-	374-30-210-08	3 V CR2032 batteri	18,-

Signalux røgalarm

Signalux systemets trådløse røgalarm, der sender information til Signalux modtagerne.

Signalux røgalarm er en af Signalux systemets alarmsendere. Røgalarmen aktiveres af røg og varme og sender et trådløst signal til en eller flere af Signalux modtagerne og udsender en høj lyd (ca. 85 DB (A)).

Røgalarmen kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Røgalarmen har et indbygget batteri med en levetid på op til 10 år og en testknop.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
103757	890-52-115-00	Røgalarm	995,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Signolux gateway til røgalarm "Alarmo"

Signolux alarmsender, der opfanger lyden fra eksisterende røgalarmer og sender information til Signolux modtagerne.

Signolux gateway til røgalarm "Alarmo" er en af Signolux systemets alarmsendere. Alarmo er en akustisk sensor, der opfanger lyden fra allerede eksisterende røgalarmer (uafhængigt af mærke), uden at det er nødvendigt at trække ledninger. Signalet sendes til en eller flere af Signolux modtagerne.

Alarmo kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Alarmo tilsluttes 230 V og har et genopladeligt batteri som backup i tilfælde af strømsvigt.



Pudevibrator
fås som
tilbehør
se s. 23

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103766	890-52-114-00	Gateway til røgalarm "Alarmo" inkl. strømforsyning	965,-	890-52-123-00 374-88-140-00 890-15-003-00	Strømforsyning Genopladeligt 9 V batteri Pudevibrator	125,- 190,- 474,-

Signolux varslingsenhed

Signolux systemets basis modtager, der giver besked om alarmsignaler og ringetoner via lyd, lys og lysende symboler.

Signolux varslingsenhed er en af Signolux systemets trådløse modtagere. Varslingsenheden modtager trådløst alarmsignaler og ringetoner fra fx dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signolux alarmsystemet.

Varslingsenheden laver alarmsignalerne om til både kraftige lysblink og en lyd, der indikerer, hvilken alarm der er aktiveret. På displayet er der otte forskellige symboler, der ligeledes indikerer, hvilken alarm der er aktiveret.

Der kan anvendes et ubegrænset antal varslingsenheder til samme Signolux sender. Den drives af fire 1,5 V LR14 batterier eller tilsluttes 230 V (strømforsyning er tilbehør).



Pude- og
sengebunds-
vibrator fås
som tilbehør

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103761	200-01-488-00	Varslingsenhed inkl. batterier	1.045,-	371-40-074-08 890-88-069-00 890-15-003-00 890-15-406-00	1,5 V LR14 batteri Strømforsyning Pudevibrator Sengebundsvibrator	15,- 85,- 474,- 1.500,-

Signalux trådløs vibrator

Signalux systemets trådløse vibrator, der omdanner alarmsignaler og ringetoner til kraftige vibrationer.

Signalux systemets trådløse vibrator modtager alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet. Den trådløse vibrator laver signalerne om til vibrationer og viser via seks forskellige symboler på displayet, hvilken alarm der er aktiveret.

Vibratoren er lille og let og kan være i en lomme eller fastgøres til tøjet. Den drives enten af to Alkaline AAA batterier eller to genopladelige batterier. De genopladelige batterier fås som tilbehør sammen med Signalux ladestationen.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103765	200-00-531-00	Trådløs vibrator inkl. batterier	1.479,-	370-40-072-04	Alkaline 1,5 V AAA batteri	5,-
				890-52-119-00	Ladestation inkl. 2 stk. genopladelige batterier	349,-
				890-15-003-00	Pudevibrator	474,-
				890-15-406-00	Sengebunds-vibrator	1.500,-

Signalux ladestation

Ladestation til Signalux trådløs vibrator.

Signalux ladestation er en holder til opladning af Signalux alarmsystemets trådløse vibrator. Det er vigtigt, at der er genopladelige batterier i den trådløse vibrator, hvis ladestationen benyttes. Lysdioder indikerer status på opladning af batterierne.



Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
890-52-119-00	Ladestation inkl. 2 stk. genopladelige batterier	349,-	890-15-003-00	Pudevibrator	474,-
			374-30-330-00	Genopladeligt AAA batteri	40,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Signalux lysgiver

Signalux systemets trådløse lysgiver, der omdanner alarm-signaler og ringetoner til et lyssignal og et lysende symbol.

Signalux systemets trådløse lysgiver modtager alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet. Lysgiveren laver signalerne om til lyssignaler og viser via seks forskellige symboler på displayet, hvilken alarm der er aktiveret.

Der kan anvendes et ubegrænset antal lysgivere til samme Signalux sender. Lysgiveren skal blot sættes i en 230 V stikkontakt.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103762	200-01-485-00	Lysgiver	930,-	890-15-003-00	Pudevibrator	474,-

Signalux gateway til smartphones

Signalux gateway til smartphones giver brugeren besked om alarmsignaler og ringetoner via smartphonen.

Signalux gateway til smartphones modtager alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet.

Når Signalux gateway til smartphones kobles op til hjemmets internet, sender den signalet videre til en mobiltelefon. En gratis app indikerer med et symbol på mobiltelefonen, hvilken alarm der er aktiveret.

Signalux gateway til smartphones fungerer med både iOS og Android.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
103767	200-50-606-00	Gateway til smartphones inkl. strømforsyning og netværksskabel	1.495,-

Wake Pro

Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager med kraftig vibrator.

NYHED



Wake Pro sørger for, at brugeren får besked, når vækkeuret ringer, og/eller når en alarm fra Puzzle Pro alarmsenderne aktiveres, fx når det ringer på døren, telefonen ringer mv. Brugeren bliver vækket af den kraftige vibrator, der placeres under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler fra uret.

Hver alarm har sit eget unikke vibrationsmønster og symbol i displayet samt sin egen unikke lysindikation i lysrammen, så det er nemt for brugeren at finde ud af, hvilken alarm der er aktiveret.

Wake Pro har et stort display, der viser ur, dato samt indgående alarmsignaler. Wake Pro har også indbygget batteribackup.



Nu med display, der bl.a. viser ur, dato og indgående alarmsignaler

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110935	200-01-441-00	Wake Pro inkl. strømforsyning og pudevibrator	1.245,-	890-15-405-00 890-52-608-00	Sengebundsvibrator Pudevibrator	4.795,- 380,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Signalux vækkeur og varslingsenhed

Et vækkeur, der vækker brugeren via lyd, lys og/eller vibrationer, kombineret med en varslingsenhed, der informerer om alarmer.

Signalux vækkeur og varslingsenhed er både et vækkeur og en varslingsenhed, der giver besked om alarm- og ringesignaler fra dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet.

Vækkeuret og varslingsenheden laver alarmsignalerne om til justerbare lyd- og lyssignaler, og displayet indikerer med symboler, hvilken alarm der er aktiveret.

Selve vækkeuret har store digitale tal, 12-24 timers display, snooze-funktion samt backup i tilfælde af strømsvigt.

Sengebunds-
vibrator fås
som tilbehør



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103760	200-01-486-00	Vækkeur- og varslingsenhed inkl. pudevibrator og strømforsyning	1.245,-	890-52-123-00	Strømforsyning	125,-
				890-15-406-00	Sengebunds-vibrator	1.500,-
				890-15-003-00	Pudevibrator	474,-

SmartShaker™ 2

Bluetooth®-pudevibrator med kraftige vibrationer til brugere, der benytter deres smartphone som vækkeur.

SmartShaker™ 2 er en trådløs pudevibrator, der er ideel for dem, der ønsker at bruge deres smartphone som vækkeur, men hvor vibrationerne i telefonen ikke er kraftige nok.

SmartShaker™ 2 har Bluetooth® og fungerer sammen med en app, der gratis kan hentes til Apple og Android smartphones. Pudevibratorens kraftige vibrationer kan indstilles til tre forskellige intensiteter.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
103832	200-01-487-00	SmartShaker 2 inkl. usb-ladekabel	425,-

TimeShaker® Wow

Et vækkeur, der vækker brugeren via vibrationer og/eller lyd.

TimeShaker® Wow er et vækkeur med et stort display, ekstra høj ringetone og pudevibrator, hvilket gør det ideelt for hørehæmmede og døde.

TimeShaker® Wow kan vække enten via lyd eller vibrationer eller begge dele samtidigt. Tre røde lys på vækkeuret blinker også. Derudover har vækkeuret en usb-indgang, så fx en mobiltelefon eller tablet kan oplades direkte i vækkeuret. Uret kan indstilles til 12- eller 24-timers visning. Det store display har justerbart lys og snooze-funktion. Ringetonen og vibrationerne i pudevibratoren kan reguleres i styrke. Vækkeuret tilsluttes elnettet. Der kan også sættes to batterier i vækkeuret som backup i tilfælde af strømsvigt.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
103831	890-88-121-00	TimeShaker® Wow inkl. vibrator	545,-	370-40-072-04	Alkaline 1,5 V AAA batteri	5,-

Star

Et vækkeur, der vækker brugeren via vibrationer og/eller lyd.

Star er et vibratorvækkeur, der er ideelt til brug i hjemmet. Den kraftfulde pudevibrator gør vækkeuret perfekt for hørehæmmede og døde.

Vækkeuret har et tydeligt display, der kan indstilles i lysstyrke. Lyd og vibration kan indstilles til at være ekstra kraftige. Lyden kan derudover indstilles i tre forskellige frekvensområder. Vækkeuret har snoozefunktion og en usb-indgang, så fx en mobiltelefon kan oplades direkte i vækkeuret. Vækkeuret tilsluttes strøm via den medfølgende strømforsyning. Der kan også isættes et batteri (tilbehør) som backup i tilfælde af strømsvigt.



NYHED

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116081	890-52-141-00	Star inkl. vibrator og strømforsyning	465,-	374-30-210-08	Litiumbatteri CR2032	18,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Voyager

NYHED

Rejsevækkeur, der vækker brugeren via vibrationer, lyd og/eller lys.

Voyager er et praktisk rejsevækkeur, der er specielt velegnet til brug udenfor hjemmet, da det er kompakt, robust og transportabelt.

Voyager kan vække med vibration, lyd og lys. Uret har lys i displayet og en clips til fastgøring i fx hovedpuden. Uret kan indstilles på 12 eller 24 timer efter ønske og anvender to AA batterier og et AAA batteri.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116638	890-52-139-00	Voyager inkl. batterier	340,-	370-40-071-03	Alkaline 1,5 V AA batteri	5,-
				370-40-072-04	Alkaline 1,5 V AAA batteri	5,-

TravelTim

Rejsevækkeur, der vækker brugeren via vibrationer, lys og/eller lyd.

TravelTim er et praktisk rejsevækkeur, der er specielt velegnet til brug udenfor hjemmet, da det er kompakt, robust og transportabelt.

TravelTim kan vække med lyd, lys, vibration eller alle tre dele samtidigt. Uret har lys i displayet og clips til fastgøring i fx hovedpuden. Uret kan indstilles på 12 eller 24 timer efter ønske og anvender to AA batterier og et AAA batteri.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	HMI-nr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
62441	200-01-461-00	TravelTim inkl. batterier	428,-		370-40-071-03	Alkaline 1,5 V AA batteri	5,-
					370-40-072-04	Alkaline 1,5 V AAA batteri	5,-
				77524	890-15-003-00	Pudevibrator	474,-

Loop Pro

Puzzle Pro systemets teleslyngeforstærker hjælper brugeren med at høre tv eller radio tydeligt.

Teleslyngeforstærkeren kan anvendes af alle, der har høreapparater eller cochlearimplantater (CI) med telespole eller anden form for telemodtager. Lyden fra tv eller radio overføres direkte til brugerens høreapparat, CI eller telemodtager, og brugeren hører lyden klar og tydeligt uden generende baggrundsstøj.

Loop Pro kan modtage alarmsignaler og ringetoner fra Puzzle Pro alarmsenderne. Lyden fra tv eller radio dæmpes automatisk, når en alarm modtages, og et alarmsignal afspilles, ligesom lysrammen på Loop Pro indikerer, hvilken alarm der er aktiveret, hvilket gør det muligt for brugeren at skelne mellem forskellige alarmsignaler.



NYHED

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110936	200-02-362-00	Loop Pro inkl. rumslynge, strømforsyning, 3,5 til 3,5 mm stereojack og optisk lydkabel	1.385,-	890-52-129-00	Pudeslynge (HMI-nr. 32546)	198,-
				890-15-150-00	Mikrofon	175,-
				890-88-170-00	Phono/SCART adapter	55,-
				384-88-150-00	3,5 mm til 6,3 mm stereojack	50,-
				384-88-005-00	3,5 mm til 2 x phonostik	48,-
				890-52-609-00	Rumslynge	102,-

Link Pro

Puzzle Pro systemets tonekald informerer om alarmsignaler, når brugeren anvender en tv-løsning.

Link Pro er et ideelt valg for brugere af tv-løsninger uden tonekald fx Flex 5000, Set 860, Earis PR og andre FM-systemer, der kan kobles til tv, samt de tv-løsninger, der passer til specifikke høreapparatmodeller.

Kombineres tv-løsningerne med Link Pro og en eller flere af Puzzle Pro alarmsenderne får brugeren besked via tv-løsningen, når det ringer på døren, telefonen ringer, babyen græder mv.

Lyden fra tv og radio dæmpes automatisk, når der modtages en alarm, og et alarmsignal afspilles, ligesom lysrammen på Link Pro indikerer, hvilken alarm der er aktiveret.



NYHED

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
110937	200-02-251-00	Link Pro inkl. strømforsyning, 3,5 til 3,5 mm stereojack og optisk lydkabel	1.150,-	890-88-170-00	Phono/SCART adapter	55,-
				384-88-150-00	3,5 mm til 6,3 mm stereojack	50,-
				384-88-005-00	3,5 mm til 2 x phonostik	48,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Flex 5000

Trådløs forstærker til tv, radio og musik.

Flex 5000 er en trådløs forstærker i et stilfuldt design, der med fordel kan anvendes, når der ses tv eller lyttes til radio og musik. Flex 5000 er velegnet til mennesker med nedsat hørelse - med eller uden høreapparat.

Med Flex 5000 overføres lyden direkte fra tv'et eller musikanlægget til brugerens høreapparater (med telespole) via en halsslynge. Alternativt kan der anvendes et par hovedtelefoner (tilbehør).

Flex 5000 har en tonekontrol, TOSLINK, en rækkevidde på op til 30 m og en tast på modtageren for bedre taleforståelse.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
104947	200-20-044-00	Flex 5000 inkl. halsslynge	1.680,-	890-52-538-00	Halsslynge til Flex 5000	480,-
				890-88-629-00	Hovedtelefon	279,-
				890-52-540-00	MCA 800, løs lader	298,-
				890-52-539-00	Løs modtager inkl. lader	940,-

SET 860

Trådløs løsning til overførelse af lyd fra tv, radio og pc ved hjælp af FM.

SET 860 er en brugervenlig trådløs tv-løsning med stereolyd specielt velegnet til brugere med nedsat hørelse, der ikke har høreapparat, men som har svært ved at høre lyden fra tv, radio, pc mv.

Lyden fra tv'et eller musikanlægget overføres direkte til modtageren med stetoclip. Det er en meget brugervenlig løsning med få justeringsmuligheder. Modtageren tændes og slukkes automatisk. Lydstyrken justeres nemt på den store plus og minusnap. Rækkevidden er op til 70 meter.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
116082	890-52-128-00	SET 860 med stetoclip og genopladeligt batteri	1.720,-

Earis PR

NYHED

Trådløs forstærker, der giver brugerne en bedre og mere tydelig lyd, når de ser tv eller hører radio.

Earis PR er en trådløs forstærker, der giver mennesker med nedsat hørelse en bedre og mere tydelig lyd uden forstyrrende baggrundsstøj, når de ser tv eller lytter til musik. Earis PR overfører lyden fra tv'et eller musikafspilleren til brugerens høreapparater (med telespole) via en halsteleslynge.

Earis PR kan tilpasses den enkelte bruger via 5 forskellige høreprofiler og den indbyggede tonekontrol. Mikrofonen i modtageren giver desuden brugeren mulighed for at bruge systemet til samtaler.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116653	890-52-138-00	Earis PR inkl. halsteleslynge og genopladeligt batteri	1.995,-	890-52-136-00	Genopladeligt batteri	188,-
				890-52-135-00	Earis PR modtager	540,-
				890-52-137-00	Halsteleslynge	278,-

Headset Jabra PRO™ 9465 Duo

En erhvervsløsning til hørehæmmede.

Headset Jabra PRO™ 9465 Duo er et trådløst headset med en rækkevidde på op til 150 m. Basen har en berøringsskærm med mulighed for bl.a. forskellige toneindstillinger af lyden i hovedtelefonen og volumenkontrol samt en digital lydbehandling, der gør headsettet velegnet til brugere med nedsat hørelse. Mikrofonen i headsettet har avanceret støj-dæmpende teknologi, der reducerer uønsket baggrundsstøj og sørger for tydelige, forståelige samtaler.



Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
890-88-188-00	Jabra PRO™ 9465 Duo	3.175,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Tilbehør til høretekniske hjælpemidler

Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os, hvis du ikke finder, hvad du søger.

Kontaktmåtte

Kontaktmåtten placeres under dørmåtten og registrer, når man træder på den. Kontaktmåtten kan tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender. Måttens størrelse er 720 x 560 mm.

Ordrenr. 890-15-180-00
Kr. 425,-



Magnetkontakt

Magnetkontakten placeres mellem en dør og en dørkarm og registrerer, når døren åbnes eller lukkes. Magnetkontakten kan tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender.

Ordrenr. 890-52-536-00
Kr. 150,-



IR-sensor

IR-sensoren placeres i en døråbning og registrerer, når nogen passerer døråbningen. IR-sensoren kan tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender.

Ordrenr. 890-52-535-00
Kr. 1.568,-



PIR 360° sensor

Sensoren er en passiv infrarød sensor, der placeres i loftet. Den registrerer, når personer bevæger sig i lokalet. Den kan tilsluttes Detect Pro og Signolux direkte sender.

Ordrenr. 890-52-537-00
Kr. 538,-



Digital til analog omformer

På mange nyere tv er det ofte nødvendigt med en digital til analog omformer for at kunne tilslutte ekstra udstyr til tv'et fx teleslynge og FM-udstyr.

HMI-nr. 78910
Ordrenr. 890-60-023-00
Kr. 498,-



Digital til analog omformer Dolby 5.1

På nogle tv er det nødvendigt med en digital til analog omformer Dolby 5.1 for at kunne tilslutte ekstra udstyr til tv'et fx teleslyngeforstærkere.

Ordrenr. 890-60-027-00
Kr. 1.298,-



Pudevibrator

Pudevibrator, der kan tilsluttes flere Signolux produkter, TravelTim og iBell2.

Ordrenr. 890-15-003-00
Kr. 474,-



Sengebundsvibrator til Puzzle Pro

En kraftig sengebundsvibrator til personer, der sover meget tungt. Den måler 28 cm i diameter og placeres under madrassen. Kan tilsluttes Wake Pro eller et andet specialvækkeur.

Ordrenr. 890-15-405-00
Kr. 4.795,-



Oticon ConnectClip

Kombineret Bluetooth-headset, trådløs mikrofon og fjernbetjening til Oticon høreapparater.

Med ConnectClip kan Oticon høreapparater bruges som et trådløst headset. ConnectClip forbindes trådløst via Bluetooth® til høreapparaterne, og brugeren kan derefter foretage håndfri telefonsamtaler og streamer musik fra sin smartphone direkte til høreapparaterne.

ConnectClip kan også bruges som en partnermikrofon. Det betyder, at brugeren kan give den diskrete mikrofon til en person, der taler, og så høre personens stemme tydeligt og direkte i Oticon høreapparaterne. Dette kan være praktisk i situationer som forelæsninger, i bilen eller på en restaurant.

Det er også muligt at bruge ConnectClip som fjernbetjening til bl.a. at justere lydstyrken og skifte program med.

ConnectClip fungerer med Oticon Opn, Opn S og Sia høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
108030	178509	ConnectClip	1.516,-

Oticon ConnectLine tv-adapter

Trådløs overførsel af lyd fra fjernsynet til Oticon høreapparater.

Med ConnectLine tv-adapter kan brugeren nyde lyden fra fjernsynet i høj kvalitet.

ConnectLine tv-adapter 3.0 anvendes sammen med Oticon Opn, Opn S og Sia og sender lyden direkte til høreapparaterne.

ConnectLine tv-adapter 2 anvendes sammen med udvalgte Oticon høreapparater og sender lyd fra fjernsynet gennem Streamer Pro til brugerens høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
102515	168628	ConnectLine tv-adapter 3.0	1.680,-	890-88-605-00	Split connector, 2 vejs	59,-
81897	124771	ConnectLine tv-adapter 2	1.680,-			

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Oticon ConnectLine mikrofon

Diskret mikrofon til én-til-én samtaler i støjende omgivelser.

ConnectLine mikrofonen er lille og trådløs og kan bæres af den person, som høreapparatbrugeren taler med eller ønsker at lytte til. Dette hjælper høreapparatbrugeren med at forstå bedre i situationer, hvor der er lang afstand til taleren, eller hvor omgivelserne er støjende eller en kombination af begge.

ConnectLine mikrofonen skal trådløst tilsluttes Streamer Pro og kan anvendes med udvalgte Oticon høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
69619	108402	ConnectLine mikrofon	1.200,-

Oticon ConnectLine telefon-adapter 2

Giver Oticon høreapparatbrugere trådløs forbindelse til fastnettelefonen.

ConnectLine telefon-adapter 2 samarbejder med brugerens fastnettelefon og gør høreapparaterne til et trådløst headset, så brugeren ikke behøver at rejse sig for at tage telefonen. For at besvare et opkald kan brugeren bare trykke på en knap på Streamer Pro.

ConnectLine telefon-adapter 2 kan anvendes med udvalgte Oticon høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
77304	127837	ConnectLine telefon-adapter 2	1.680,-

Bernafon SoundClip-A

Kombineret Bluetooth-headset, trådløs mikrofon og fjernbetjening til Bernafon høreapparater.

Med SoundClip-A kan Bernafon høreapparater bruges som et headset til telefonsamtaler og til at streame musik direkte til begge ører.

SoundClip-A kan også bruges som en partnermikrofon. Det betyder, at brugeren kan give den diskrete mikrofon til en person, der taler, og så høre personens stemme tydeligt og direkte i Bernafon høreapparaterne. Dette kan være praktisk i situationer som forelæsninger, i bilen eller på en restaurant.

Det er også muligt at bruge SoundClip-A som fjernbetjening til bl.a. at justere lydstyrken og skifte program med.

SoundClip-A fungerer med Bernafon høreapparaterne Zerena og Viron.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
108815	179317	Bernafon SoundClip-A	1.516,-

Bernafon tv-adapter

Trådløs overførsel af lyd fra fjernsynet til Bernafon høreapparater.

Bernafons tv-adapter giver Bernafon høreapparatbrugere en klar og tydelig lyd fra fjernsynet.

Bernafons TV-A tv-adapter anvendes sammen med Bernafons Zerena og Viron høreapparater og sender lyden direkte til høreapparaterne.

Bernafons TV-adapter 2 anvendes med udvalgte Bernafon høreapparater og sender lyden fra fjernsynet gennem SoundGate til brugerens høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
105692	168631	Bernafon TV-A tv-adapter	1.680,-	890-88-605-00	Split connector, 2 vejs	59,-
80087	127847	Bernafon TV-adapter 2	1.680,-			

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Bernafon SoundGate Mikrofon

Diskret mikrofon til én-til-én samtaler i støjende omgivelser.

SoundGate Mikrofon er en lille trådløs mikrofon, der gør det muligt at føre en tydelig samtale selv i udfordrende lytteomgivelser. Den diskrete mikrofon bæres af den person, som høreapparatbrugeren ønsker at lytte til eller tale med. Høreapparatbrugeren hører dermed bedre i situationer med baggrundsstøj eller lang afstand til taleren.

Mikrofonen skal trådløst tilsluttes SoundGate og kan anvendes med udvalgte Bernafon høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
85419	145645	Bernafon SoundGate Mikrofon	1.200,-

Bernafon Telefonadapter 2

Giver Bernafon høreapparatbrugere trådløs forbindelse til fastnettelefonen.

Bernafons Telefonadapter 2 giver Bernafon høreapparatbrugere trådløs forbindelse til fastnettelefonen.

Høreapparatbrugeren hører lyden fra samtaler i telefonen klart og tydeligt direkte i høreapparatet. Brugeren justerer lydstyrken og besvarer opkald på SoundGate kommunikationsenheden.

Telefonadapter 2 kan anvendes med udvalgte Bernafon høreapparater.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
81898	124396	Bernafon Telefonadapter 2	1.680,-

Relation 2

Kraftig forstærkertelefon med teleslynge, høj lyd kvalitet og lyssignal.



Relation 2 er en kraftig forstærkertelefon specielt designet til mennesker med nedsat hørelse. Relation 2 har ekstra forstærkning, en høj lyd kvalitet og giver en naturlig lyd gengivelse. Ydermere er telefonen udstyret med en kraftig teleslynge og et lyssignal i håndsættet, der blinker, når telefonen ringer.

Relation 2 er meget brugervenlig, bl.a. kan telefonrøret lægges på fra både venstre og højre side af telefonen, og en indbygget magnet sørger for, at telefonrøret "trækkes på plads" automatisk, så brugeren ikke skal bekymre sig om, hvorvidt røret ligger korrekt.

Relation 2 har alle tidssvarende funktioner. Den har bl.a. tonekontrol, så frekvensområdet kan indstilles til brugerens hørelse, et stort display, en indbygget højttaler og mikrofoner, der gør det muligt at føre en håndfri samtale samt mulighed for vis-nummer. Telefonen har fire kviktaster, telefonbog, batteribackup, volumenkontrol og boost-funktion for ekstra forstærkning af volumen mv.

Især høreapparatbrugere vil opleve Relation 2 som en bedre telefon end traditionelle telefoner. Brugere med høreapparat med telespole undgår problemer med feedback og forstyrrende baggrundsstøj.

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
84936	200-03-321-00	Relation 2 inkl. strømforsyning og batterier	930,-	890-88-063-00	Ledning til håndsæt	60,-
		Ekstra tilbehør		890-15-003-00	Pudevibrator	474,-
	890-88-059-00	Strømforsyning	190,-	200-02-804-00	Halsteleslynge	638,-
	890-88-058-00	Håndsæt	235,-	370-40-071-03	Alkaline 1,5 V AA batteri	5,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Ergophone S 510 Phonic Ear

Forstærkertelefon med teleslynge og nødkaldstast.

Ergophone S 510 Phonic Ear er en forstærkertelefon med indbygget teleslynge, store taster og nødkaldsfunktion. Telefonen er enkel at betjene, og de lettilgængelige skydekontakter gør det nemt at justere lyden på telefonrør, højttaler og ringetone.

Teleslyngen eliminerer baggrundsstøj, og gør det muligt for høreapparatbrugere at undgå problemer med feedback (hyl).

Ergophone S 510 Phonic Ear har en integreret nødkaldsfunktion. Aktiveres nødkaldet, ringer telefonen til det indkodede telefonnummer, og højttaleren aktiveres, så det er muligt at føre en samtale uden at have røret løftet.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
101658	200-03-202-00	Ergophone S 510 Phonic Ear	1.575,-	374-88-080-00	Genopladeligt batteri	98,-
				890-88-066-00	Telefonrør	198,-
				890-88-068-00	Spiralledning	98,-
				890-88-067-00	Strømforsyning	128,-

PowerTel 49 plus

Kraftig forstærkertelefon med teleslynge.

PowerTel 49 plus er en kraftig forstærkertelefon med indbygget teleslynge, der er specielt velegnet til personer med nedsat hørelse og syn.

Telefonen er enkel at benytte med stort tastatur, display samt lys i tastatur. Derudover har telefonen nummervisning for op til 32 numre, to programmerbare taster for nødkald eller andre vigtige telefonnumre, ti indirekte hukommelsesnumre samt en +40 dB boost-knap til ekstra forstærkning af lydstyrken.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
64648	200-03-234-00	PowerTel 49 plus	755,-

PowerTel 700

Trådløs forstærkertelefon med indbygget teleslynge.

PowerTel 700 er en trådløs forstærkertelefon med indbygget teleslynge. Telefonen har kraftig lyd og minimal forvrængning. Store knapper gør håndsættet meget enkelt at betjene.

Der er ekstra høj ringevolumen helt op til 90 dB. Der er volumenregulering på håndsættet med forstærkning op til 40 dB. Telefonen har automatisk forstærkning af de høje frekvenser samt nummervisning med hukommelse på op til 30 numre.

Telefonen har op til 10 timers taletid og 100 timers standbytid. Der er en søgefunktion på basen, så man altid kan finde håndsættet.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
72140	200-03-331-00	PowerTel 700	892,-	374-30-330-00	Genopladeligt AAA batteri	40,-

AmpliPOWER 40

Forstærkertelefon med teleslynge, store taster og stort display.

AmpliPOWER 40 er en forstærkertelefon med ekstra kraftig forstærkning og indbygget teleslynge. Teleslyngen sikrer, at høreapparatbrugere undgår problemer med feedback i høreapparatet (hyl), ligesom generende baggrundsstøj udelukkes.

AmpliPOWER 40 har toneregulering, håndfri funktion og meget store taster.

AmpliPOWER 40 er en telefon, der kan bruges af hele familien, men den er samtidig specielt velegnet til svagtseende og personer med nedsat hørelse.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
52355	200-03-030-00	AmpliPOWER 40	638,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

HearIt Mobile

Trådløs halsslynge til mobiltelefoner med Bluetooth®.

HearIt Mobile er en håndfri halsslyngeløsning til forstærkning af samtaler i mobiltelefoner med Bluetooth®. Den kan anvendes med alle høreapparater og cochlearimplantater (CI) med telespole. Alternativt kan en hovedtelefon benyttes.

HearIt Mobile bæres om halsen i halsslyngen og er særdeles velegnet som et håndfrit sæt til mobiltelefonen. Den har op til 14 timers brugstid og 24 timers standbytid.

HearIt Mobile har en god lyd kvalitet og kan indstilles på fem forskellige lydstyrkeniveauer. Den indbyggede mikrofon og den lettilgængelig svarer- og afbrydertast gør løsningen meget brugervenlig.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
50436	200-50-600-00	HearIt Mobile	811,-	890-88-629-00	Hovedtelefon	279,-


CM-BT2

Trådløs halsslynge til mobiltelefoner med Bluetooth®.

CM-BT2 er en håndfri halsslyngeløsning til forstærkning af samtaler i mobiltelefoner med Bluetooth®. Den kan anvendes med alle høreapparater og cochlearimplantater (CI) med telespole. Alternativt kan en hovedtelefon benyttes.

Halsslyngen har en mikrofon og volumenkontrol. Den har op til tre timers brugstid og 120 timers standbytid.

Halsslyngen leveres med ladesæt til stikkontakt, usb og bil.

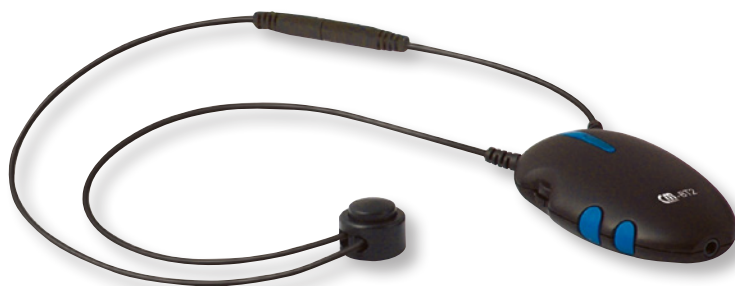

HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
64473	200-50-605-00	CM-BT 2	890,-

iBell2

NYHED

Mobiltelefonsensor, der giver besked, når mobiltelefonen ringer, en sms-besked modtages, vækkeuret ringer mv.

Når brugerens mobiltelefon er placeret i holderen, og mobiltelefonen ringer, eller en sms modtages, reagerer iBell2 via vibrationerne fra mobiltelefonen og begynder at blinke.

iBell2 leveres med batterier og kræver derfor ikke strøm. Brugeren kan således nemt tage iBell2 med sig rundt og placere den forskellige steder i hjemmet.

iBell2 kan med fordel bruges med en pudevibrator (tilbehør), hvilket gør det muligt for brugeren at blive vækket via vibrationer, når mobiltelefonens vækkeur eller mobiltelefonen ringer.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116640	200-01-483-00	iBell2, sort inkl. tre batterier	445,-	370-40-071-00 890-15-003-00	Alkaline 1,5 V AA batteri Pudevibrator	5,- 474,-

Sound Oasis S-680-02

NYHED

Tinnitus masker til mennesker med tinnitus, søvnproblemer eller stress.

Sound Oasis S-680-02 tinnitus masker er et lydterapiapparat, der er velegnet til mennesker med tinnitus, søvnproblemer, stress eller som har brug for afslapning eller maskering af støj. Apparatet giver lydterapi med professionel lyd kvalitet og er intuitivt i brug.

Lydende ligger på et micro SD-kort med 23 lyde. Der er tale om bl.a. naturlyde med regn, bølger, bæk, fuglesang mv. samt 13 lyde i forskellige frekvenser, der er specielt egnet til mennesker med tinnitus.

Husk enten at bestille de to små stereo-højttalere eller SleepPhones. De er ikke standard inkluderet i pakken.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	HMI-nr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116683	098-14-001-00	Sound Oasis S-680-02 med strømforsyning og lydkort	1.295,-	74012 74013	890-52-102-00 890-52-103-00	To små stereo-højttalere SleepPhones	300,- 300,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Crescendo 60

NYHED

Brugervenlig kommunikationsforstærker med telespole, der forstærker tale for mennesker med nedsat hørelse.

Crescendo 60 er en effektiv kommunikationsforstærker. Den er velegnet til mennesker med nedsat hørelse med og uden høreapparat, som har behov for forstærkning ved samtaler, sociale sammenkomster mv.

Det er muligt at justere både volumen og tone. Crescendo 60 har indbygget telespole til aflytning af et teleslyngesystem og er brugervenlig.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
109443	890-52-542-00	Crescendo 60 inkl. hovedtelefoner	1.100,-	200-02-801-00	Halsteleslynge	497,-
				890-88-629-00	Standard hovedtelefon	279,-

Conversor Pro

Trådløs kommunikationsforstærker, der forstærker tale i støj for høreapparatbrugere med telespole.

Conversor Pro er enkel at anvende og anbefales i situationer med høj baggrundsstøj og stor afstand til taleren. Systemet består af en trådløs kombineret mikrofon og sender samt en trådløs modtager med halsslynge.

Mikrofonen holdes i hånden eller placeres, så den rettes mod taleren. Modtageren overfører lyden direkte til høreapparatet.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
50016	200-02-055-00	Conversor Pro	4.495,-	374-88-110-00	Genopladeligt batteri	210,-

Oticon Amigo

Brugervenligt FM-system, der med fordel kan anvendes til kommunikation i situationer med støj og stor afstand til taleren.



Amigo T31 og T30

Amigo T31 senderen er designet til brug i klasseværelser. Lærere, tilpassere og hørepædagoger får med Amigo T31 et nemt og pålideligt system, hvor både programmering og tilpasning er enkelt. Med den indbyggede FM Kanal-Wizard er kanalerne nemme at styre og med flere mikrofonoptioner og måder at bære den på, er Amigo T31 en meget brugervenlig løsning. Amigo T31 giver mulighed for Team Teaching, og der kan tilkobles elevmikrofoner.

Amigo T30 er den samme sender som T31, bare uden Team Teaching funktion.



Amigo R2

Amigo R2 universalmodtageren med flere kanaler kan nemt tilsluttes til høreapparatet via en FM-audiosko. Af funktioner kan bl.a. nævnes det unikke, indbyggede LED-lys, trådløs synkronisering og kanalsøger.



Amigo R12

Amigo R12 er en FM-modtager med flere kanaler. R12 er verdens første ear-level modtager til Oticon høreapparater med batteristørrelse 312. R12 tilsluttes høreapparaterne via en børnesikret batteriskuffe. Ellers samme egenskaber som R2.



Amigo R12G2

Amigo R12G2 er en dedikeret FM-modtager med flere kanaler, som tilsluttes høreapparaterne via en børnesikret batteriskuffe. Amigo R12G2 kan tilsluttes alle BTE PP-høreapparater fra Oticon.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
45166	100949	Amigo T31	6.895,-
45167	100950	Amigo T30	6.095,-
45164	140-06-200-00	Amigo R2	4.395,-
53436	140-07-000-00*	Amigo R12	5.195,-
117421	188313**	Amigo R12G2	5.195,-

*Fås i 13 farver **Fås i 14 farver Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.



Amigo Star

Amigo Star er en Amigo FM-modtager, der via en lille forstærkning forbedrer signal-støj-forholdet for børn. Amigo Star FM-modtageren gør det nemmere at forstå tale, som sendes trådløst fra en FM-sender. Amigo Star kan programmeres individuelt, og funktioner kan låses. Amigo Star er specielt velegnet til børn med APD, ADHD mv.




Amigo Arc

Sammen med Amigo Arc halsslyngemodtageren får brugeren en bærbar og fleksibel FM-løsning. Arc halsslyngemodtageren kan anvendes sammen med alle høreapparater eller cochlearimplantater (CI) med telespole. Et AUX-stik giver mulighed for tilslutning af hovedtelefoner eller eksternt audioudstyr, såsom mp3-afspiller eller lignende. Amigo Arc leveres med skaller i fem forskellige farver, som let kan udskiftes.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
78042	118016***	Amigo Star	4.595,-
53440	140-07-410-00	Amigo Arc	4.595,-

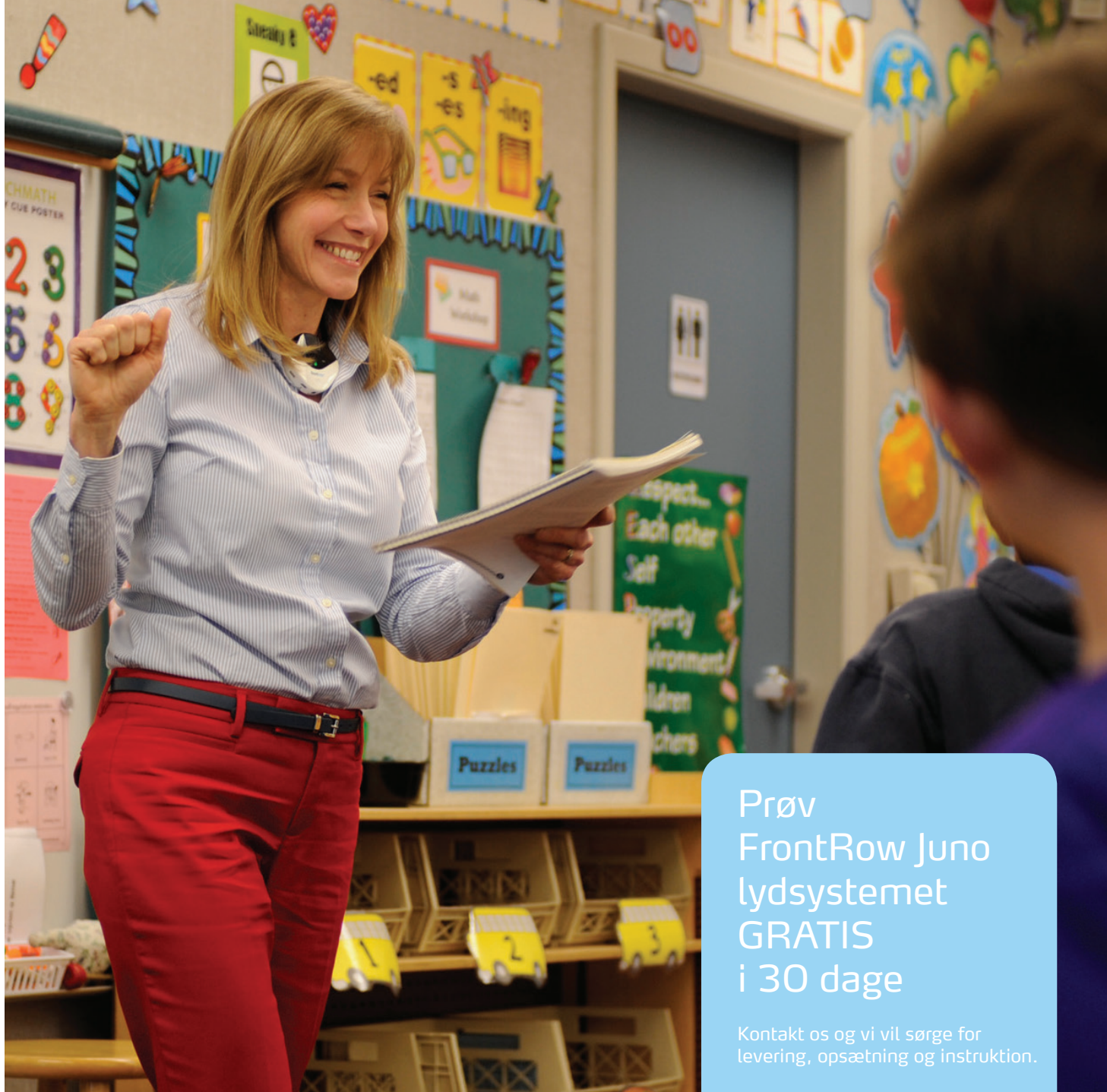

Prøv
FrontRow Juno
lydsystemet
GRATIS
i 30 dage

Kontakt os og vi vil sørge for
levering, opsætning og instruktion.

Sound field lydsystemer

Sound field lydsystemer er specielt udviklede til tale og forbedrer lyd- og læringsmiljøet for alle i klassen. Sound field lydsystemer forstærker lærerens stemme en smule over baggrundstøjen i klasseværelset og fordeler stemmen jævnt i klasseværelset. Elever i den bagerste del af klasseværelset hører således læreren og de øvrige elever lige så godt som elever i den forreste del af klasseværelset. Dermed får alle elever de rette betingelser for at høre, hvad der bliver sagt, og lærerens stemme skånes. Sound field lydsystemer kan tilsluttes elevers FM-systemer samt eksisterende multimedieudstyr såsom pc, tv og dvd.



frontrow™
your school. connected.

FrontRow Juno

Avanceret og brugervenligt sound field lydsystem.



FrontRow Juno er et avanceret lydsystem til klasseværelser og er samtidigt meget enkelt at betjene gennem den intuitive touchscreen. FrontRow Juno har meget høj digital lyd kvalitet. Lærermikrofonen er behagelig at benytte, og alle funktioner kan betjenes via én knap. Systemet kræver ingen afbryder, idet det selv slukker, hvis det ikke benyttes. Op til 5 mikrofoner kan benyttes samtidigt, og lærermikrofon kan opsættes til at have førsteprioritet. Ved enkel opkobling til pc, er det muligt at optage sekvenser af undervisningen, der via skolens intranet kan distribueres til eleverne. Denne funktion hjælper i undervisningen til lektiehjælp ved fx fravær hos elever. FrontRow Juno er ideel til at streame/podcaste lyden fra pc eller lignende, således at alle elever kan høre. Det er samtidigt muligt at kommentere på indholdet via mikrofonerne.



HMI-nr.	Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.	Ordrenr.	Ekstra tilbehør	Kr.
116890	890-52-125-00	Juno Tower inkl. lærermikrofon	10.800,-	202-05-102-00	Ladestation til 2 mikrofoner	695,-
	Ekstra tilbehør			890-52-481-00	Ekspansionsmodul	850,-
	202-05-103-00	Lærermikrofon	2.050,-	374-88-060-00	Batteri til mikrofon	220,-
	202-05-101-00	Elevmikrofon	2.050,-	890-52-101-00	Vægophæng	500,-
				872-03-000-00	Software licens	995,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Installationspriser og diverse ydelser

Alle priser består af grundtaksten for kørsel plus det beløb, der hører til hvert enkelt produkt/ydelse.



Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
2 604 000 002	Grundtakst for kørsel	575,-
2 604 230 001	1 stk. Loop Pro	715,-
2 604 230 100	1 stk. Link Pro	355,-
4106	1 stk. Flex 5000 eller SET 860	355,-
4124	1 stk. Earis PR	355,-
4127	1 stk. tv-adapter eller telefonadapter	355,-
2 600 001 002	1-3 stk. Detect Pro, Detect Door Pro, Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, Repeater Pro eller Puzzle to Puzzle Pro	355,-
2 600 001 007	Efterfølgende 1 stk. Detect Pro, Detect Door Pro, Call Pro, Flash Pro, Wake Pro, Repeater Pro eller Puzzle to Puzzle Pro	186,-
4117	1 stk. Signolux produkt	186,-
4105	1 stk. forstærkertelefon installation og introduktion	355,-
4118	1 stk. tilslutning af tv/radio	355,-
4107	1 stk. tilslutning af porttelefon	355,-
4112	1 stk. udlægning af ekstra teleslynge	355,-
4100	Forgæves kørsel ved fx fejl i adresse	575,-

Ordrenr.	Beskrivelse	Kr.
4103	Grundtakst for kørsel ved reparation	575,-
4104	Reparation af anlæg	355,-
2 600 000 100	Nedtagning af anlæg	575,-
4101	Installation af andet tilbehør	355,-
40	Forsendelsesomkostninger	80,-

Samtlige priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Genopsætningspriser

Phonic Ear genopsætter produkter, der er under 5 år gamle.



Phonic Ear tilbyder en genopsætningsservice, der inkluderer:

- ▄▄▄ styring af kommunens lager af genbrugsegnete hørehjælpemidler
- ▄▄▄ eftersyn og rengøring af vores høretekniske hjælpemidler
- ▄▄▄ reparation, hvis dette er nødvendigt
- ▄▄▄ kørsel til brugeren
- ▄▄▄ installation

Alle genopsætningspriser består af grundtaksten for kørsel plus det beløb, der hører til hvert enkelt produkt.

Beskrivelse og priser

Genopsætningspriserne er identiske med installationspriserne på side 38

Fakta om teleslynger og høreapparater med telespole



Høreapparater og hørehjælpemidler

På trods af den store teknologiske udvikling kan høreapparater ikke genskabe den naturlige hørelse for mennesker med nedsat hørelse. Høreapparatbrugere kan således have store udfordringer med at skelne lyd og tale. Mange af disse udfordringer kan løses med en telespole i høreapparatet og hørehjælpemidlerne i dette katalog herunder bl.a. teleslynagesystemerne og -løsningerne.

Høreapparater med telespole giver flere fordele

Personer med nedsat hørelse, der skal anskaffe eller udskifte sit høreapparat kan med fordel vælge et høreapparat med telespole (program T). Har man et høreapparat med telespole, har man mulighed for trådløst at modtage og høre lyd via de mange hørehjælpemidler, der anvender teleslyngeteknologien til at overføre lyd. Som eksempler på disse kan nævnes teleslynagesystemer til tv og musikanlæg, halsslynge-løsninger til mobiltelefon og teleslynagesystemer i kirker, teatre, biografer, konferencecentre mv.

Sammenhængen mellem teleslynge og telespole

Et teleslynagesystem består typisk af en teleslynge (-ledning) og en forstærker. Teleslyngen sender lyden fra fx tv, musikanlæg eller en tilkøbt mikrofon som en strøm rundt i teleslyngen og danner derved et magnetfelt. Telespolen i høreapparatet fungerer som en trådløs modtager, der opfanger de magnetiske signaler fra teleslyngen og omdanner dem til lyd. Lyden fra teleslynagesystemet forstærkes og høres derved direkte i høreapparatet uden forstyrrende baggrundsstøj.

Sådan fungerer telespolen i høreapparatet

Et høreapparat uden telespole fungerer kort sagt som en mikrofon, der opfanger og forstærker alle akustiske lyde i lokalet. Høreapparater med telespole har flere lytteprogrammer. Der kan typisk vælges mellem program M (mikrofon), program T (telespole) og program MT (mikrofon plus telespole). På program M forstærkes og høres alle akustiske lyde i lokalet, som med et høreapparat uden telespole. For at modtage det magnetiske signal og høre lyden fra teleslyngen skal høreapparatet indstilles på program T eller program MT. På program T forstærkes og høres kun lyden fra teleslyngen.

Linkx kommunikationssystem

“ Vi er overbeviste om, at anlægget kan bruges i mange sammenhænge. Til møder/foredrag, kommunens årlige busture for pensionister og måske på plejecentrene, hvor anlægget kan være med til at aktivere beboerne.

Grete Boisen,
formand for Høreforeningen Gentofte



Kommunikationssystem forbedrer oplevelsen for hørehæmmede

Et kommunikationssystem gør det nemmere for alle - men især for mennesker med høretab - at høre, hvad der bliver sagt fx til kulturelle arrangementer, foredrag og på diverse turer.

Kommunikationssystemet består af en sender med en clipsmikrofon og en modtager med en et-øres hovedtelefon eller halsteleslynge - alt afhængig af, om man er høreapparatbruger eller ej. Høreapparatbrugere med telespole i høreapparatet kan få lyden direkte i høreapparaterne via en halsteleslynge.

Med kommunikationssystemet får alle den fulde oplevelse ved ikke at blive begrænset af baggrundsstøj, rummets akustik eller lang afstand til taleren.

Kontakt os for at få en pris på et kommunikationssystem, der passer til jeres behov.

Priseksempel på kommunikationssystem

Kommunikationssystemet skræddersys efter kundens behov. Dette er blot et eksempel på en løsning:

- 1 ladekuffert til 12 enheder
- 1 sender med clipsmikrofon
- 1 hovedmikrofon
- 11 modtagere med hovedtelefon
- 6 halsteleslynger
- 12 halssnøre

Pris i alt: 14.965,-
ekskl. moms.





Et dansk selskab i en stor koncern

Phonic Ear A/S er et danskejet selskab i Demant Group. Koncernen har over 110 års erfaring inden for høre- og lydområdet og består af en række internationalt orienterede virksomheder, herunder Oticon A/S, der er et af verdens førende firmaer inden for høreapparatbranchen.

Phonic Ears opgave er at tilbyde løsninger, der bedst muligt tilgodeser og støtter den menneskelige hørelse.

Phonic Ear leverer **hørehjælpemidler**, der typisk anvendes af hørehæmmede i hjemmet, på arbejdet eller i skolen, herunder alarmsystemer, tv-løsninger, vibratorer, forstærkertelefoner m.m. og kan dække alle daglige behov for alarmering, underholdning og kommunikation.

Phonic Ear leverer også **sound field lydsystemer**, der forbedrer lyd- og læringsmiljøet for såvel lærere som elever i undervisningen samt **kommunikations-systemer** til høreforeninger, biblioteker mv.

**Stor viden og knowhow**

Med mere end 110 års erfaring inden for høre- og lydområdet har vi oparbejdet en stor viden og knowhow inden for hørehjælpemidler. Det gør os i stand til at kunne tilbyde brugervenlige løsninger af højeste kvalitet.

**Fleksibilitet & pålidelighed**

Vi står i spidsen med den nyeste teknologi inden for vores område. Det sikrer brugerne de mest fleksible, pålidelige og fremtidssikre løsninger. Vores CE-mærkede produkter kan kombineres og udbygges efter behov.

**Landsdækkende installatørnet og serviceteam**

Vores landsdækkende installatørnet samt teknikere står klar til at servicere telefonisk, elektronisk samt personligt efter aftale.

**Genopsætningsservice**

Kommuner tilbydes en genopsætningsservice, der omfatter afhentning af udstyr, funktionstest, evt. reparation, opbevaring på depot og genopsætning af genbrugsegne høre- og lydomidler, der er under 5 år gamle.

**2 års garanti**

Vi giver 2 års garanti på nye produkter.

**Tryksgaranti**

Kommuner har 30 dages fuld returret, medmindre der kan anvises en anden tilfredsstillende løsning til afhjælpning af brugerens behov.

**Miljøbevidsthed**

Vi anvender miljøvenlige materialer til fremstilling af produkter, emballage og tryksager og tager således bedst muligt hensyn til miljøet.

**Hotline**

Har du problemer, eller ønsker du et godt råd, kan du ringe mandag til torsdag fra klokken 8.30-16.30 og fredag fra klokken 8.30-15.30.

**Webshop og servicecenter til professionelle**

På vores webshop og servicecenter www.order2day.dk kan kommuner og forhandlere bestille varer og få adgang til nyttig information og løsningsforslag.

**Webshop til slutbrugere**

På vores webshop www.order2day.com kan slutbrugere bestille hørehjælpemidler via egenbetaling.

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.:
3917 7101

E-mail:
mail@phonicear.dk

Web:
www.phonicear.dk

Professional webshop:
www.order2day.dk

Slutbruger webshop:
www.order2day.com