

Benforankret høresystem


Ponto 4

Open Sound. Open Life



Made for

iPhone | iPad | iPod

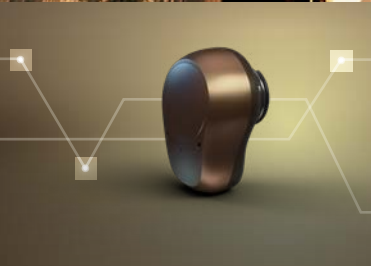

oticon
MEDICAL

Slut dig til den åbne lydrevolution og en fremtid med tilslutningsmuligheder



Platformen Velox S™
– hastighed og kraft




OpenSound Navigator™
– 360° lyd



Et paradigmeskift inden for benforankret høreelse

Høreapparatbrugere i hele verden har allerede fået deres liv forandret af den banebrydende teknologi i Oticon Opn™ og Oticon Opn S™. For første gang nogensinde er dette muligt for brugere af benforankrede høreapparater. Denne unikke teknologi giver konstant adgang til 360° lyd og lader din hjerne beslutte, hvad den vil fokusere på. Resultatet er et komplet og åbent lydbillede.

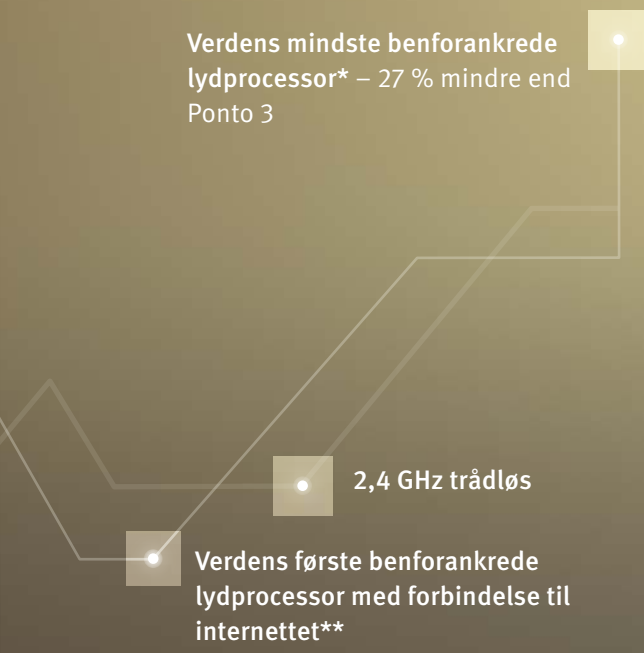

Verdens mindste benforankrede
lydprocessor* – 27 % mindre end
Ponto 3

2,4 GHz trådløs

Verdens første benforankrede
lydprocessor med forbindelse til
internettet**

Utroligt lille

Ponto 4 er den mindste benforankrede enhed på markedet for diskretion og pålidelig ydelse.

Og helt trådløs

Ponto 4 kan tilsluttes alle dine foretrukne, elektroniske enheder, og med Oticon ON App og IFTTT-netværket kan den også tilsluttes enhver enhed med forbindelse til internettet som fx husholdningsapparater, e-mailprogrammer med flere.

**Data arkiveret hos Oticon Medical*

*** Med Oticon ON App og IFTTT-netværk*




Oplev åben lyd med Ponto 4


Vi introducerer den revolutionerende OpenSound Navigator™

Med Ponto 4 er almindelige lydprocesseringsstrategier en saga blot. Den unikke banebrydende chip i Ponto 4 behandler lyd 50 gange hurtigere* og giver konstant adgang til lyd hele vejen rundt - 360°.

I dette mere komplette og åbne lydbillede bestemmer du, hvilke lyde, du vil fokusere på, selv i støjende omgivelser.


**Sammenlignet med platformen Inium Sense*

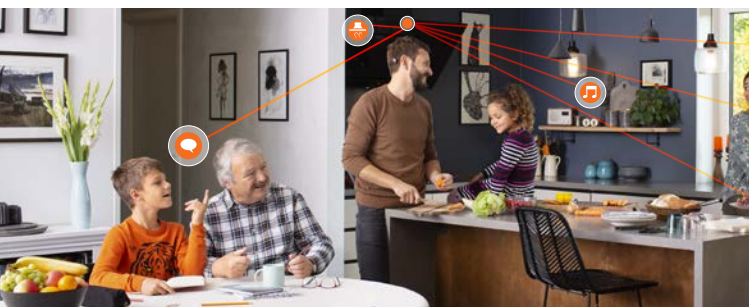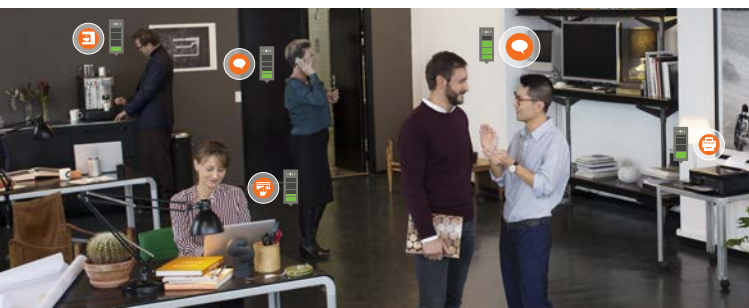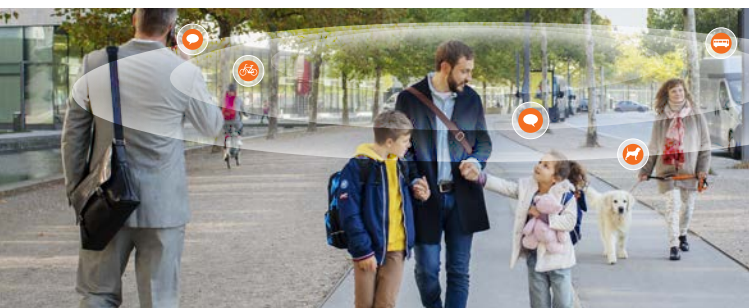

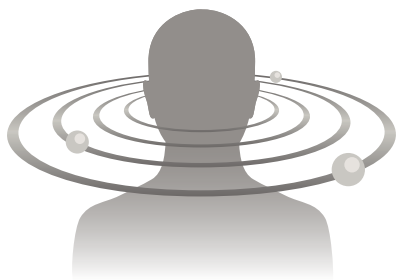


OpenSound Navigator

– 3 trin på et splitsekund

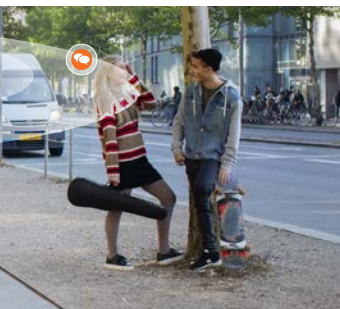


1: Analyse

Scanner lydmiljøet hele vejen rundt, 360°, mere end 100 gange pr. sekund for at identificere og separere støj fra tale.

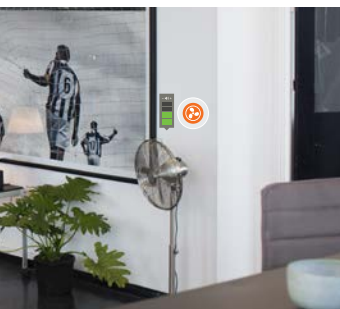

2: Balance

Dæmper hurtigt kraftig støj, der kommer fra specifikke retninger, samtidig med at tale bevares.

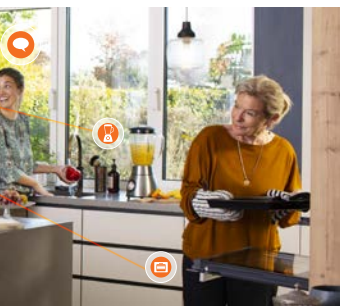

3: Fjernelse af støj

Fjerner hurtigt resterende diffus støj, selv mellem de enkelte ord.

Verdens første fuldt tilsluttede benforankrede lydprocessor



Fuldt tilsluttet

Ponto 4 er mere end en lydprocessor. Den er et stykke teknologi, der kan tilsluttes dine foretrukne enheder.

Den bruger 2,4 GHz teknologi og er også verdens første benforankrede lydprocessor med forbindelse til internettet.*

Og der er mere. Chippen i Ponto 4 er klargjort til hurtige forandringer i teknologien inden for høreøsninger, så du også i fremtiden kan blive ved med at være tilsluttet.

* Med Oticon ON App og IFTTT netværket



Forbindelse til IFTTT og IoT

Via en unik Oticon cloud-løsning kan Ponto 4 og Oticon ON App oprette forbindelse til alle andre internetaktiverede enheder og tjenester.

Fx:

- Få en stemmealarm, når nogen ringer på dørklokken
- Få en sms, når batteriniveauet er lavt
- Skift til hjemmeprogrammet, når du går ind ad hoveddøren

Gå ind på oticon.dk/connectivity for at udforske en verden af muligheder.

Trådløs tilslutning til din telefon og dine foretrukne enheder



Made for iPhone

Ponto 4 tilsluttes direkte til din iPhone® så du kan tale i telefon og høre samtalen i din lydprocessor. Du kan også streame musik direkte fra din telefon uden at behøve en ekstra enhed.

Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Betjen din Ponto 4 med Oticon ON App

Oticon ON App lader dig justere lydstyrken, skifte program, bruge funktionen “Find mine høreapparater”, tilgå IoT og meget andet på en diskret måde.

Hent appen gratis på App Store® og Google Play™.



Find information om kompatibilitet på:
www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

Trådløst tilbehør

Brug din Ponto 4 i endnu flere situationer:

- **ConnectClip** – Brug din Ponto 4 som et håndfrit headset med alle moderne smartphones
- **TV Adapter 3.0** – Lyt til TV eller musik via din Ponto 4
- **Remote Control 3.0** – Juster lydstyrken og skift program



ConnectClip



Remote Control 3.0



TV Adapter 3.0

Verdens mindste benforankrede lydprocessor

Afprøvet og testet og helt parat til dagligdagen

Ponto 4 følger de velkendte standarder for Ponto-kvalitet i den mindste størrelse hidtil. Den er grundigt testet til at efterleve høje standarder for slidstyrke og pålidelighed som bl.a. den krævende IP 57-klasse for vand- og støvindtrængning.





Egenskaber:

- LED-indikator
- Børnesikret batteriskuffe
- Robust metalfjederkobling
- Covers og klistermærker for en personlig løsning



Chroma Beige
C090



Terracotta
C094



Chestnut Brown
C093



For at finde ud af hvad Ponto 4 kan gøre for dig, skal du tale med din hørespecialist i dag eller læs mere på www.oticonmedical.dk



Steel Grey
C092



Diamond Black
C063



Silver
C044

Ponto 4 tilpasset til dig


Klistermærker og covers

Vælg en farve, der matcher dit hår eller får din personlighed tydeligere frem ved at gøre din Ponto 4 mere individuel med et udvalg af covers og klistermærker.



Cover-farver

Skala 1:1

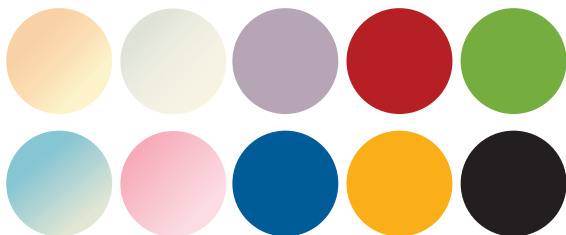

Klistermærker




Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare høreøsninger. Vi gør en stor indsats for at bringe den magiske verden af lyd ud til alle mennesker, uanset hvor i livet de befinder sig. Som en del af Demant-koncernen, der er førende globalt inden for hørehjælpemidler med 14.500 medarbejdere i mere end 130 lande, har vi adgang til en af verdens stærkeste, forsknings- og udviklings-teams, de seneste teknologiske fremskridt og indsigt i høreomsorg.

Vores kompetencer består af mere end hundrede års innovationer inden for lydgenivelse og årtiers banebrydende erfaring inden for høreimplantatteknologi. Vi arbejder sammen med patienter, kirurger og audiologer på at sikre, at hver eneste af vores løsninger designes med brugerens behov i fokus. Vores ubetingede engagement er med til at skabe innovative løsninger og support, der fremmer livskvaliteten for mennesker, uanset hvorhen livet fører dem. Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

206181DK / 2019.05