

Fiche technique

Oticon SmartCharger miniBTE R

Le SmartCharger est conçu pour être facile à utiliser, à la maison et en déplacement. Le couvercle du chargeur sert à protéger et ranger les aides auditives et la batterie lithium-ion intégrée et rechargeable permet d'utiliser le SmartCharger comme une batterie externe, lorsqu'aucune alimentation électrique n'est disponible.

Charge

- Retirez les aides auditives et placez-les dans le chargeur.
- Les aides auditives débutent automatiquement le chargement lorsqu'elles sont placées dans le chargeur et elles s'allument automatiquement lorsqu'elles sont retirées du chargeur.
- Rechargez les aides auditives chaque nuit et elles seront complètement chargées lorsque vous en aurez besoin au cours de la journée.

Facile à interpréter

Un voyant lumineux (LED) sur l'aide auditive permet à l'utilisateur d'interpréter facilement l'état de charge :

- Orange = Charge en cours
- Vert = Charge complète

Câble USB

Insérer dans la prise murale



Ports de charge

Pour les aides auditives lors de la charge

* La prise d'alimentation électrique varie d'un pays à l'autre

Temps de chargement courts

Si les aides auditives sont complètement déchargées, les temps de charge normaux sont :

- 3,5 h = Entièrement chargée
- 1 h = Chargée à 40%
- 0,5 h = Chargée à 20%

Caractéristiques du produit

- Charge par induction
- Voyant lumineux LED pour le chargement et l'état du niveau de batterie
- Connexion magnétique - les aides auditives restent en place dans les ports de charge
- Câble d'alimentation amovible
- Pieds en caoutchouc pour une grande stabilité
- Des lignes douces et arrondies - facile à nettoyer



Prise d'alimentation électrique*



Indicateur de batterie

Affiche l'état de charge de la batterie externe/le niveau de batterie de la batterie externe




Le SmartCharger est conçu pour charger le style miniBTE R à la maison en étant connecté à une source d'alimentation ou en déplacement à l'aide de la batterie lithium-ion rechargeable en tant que batterie externe.

Conçu pour le style
miniBTE R
Oticon Real™
Oticon More™
Oticon Play PX



Données techniques : Chargeur	
Nom	Oticon SmartCharger miniBTE R
Conçu pour/Compatible avec	Oticon Real™, Oticon More™, Oticon Play PX : miniBTE R
Dimensions	Hauteur 76,4 mm / Largeur 47,2 mm / Longueur 95 mm
Poids	180 g
Couleur	Noir avec plaque supérieure grise
Prise d'alimentation électrique	USB A
Voyant d'état	Voyant LED sur le chargeur lorsqu'il est branché à une source d'alimentation : Indique l'état de charge de la batterie externe. Voyant LED sur le chargeur lorsqu'il est déconnecté d'une source d'alimentation : Indique le niveau de batterie de la batterie externe. Voyant LED des aides auditives lors du chargement : Indique le mode de charge
Temps de charge des aides auditives	3,5 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +10 °C à +35 °C (+50 °F à +95 °F) 5 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +5 °C à +10 °C (+41 °F à +50 °F) et +35 °C à +38 °C (+95 °F à +100 °F)
Temps de charge de la batterie externe	4 heures max. selon l'état initial de la pile Température : +10 °C à +35 °C (+50 °F à +95 °F)
Source d'alimentation	Unité d'alimentation électrique fournie
Tension d'entrée	5 V DC
Courant d'entrée	Max 1A
Câble	Câble amovible, longueur 150 cm
Connexion à un équipement externe	Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.
Conditions d'utilisation	
Conditions de fonctionnement	Température : +5 °C à +38 °C (+40 °F à +100 °F) Humidité : 5% - 93 % humidité relative, sans condensation
Conditions de stockage et de transport	Température : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140 °F) Humidité : 5% - 93 % humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique	700 hPa à 1 060 hPa
Données techniques : Unité d'alimentation électrique	
Tension d'entrée	100 -240 V AC
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	5 V DC
Courant de sortie	1 A

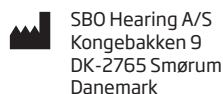

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

Siège
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3
du code de la consommation.
Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE