


L'alliance de la
puissance et de
l'élégance



BTE Plus Power 105

Le plus petit BTE 13 au monde avec un MPO de 138 dB SPL

Lorsque la puissance rencontre l'excellence

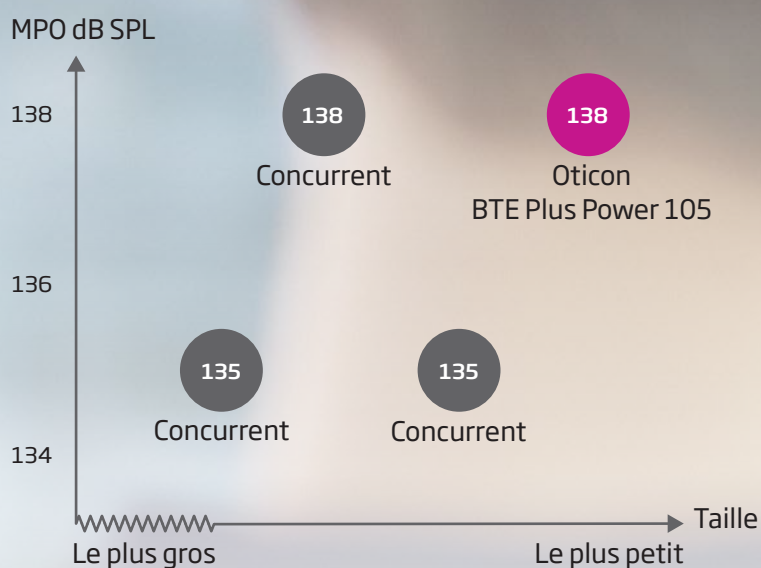

BTE Plus Power 105 est le plus petit appareil au monde avec un MPO de 138 dB SPL.


Découvrez le nouveau BTE Plus Power 105 d'Oticon pour - enfin ! - offrir à vos clients un appareil qui allie un son pur et net, riche en détails, bénéficiant de l'approche BrainHearing, pour apporter une expérience d'écoute incomparable...
Le tout dans le plus petit appareil au monde proposant un MPO de 138 dB SPL !

L'expérience sonore Inium Sense

Le BTE Plus Power 105 est un appareil incroyablement petit, mais très puissant qui offrira un son hors-norme à vos clients. Avec son nouvel écouteur 105 et 30 % de puissance de traitement en plus grâce au processeur Inium Sense, le BTE Plus Power 105 permet de fournir un niveau de sortie qui n'a rien à envier aux ultra Power.

Toute la puissance de BrainHearing™ révélée

Vos clients «Plus Power» bénéficieront enfin des avantages de la technologie BrainHearing ! En soutenant la façon dont le cerveau interprète les sons, le BTE Plus Power 105 offrira à vos clients une puissance et une qualité de son incomparable et améliorera grandement leur capacité à engager la conversation avec leur famille et leurs amis.

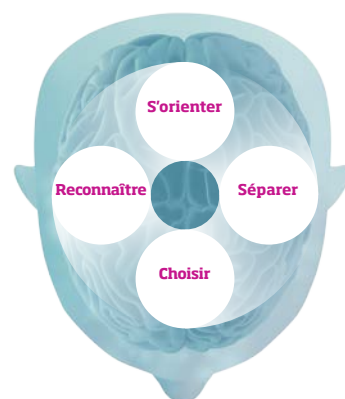

Pour en savoir plus sur l'approche BrainHearing d'Oticon, nous vous invitons à consulter www.myoticon.ch



Zoom sur les technologies phares d'Inium Sense

Speech Guard E

Combine les avantages des compressions lentes et des compressions rapides. Vos utilisateurs atteints d'une perte auditive sévère à profonde ont besoin d'une amplification la plus linéaire possible, tout en profitant des avantages de la compression rapide. Speech Guard E préserve les indices importants de la parole et minimise les baisses d'amplification dues aux sons forts soudains.

Soft Speech Booster

Cette nouvelle technologie améliore jusqu'à 20% la compréhension des voix faibles, ce qui permet à un utilisateur d'entendre les sons faibles présents dans 75% des conversations à voix normale ! Or, ces sons faibles sont particulièrement importants pour un utilisateur atteint d'une perte auditive sévère à profonde.

Extension de la bande passante

Étendre la bande passante jusqu'à 10 kHz permet aux malentendants atteints d'une perte auditive sévère à profonde d'utiliser totalement leur audition résiduelle. Fournir une image sonore complète contribue à la formidable qualité sonore du BTE Plus Power 105.

Feedback shield Inium Sense

Cette nouvelle génération d'anti Larsen vous permet de fournir suffisamment de gain sans compromettre la qualité sonore.



Incroyablement petit
pour sa puissance

Moderne, élégant, discret

Bouton poussoir
ergonomique

Dites adieu aux compromis

Les clients à la recherche d'une solution discrète étaient jusqu'à présent obligés de faire un compromis sur la puissance, la qualité sonore ou la performance. Désormais, grâce au BTE Plus Power 105, vous pouvez leur offrir une solution qui allie tous ces avantages.

Une puissance tout en douceur

Permettre à vos clients dont la perte auditive évolue, de continuer à utiliser les mêmes technologies de traitement de signal qui ont fait le succès de leur appareillage jusqu'à présent, tout en leur proposant **plus** de puissance et une **discrétion équivalente**, est la garantie d'un nouvel appareillage plus rapidement accepté et satisfaisant.



Taille réelle
BTE Plus Power 105

Lorsque **la puissance** rencontre **l'élégance**

Écouteur surpuissant
(MPO : 138 dB SPL /
Gain max : 72 dB SPL)

Fiable, nano revêtement
Résistant à l'eau (IP58)

La puissance de l'émotion

La philosophie Oticon et les technologies embarquées ont le double objectif d'optimiser la performance en répondant aux capacités cognitives résiduelles et de respecter le caractère émotionnel de la perception sonore, en prenant en compte les préférences et les goûts sonores de chacun. L'association des technologies BrainHearing et du processus d'adaptation personnalisé d'Inium Sense vous garantiront une satisfaction maximale.



Lorsque la **puissance** se connecte au **monde**



Téléphoner, écouter de la musique, regarder la télévision, quoi de plus naturel pour tout un chacun ?... Pourtant, à la moindre dégradation de l'audition, ces moments de vie sont les premiers impactés. Et plus la perte auditive évolue, plus la complexité devient dramatique... Quand une personne est atteinte de surdité sévère, cela ne devient pas seulement difficile, mais quasiment impossible de vivre sereinement ces moments. Un utilisateur d'un appareillage Plus Power a donc, plus que tout autre utilisateur, un besoin crucial de recréer un accès aux sources sonores multimédias qui l'entourent. C'est pourquoi une solution complète incluant le Streamer Pro et ses modules de connectivité **devrait lui être proposé systématiquement**, pour lui permettre d'atteindre un niveau de satisfaction à la hauteur de ses attentes ! Grâce à la gamme ConnectLine, vous avez à votre disposition des solutions pour tous ses besoins (télévision, téléphone, microphone, ordinateur, bureau...), sans oublier des applications pour lui permettre de piloter ses aides auditives en toute discrétion.

Une famille ultra «Performance»

Le BTE Plus Power 105 complète la gamme Performance d'Oticon et est disponible dans tous les niveaux de gamme.



<p>Speech Guard E</p> <p>Capture et préserve les détails les plus fins et les caractéristiques naturelles de la parole</p>	•		
<p>Gestion spatiale du bruit</p> <p>Permet aux deux oreilles de travailler avec le cerveau en temps réel pour se concentrer sur ce qui est important</p>	•		
<p>DVO+ avec Soft Speech Booster</p> <p>Améliore la compréhension des conversations à voix basse, en fonction des préférences de chacun</p>	•	•	
<p>YouMatic</p> <p>Répond aux besoins auditifs uniques et aux préférences sonores personnelles dans des environnements d'écoute changeants</p>	Premium	Avancé	Essentiel
<p>Free Focus</p> <p>Soutient la capacité du cerveau à se concentrer et donne la priorité à la parole par rapport au bruit de fond par le biais de divers degrés de directivité</p>	Premium	Avancé	Essentiel
<p>Feedback shield Inium Sense</p> <p>Réduit considérablement les sifflements sans compromettre la qualité sonore ni le confort</p>	•	•	•
<p>Tinnitus SoundSupport™</p> <p>Solution anti-acouphènes complète</p>	•	•	•
	Alta2	Nera2	Ria2

People First

People First est notre promesse pour rendre à chacun: la liberté de communiquer sans contrainte, d'interagir naturellement et de participer activement