

MAICO Audiometer MA 25

Schnelle Hörtests - mobil, flexibel und unabhängig

Schlankes und kompaktes Design

Das superleichte MA 25 wiegt nur 980 Gramm. Klein genug, um es in der Hand zu halten! In der Tragetasche verstaut, ist das MA 25 eines unserer kleinsten und leichtesten tragbaren Geräte.

Präzise und zuverlässige Technik

Da das MA 25 ein tragbares Gerät ist, ist es robust und zuverlässig konstruiert. Nehmen Sie das MA 25 guten Gewissens überall hin mit. Mit den ergonomischen Knöpfen können die Frequenzen und Hörpegel leicht und bequem angepasst werden!

Umfassende Testoptionen

Das MA 25 bietet eine umfassende Palette an Tests. Der Frequenzbereich reicht von 125 Hz bis 8000 Hz und die Signalintensität von -10 dB HL bis 100 dB HL. Dauerton, Puls-ton, Wobbelton und pulsierender Wobbelton runden den Funktionsumfang ab.

Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das MA 25e mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions, für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Audiogramme.

MA 25 auf einen Blick

- Luftleitungsaudiometer
- 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz
- Pegelbereich von -10 dB HV bis 100 dB HV
- Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierender Wobbelton
- Handlich und außergewöhnlich leicht, nur 980 g Gewicht
- Kann mit 3 Standard-AA-Batterien, mit einem Netzteil oder via USB Kabel vom PC betrieben werden
- MA 25e-Version inklusive automatischem Hughson-Westlake-Test, Untersuchermikrofon und MAICO Sessions PC-Software zur einfachen Datenverwaltung mit der OtoAccess® oder Noah Patientendatenbank
- Optionale Tragetasche



Technische Daten

MA 25 SPEZIFIKATIONEN

Testsignale	Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierender Wobbelton
Testfrequenzen	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pegelstufen	5 dB oder 1 dB
Pegelbereich Luftleitung	-10 dB HV bis 100 dB HV

GERÄT ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g inklusive Standardzubehör
Stromversorgung	3 AA-Batterien oder optionales Netzteil (100-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 0,6 A)
Display	38,1 mm x 50,8 mm, monochrome
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch

STANDARDS

Sicherheit	IEC 60601-1:2012 AAMI ES60601-1:2005+A2+A1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 Typ B Anwendungsteile
EMC	IEC 60601-1-2:2014
CE0123	 Klasse IIa gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
Audiometer-Klasse	IEC 60645-1:2017 Typ 4 ANSI/ASA S3.6-2018 Typ 4

STANDARDZUBEHÖR

- LL-Kopfhörer DD45
- 3 AA-Batterien
- Audiogramm-Block

OPTIONALER WANDLER

- LL-Kopfhörer DD65 v2 mit Schallschutzkappen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Patientenantworttaste
- Tragetasche
- Netzteil

MA 25E VERSION


Spezialtests	automatischer Hughson-Westlake-Test
Zusätzliches Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Patientenantworttaste • USB-Kabel
Software	MAICO Sessions PC-Software
Optionale Software	<ul style="list-style-type: none"> • OtoAccess® Datenbank • OtoAccess® Worklist HL7 (OtoAccess® Datenbank Add-on) • Noah Datenbank

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard Zubehör



MA 25 Gerät

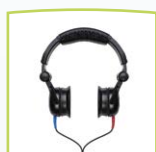

LL-Kopfhörer
DD45



Audiogramm-
Block

Optionales Zubehör/ Software



LL-Kopfhörer
DD65 v2



Patienten-
antworttaste




Tragetasche



MAICO Sessions
PC-Software



OtoAccess®
Datenbank

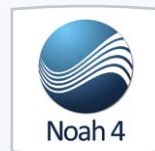

Noah
Datenbank

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Deutschland
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50 · Fax: +49 30 / 70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz