

Sistema acustico ancorato all'osso

Ponto 4

Open Sound. Open Life.



Made for

iPhone | iPad | iPod



oticon
MEDICAL

Unisciti alla rivoluzionaria liberazione del suono e a un futuro uditivo interconnesso



Piattaforma Velox S™
– velocità e potenza



OpenSound Navigator™
– Suono a 360 gradi



Un cambio di paradigma nei sistemi acustici ancorati all'osso

La vita degli utilizzatori di apparecchi acustici di tutto il mondo è già cambiata grazie alla rivoluzionaria tecnologia di Oticon Opn™ e Oticon Opn S™. Per la prima volta, questa è adesso disponibile per utilizzatori di protesi acustiche ancorate all'osso. Questa tecnologia esclusiva offre un accesso costante al suono a 360 gradi e consente al cervello di decidere su cosa concentrarsi. Il risultato è un panorama sonoro pieno e aperto.



Incredibilmente piccolo

Ponto 4 è il più piccolo dispositivo ancorato all'osso sul mercato, con fascino discreto e prestazione affidabile.

E completamente wireless

Ponto 4 può essere collegato ai tuoi dispositivi elettronici preferiti; e con l'applicazione Oticon ON e la rete IFTTT può essere anche collegato a tutti i dispositivi predisposti per la connessione a Internet, come elettrodomestici, programmi email, ecc.

**Dati archiviati presso Oticon Medical*

***Utilizzando l'applicazione Oticon ON e la rete IFTTT*




Libera il suono con Ponto 4


Presentazione del rivoluzionario OpenSound Navigator™

Con Ponto 4 le tradizionali strategie di elaborazione del suono appartengono al passato. L'esclusivo rivoluzionario chip di Ponto 4 elabora il suono 50 volte più velocemente* e offre un accesso costante al suono a 360 gradi.

In questo panorama più completo e aperto, puoi scegliere autonomamente su quali suoni concentrarti – anche in ambienti rumorosi.


**Rispetto alla piattaforma Inium Sense*

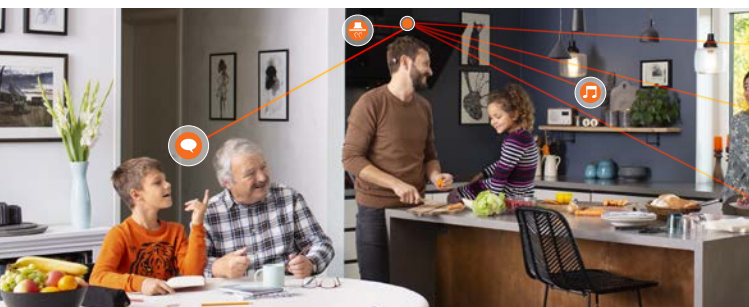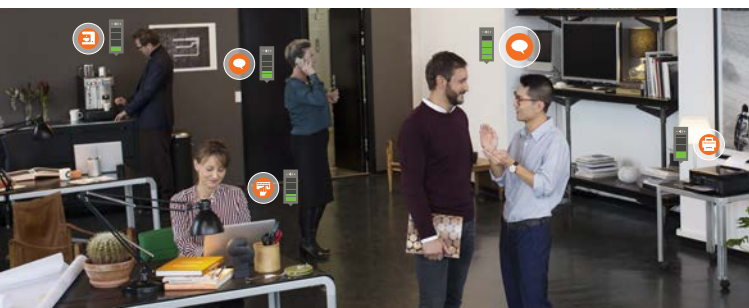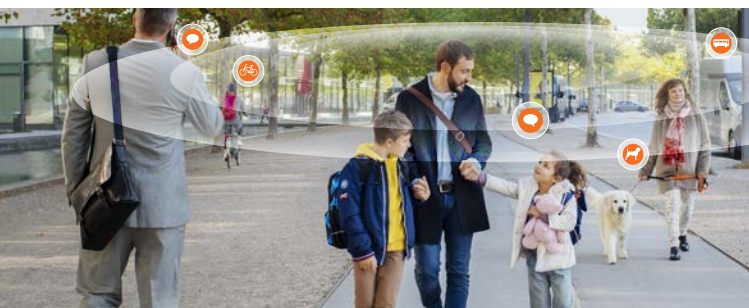

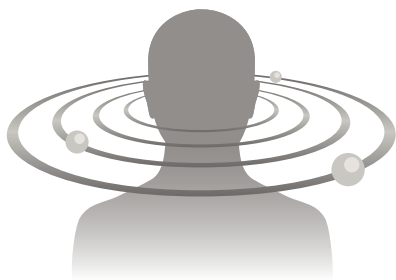


OpenSound Navigator

– 3 fasi in una frazione di secondo

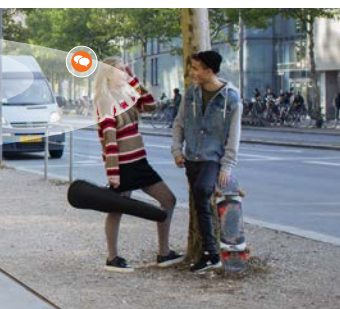


1: Analisi

Scansiona l'ambiente sonoro a 360° più di 100 volte al secondo per identificare e separare il rumore dal parlato.

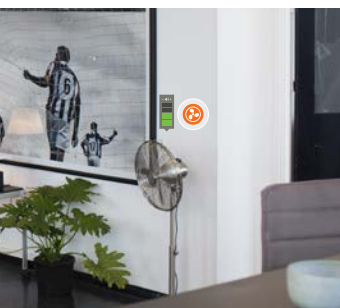

2: Bilanciamento

Riduce rapidamente i livelli di rumore intenso proveniente da direzioni specifiche, preservando il parlato.

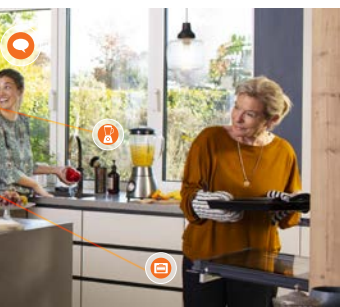

3: Rimozione del rumore

Attenua rapidamente il rumore diffuso rimanente, anche tra singole parole.

Il primo audioprocessore ancorato all'osso davvero connesso ad internet



Completamente connesso

Ponto 4 è più di un audioprocessore – è una parte di tecnologia portabile che può connetterti con i tuoi dispositivi preferiti.

Utilizza la tecnologia 2,4 GHz ed è inoltre il primo audioprocessore ad ancoraggio osseo al mondo connesso a Internet.*

Ma non è tutto. Il chip di Ponto 4 è predisposto per i rapidi cambiamenti nella tecnologia delle soluzioni per l'udito, per cui potrai rimanere connesso a Internet anche in futuro.

**Utilizzando l'App Oticon ON e la rete IFTTT*



Collegamento a IFTTT (the Internet of Things) – l'internet delle cose

Grazie a un'esclusiva soluzione cloud di Oticon, Ponto 4 e l'applicazione Oticon ON possono collegarsi a tutti gli altri dispositivi e servizi predisposti per la connessione a Internet.

Per esempio:

- Ricevi un allarme vocale quando qualcuno suona alla porta
- Ricevi un messaggio di testo quando la batteria è quasi scarica
- Passa al programma domestico quando entri in casa

Visita oticon.global per esplorare le tante opportunità.

Connessione wireless al tuo telefono e ai dispositivi preferiti



Made for iPhone

Ponto 4 si collega direttamente al tuo iPhone® e ti permette di parlare al telefono e sentire la conversazione nel tuo audioprocessore. È inoltre possibile effettuare lo streaming di musica direttamente dal tuo telefono senza un dispositivo supplementare.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

Controlla il tuo Ponto 4 con l'applicazione Oticon ON

L'applicazione Oticon ON ti permette di regolare in modo discreto il volume, passare da un programma all'altro, utilizzare "Find my hearing aids" ("Trova i miei apparecchi acustici"), accedere a Internet of Things (Internet delle Cose) e altro.

Scarica gratuitamente l'applicazione da App Store® e da Google Play™.



Per informazioni sulla compatibilità, visitare:
www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

Accessori wireless

Utilizza Ponto 4 in tante altre situazioni:

- **ConnectClip** – Trasforma il tuo Ponto 4 in una cuffia mobile utilizzabile senza mani con tutti gli smartphone
- **Adattatore per TV 3.0** – Ascolta la TV oppure la musica attraverso il tuo Ponto 4
- **Telecomando 3.0** – Regola il volume e cambia programmi



ConnectClip



Telecomando 3.0



Adattatore TV 3.0

L'audioprocessore ancorato all'osso piÙ piccolo al mondo

Provato, testato e piÙ che pronto per la vita quotidiana

Ponto 4 offre i rinomati standard di qualità Ponto con le dimensioni piÙ piccole a tutt'oggi. È stato accuratamente testato per soddisfare elevati standard di durata e affidabilità, tra cui l'esigente grado IP 57 per la resistenza all'acqua e alla polvere.



Scala 1:1



Caratteristiche:

- Luce LED di notifica
- Cassetto della batteria anti-manomissione
- Robusto giunto di accoppiamento metallico a molla
- Mascherine e adesivi per la personalizzazione



Chroma Beige
C090



Terracotta
C094



Chestnut Brown
C093



Per saperne di più sui tanti utilizzi di Ponto 4, rivolgiti oggi stesso al tuo professionista sanitario o visita il sito www.oticonmedical.com



Steel Grey
C092



Diamond Black
C063



Silver
C044

Ponto 4 personalizzato per te


Adesivi e mascherine

Scegli un colore adatto ai tuoi capelli o esprimi la tua personalità personalizzando il tuo Ponto 4 con vari adesivi e mascherine.



Colori delle mascherine

Scala 1:1

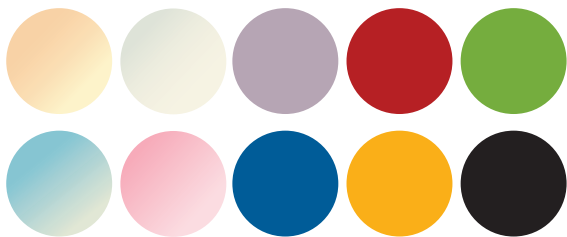

Adesivi



Because Sound Matters

Oticon Medical è un'azienda multinazionale specializzata in soluzioni uditive impiantabili, per far riscoprire il piacere di udire a persone di ogni fascia di età. In quanto appartenenti al gruppo Demant, un leader globale nel settore sanitario acustico con 14.500 persone in oltre 130 Paesi, abbiamo accesso a uno dei gruppi di ricerca e sviluppo più forti al mondo, alle ultimissime innovazioni tecnologiche e conoscenze audiomedicali.

Le nostre competenze derivano da oltre un secolo di innovazioni nell'elaborazione del suono e da decenni di esperienza pionieristica nella tecnologia degli impianti uditivi. Collaboriamo con pazienti, medici e professionisti sanitari, per assicurarci che ogni soluzione che creiamo venga progettata in base alle esigenze degli utenti. Condividiamo un impegno costante nel fornire soluzioni innovative ed assistenza per migliorare la qualità di vita delle persone, indipendentemente dalle loro condizioni personali. Perché noi sappiamo quanto il suono sia importante.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

206187IT / 2019.05