

Cochleair implantaatsysteem

Neuro 2

Blijf verbonden



oticon
MEDICAL

Blijf verbonden

Verbinding maken met de digitale wereld van vandaag vormt een belangrijk deel van de dagelijkse communicatie en plezier in het leven – van het beantwoorden van een gesprek op uw mobiele telefoon tot video-chatten of televisiekijken.

Neuro 2 connectiviteit

Geniet van de voordelen van digitaal streamen naar uw geluidsprocessor en transformeer uw Neuro 2 in een persoonlijke draadloze headset door middel van de connectiviteitsoplossingen van de Neuro 2. Deze oplossingen breiden uw opties voor digitale communicatie uit naar telefoongesprekken, één op één gesprekken in lawaaierige omgevingen, televisie kijken, muziek luisteren, praten in videogesprekken en nog veel meer.

Begin met de connectiviteitsoplossing die u het nuttigst vindt en voeg meer toe wanneer nodig. Praat met uw audioloog of vertegenwoordiger van Oticon Medical voor meer informatie.



Afstands-
bediening



Mobiele
telefoon



Televisie



Microfoon



Computer



Telefoon



Muziek



FM



Mini-jack



Ringleiding



App

Eén toestel om ze allemaal te verbinden


Via de Oticon Medical Streamer XM heeft u toegang tot een breed scala aan elektronische toestellen en kunt u draadloos geluid naar uw Neuro 2 sturen.

De Streamer wordt om uw nek gedragen en heeft drie toetsen voor de belangrijkste functies: telefoon, televisie en microfoon. Door gebruik te maken van 2,4 GHz Bluetooth-technologie is het compatibel met bijna alle Bluetooth®-apparaten – waaronder iPhone®, iPad® en iPod touch® en Android™ mobiele telefoons en tablets.


Persoonlijke afstandsbediening

De Streamer fungeert ook als afstandsbediening voor uw Neuro 2-geluidsprocessor en biedt u een alternatieve manier om van programma te wisselen, het volume aan te passen of het geluid om u heen te dempen.

Made for
 iPhone | iPad | iPod

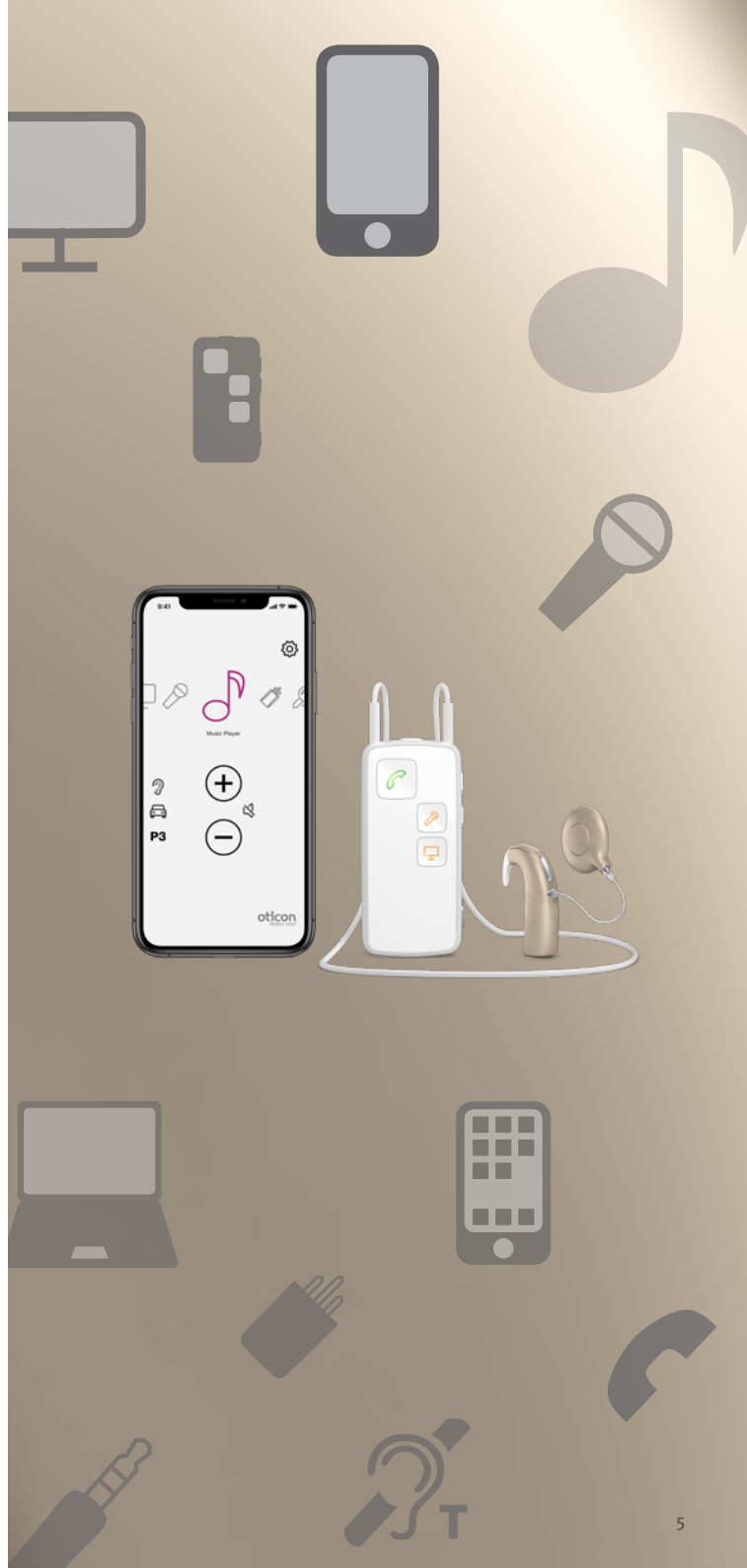

Slimme bediening vanaf uw smartphone

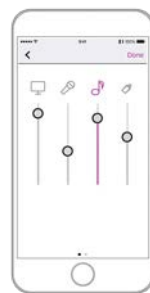


Gebruik de ConnectLine App om het geluid te regelen dat naar uw Neuro 2 wordt gestreamd

Met slechts enkele vegen en tikken kunt u met deze app het volume aanpassen, van programma wisselen op uw geluidsprocessor, schakelen tussen geluidsbronnen zoals televisie en muziek en het geluid om u heen dempen. U kunt de ConnectLine App gratis downloaden bij de App Store® en op Google Play™.



Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

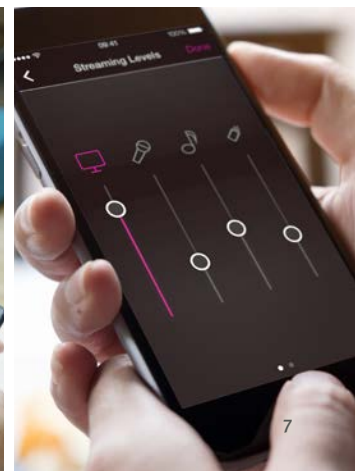

Stream gesprekken draadloos

Neuro 2 als uw persoonlijke headset

Mobiele telefoon

Met Bluetooth-technologie en de Streamer kunt u gesprekken op uw mobiele telefoon naar uw Neuro 2-geluidsprocessor streamen. Voer het gesprek op uw telefoon, of rechtstreeks op de Streamer en hoor het gesprek via uw Neuro 2. Omdat de Streamer uw spraak opvangt en verzendt, is het niet nodig om uw mobiele telefoon dicht bij uw mond te houden, zodat u een volledig handsfree gesprek kunt voeren.

Videogesprekken

U kunt videogesprekken voeren via uw mobiele telefoon, tablet of computer en het geluid rechtstreeks van de Streamer naar uw geluidsprocessor laten sturen.



Vaste telefoon

De ConnectLine Phone Adapter werkt met uw vaste telefoon en verandert uw geluidsprocessor in een draadloze headset. Om een gesprek te beantwoorden, drukt u gewoon op een toets op de Streamer of de ConnectLine App. Dit zorgt ervoor dat het fysieke opnemen van een telefoon tot het verleden behoort.

Eén systeem

Alle Neuro 2 connectiviteitsoplossingen zijn ontworpen om samen te werken. Bijvoorbeeld: als de telefoon gaat terwijl u televisie kijkt, kunt u dit horen en het gesprek beantwoorden. Als u het gesprek beëindigt, gaat het systeem automatisch door met het streamen van het geluid van de televisie.



Phone Adapter 2.0

Praten en autorijden – geen probleem



Handsfree communicatie tijdens het autorijden


Telefoongesprekken

Met de Streamer worden gesprekken van de mobiele telefoon draadloos naar uw Neuro 2 geluidsprocessor verzonden zodat u een telefoongesprek in de auto kunt voeren – zonder uw handen van het stuur te hoeven halen.

Praten in de auto

Als u tijdens de autorit graag met een passagier praat, kunt u gebruik maken van de ConnectLine microfoon. Deze wordt gedragen door de persoon met wie u praat en stuurt de stem naar uw geluidsprocessor. Door de microfoon te gebruiken hoeft u elkaar niet aan te kijken tijdens het praten en kunt u uw ogen op de weg houden.

Geniet van entertainment, op uw manier

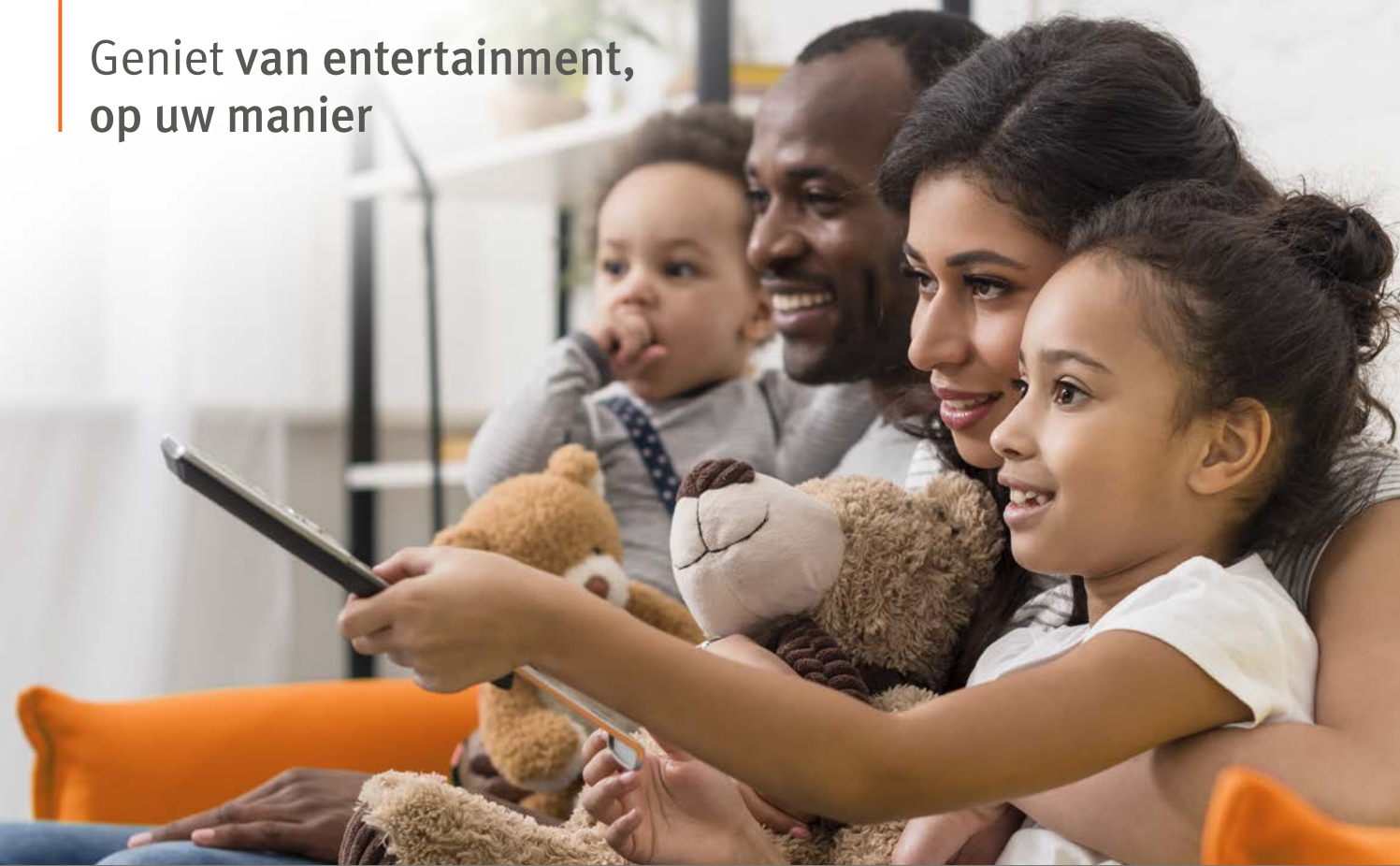

Open een wereld van entertainment door verbinding te maken met de televisie, radio, muziek en meer

Luisteren naar muziek en audio

De Streamer creëert een stabiele verbinding met diverse populaire entertainment apps op uw smartphone en tablet en zorgt ervoor dat u vanaf uw computer kunt streamen, zodat u rechtstreeks via uw geluidsprocessor naar muziek, audioboeken en andere audiobronnen kunt luisteren.

Televisiekijken

Gebruik de ConnectLine TV Adapter om het geluid van uw televisie via de Streamer naar uw geluidsprocessor te verzenden. Dit verandert uw geluidsprocessor in een persoonlijke headset en maakt van de Streamer – of ConnectLine App – een persoonlijke volumeregelaar. De TV Adapter kan geluid van de televisie naar de Streamer verzenden tot afstanden van 30 meter, zodat u een televisieprogramma in de huiskamer kunt volgen van op afstand.



TV Adapter 2.0

Maak er deel van uit



Hoor wat belangrijk is wanneer u in openbare gelegenheden bent

Het kan uitdagend zijn de stemmen te horen die u wilt horen wanneer u zich in openbare gelegenheden bevindt. Wanneer u op straat bent, in een restaurant of deelneemt aan een dienst of lezing, kunt u last hebben van vele concurrerende geluidsbronnen in de omgeving.

ConnectLine microfoon

In situaties waar uw partner op enige afstand is of als u zich in een rumoerige omgeving bevindt, kan de kleine, discrete en draadloze ConnectLine microfoon door uw gesprekspartner worden gedragen om zijn/haar stem naar uw Neuro 2 geluidsprocessor te sturen. Zo kunt u het gesprek volgen en u nog altijd richten op uw omgeving.

De microfoon kan worden bediend vanaf uw Streamer en de ConnectLine App.



ConnectLine en microfoon

Ringleidingsystemen

Geniet van toegang tot ringleidingsystemen in plaatsen zoals bioscopen, theaters en collegezalen.

Met de ingebouwde luisterspoel van de Streamer drukt u slechts op één toets op de Streamer of ConnectLine App om verbinding te maken met ringleidingen. Als u een Neuro 2 geluidsprocessor aan beide oren draagt, of een combinatie gebruikt van een compatibel hoortoestel en de Neuro 2 geluidsprocessor, wordt het geluid naar beide oren gestuurd.



Luisteren in de klas



Neuro 2 als een draadloze headset in het leslokaal

Als u een student bent, of om een andere reden afhankelijk bent van FM, dan kunt u deze functionaliteit in het leslokaal, de collegezaal of andere plaatsen gebruiken via de Streamer. De Streamer heeft een ingebouwde Europin waarmee een Roger™* of FM-ontvanger bevestigd kan worden. Dan wordt de geluidsprocessor een persoonlijke headset en heeft u geen speciale FM-oplossing nodig om het systeem te kunnen gebruiken.

Een andere manier om de stem van de leerkracht naar uw geluidsprocessor te verzenden is via de ConnectLine microfoon. Dit is handig voor lezingen of langere presentaties.



Streamer met FM-ontvanger

Opties voor bimodale gebruikers



Stuur geluid draadloos naar beide oren

Als u een conventioneel hoortoestel gebruikt met uw Neuro 2, zoals een Oticon Dynamo of Oticon Sensei SP, dan kunt u de Neuro 2 connectiviteitsoplossingen met beide gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de Streamer en ConnectLine App gebruiken om het geluid van uw elektronische apparaten te regelen en het geluid draadloos naar zowel uw Oticon hoortoestel als uw Neuro 2 geluidsprocessor te sturen. De aanpassingen die u maakt aan het volume of de programmawijzigingen worden dan in beide toestellen doorgevoerd.

Sensei SP en
Neuro 2



Dynamo en
Neuro 2



Because sound matters

Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van implanteerbare hoeroplossingen, die zich er volledig op toelegt om mensen in elke levensfase de magische wereld van geluid te laten ervaren. Als onderdeel van de Demant Group, een wereldwijde leider op het gebied van hoorzorg met 14.500 werknemers in meer dan 130 landen, hebben wij toegang tot een van 's werelds sterkste onderzoeks- en ontwikkelingsteams, de nieuwste technologische ontwikkelingen en inzichten in de hoorzorg.

Onze deskundigheid omvat meer dan honderd jaar ervaring in de audiologie en geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk in de technologie van hoorimplantaten. Wij werken samen met patiënten, artsen en andere professionals in de hoorzorg om ervoor te zorgen dat iedere oplossing die we maken ontwikkeld wordt op basis van de behoeften van de eindgebruiker. Wij zetten ons voortdurend in om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan te bieden die de levenskwaliteit van mensen verbetert, waar het leven hen ook brengt. Omdat we weten hoe belangrijk geluid voor u is.



Oticon Medical

 NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com